

PHILIPS

AVENT



Jednostruka
električna izdajalica

Hands-free

Oponaša bebin ritam pijenja

Sloboda tijekom izdavanja

Jednostavno se upotrebljava, čisti
i sastavlja

Sveobuhvatno i bespriježno
pristajanje



SCF531/11

Oslobodite ruke. Oslobodite svoje vrijeme.

Oponaša ritam pijenja vaše bebe

Philips Avent jednostruka električna izdajalica za uporabu bez ruku (hands-free) napravljena je za učinkovito* i udobno izdavanje. Oponaša ritam vaše bebe, a uz snagu, nježnost i lagani dizajn, idealan je partner za izdavanje bez upotrebe ruku.

Fizička sloboda tijekom izdavanja

- Slobodno se krećite uz izuzetno laganu čašicu za prikupljanje
- Udobnost nosivog dizajna koji omogućuje maksimalno kretanje

Oponaša bebin ritam pijenja

- Učinkovito izdajte* uz ritam koji oponaša bebin
- Tiho pumpanje uz snagu kakvu imaju modeli koji se upotrebljavaju u bolnicama

Jednostavno se upotrebljavaju, čiste i sastavljaju

- Pratite protok mlijeka zahvaljujući potpuno prozirnoj čašici za prikupljanje
- Personalizirajte sesiju uz 24 načina rada
- Jednostavno čišćenje i sastavljanje uz manje dijelova

Sveobuhvatno i bespriježno pristajanje

- Asortiman štitnika za dojke i umetaka za štitnike raznih veličina – za svaku majku
- Silikonski štitnik nježno se oblikom prilagođava vašoj dojci

Istaknute znač.

Oponaša bebin ritam pija



Bebe znaju kako najbolje piti! Zato naša handsfree električna izdajalica oponaša njihov prirodni ritam pija – tako ćete pronaći vlastiti ritam za učinkovito* izdavanje i optimalan izlaz mlijeka. Uz do 85 usisa u minuti, Philips Avent izdajalica za uporabu bez ruku dva je puta brža od većine drugih izdajalica**.

Motor snage poput onih koji se upotrebljavaju u bolnicama




Gotovo nečujna jedinica motora pruža snagu kakvu imaju modeli koji se upotrebljavaju u bolnicama i koju očekujete od tradicionalne izdajalice, ali u kompaktnoj i nosivoj jedinici. Zahvaljujući punjivoj bateriji bežična jedinica motora snažno i diskretno pumpa na bilo kojem mjestu.

Jedinstveni štitnici SkinSense



Naš jedinstveni silikonski štitnik za dojku SkinSense dizajniran je za vrhunsku udobnost, nježno se oblikom prilagođavajući vašoj dojci s pomoću prirodne topline vašeg tijela. Štitnik za dojku napravljen je od silikona koji se može upotrebljavati za hranu, tako da možete biti bezbrižni.

Prozirna čašica za prikupljanje

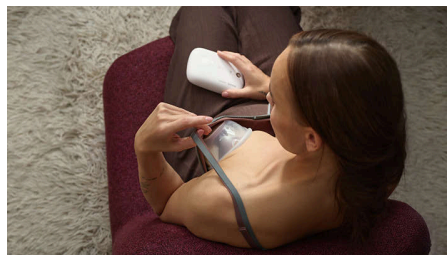

Prozirna čašica za prikupljanje pruža neometan pogled unutra. Pomaže vam pravilno postaviti bradavicu kako bi se postigao najbolji izlaz mlijeka i kako biste mogli vizualno pratiti količinu izdojenog mlijeka. Za pouzdano izdavanje od prve do posljednje kapi.

Izuzetno lagana čašica za prikupljanje




Masa naše čašice za prikupljanje tek je nešto veća od 100 grama kad je prazna – do 3 puta laganiya od potpuno nosive izdajalice. Čašica se može udobno smjestiti u grudnjak i jedva je vidljiva.

Nosite je na svoj način




Naša izdajalica isporučuje se s isprepletenom vezicom za nošenje i kopčom za pričvršćivanje na odjeću kako biste jedinicu motora mogli nositi preko tijela ili pričvršćenu za pojas. Budući da imate slobodu nositi je na željeni način, možete održavati protok znajući da vam je kontrola nadohvat ruke. Upotrijebite spojnicu cijevi ili podesite vezicu kako bi vam izdajalica najbolje pristajala.

Prilagođeno izdavanje

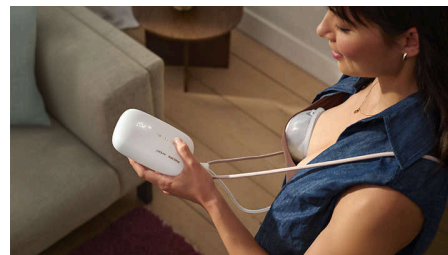


Najbolje iskoristite svaku sesiju uz 8 načina rada za stimulaciju protoka mlijeka i 16 načina rada za izdavanje. Možete precizno prilagođavati dok izdajate, a s obzirom na to da se idealna postavka automatski memorira, izdajalica je uvijek spremna za rad.

Jednostavno čišćenje i sastavljanje

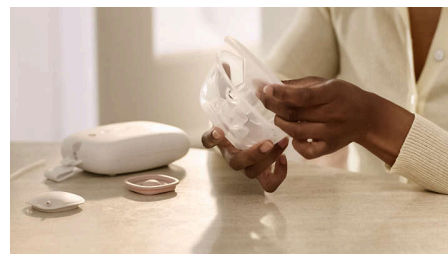

Naša izdajalica i dodatna oprema dizajnirani su da budu što je moguće jednostavniji. Zahvaljujući samo nekoliko dijelova koji se povezuju, svaka čašica za prikupljanje vrlo se jednostavno rastavlja, čisti (ručno ili u perilici posuda) i sastavlja.

Pronađite veličinu koja vam najbolje odgovara

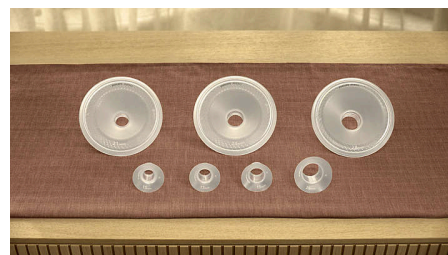

Pružamo podršku svakoj majci kako bi se osjećala najbolje što može, a odgovarajuće pristajanje bitan je dio toga. Naš asortiman štitnika za dojke i umetaka za štitnike različitih veličina pokriva potrebe 99 % majki. Možete ih kupiti zasebno kako biste uživali u vrhunskoj udobnosti dok izdajate.

Specifikacije

Snaga

Izvor: Punjiva baterija / USB-C (adapter nije priložen)

Materijal

Čašica, Prednji poklopac, pokrov štitnika za dojku: Polipropilen

Štitnik za dojku, membrana, ventil, umetak:

Tekući silikon

Silikonska cijev: Silikon

Što se nalazi u paketu

USB-C kabel: 1 komad

Vezica za nošenje: 1 komad

Punjiva jedinica motora (s odvojjivom kopčom):

1 komad

Čašica za prikupljanje (sastavljena): 1 komad

Silikonske cijevi: 1 komad

Pokrov štitnika za dojku (zaštita od prašine): 1 komad

Štitnik za dojku (21 mm, 24 mm): Svaki 1 komad

Kartica za određivanje veličine bradavice: 1

komad

Umetak od 19 mm: 1 komad

Jednostavnost uporabe

Uporaba izdajalice: Jednostavno se upotrebljavaju, čiste i sastavljaju

Funkcije

Fleksibilnost pokreta: Izdajanje bez uporabe ruku

Postavke personalizacije: 16 razina usisavanja u načinu rada za izdajanje, 8 razina usisavanja u načinu rada za stimulaciju

Jedinica motora: Punjiva baterija / USB-C, Potpuno punjenje baterije traje do 1,5 sati, a baterija traje pribl. 5 sesija izdajanja

Podaci o štitniku za dojku i umetku: Dostupno je nekoliko veličina kako bi se osiguralo najbolje pristajanje

