

# PHILIPS



Dispositivo di epilazione  
IPL con SenseIQ

Lumea IPL 9900 Series

Sensore SmartSkin

3 accessori intelligenti: corpo,  
viso, precisione

Funzionalità esclusive dell'app  
basate su intelligenza artificiale

Funzionamento cordless e con  
filo



BRI953/02

## Il nostro IPL più intelligente con funzionalità esclusive SkinAI

Goditi 18 mesi di pelle liscia e depilata\*

Scopri la nostra soluzione IPL più intelligente di sempre per una pelle liscia a lungo. Il nostro dispositivo senza filo più efficace Lumea IPL con tecnologia SenseIQ, ora è dotato della esclusiva funzione SkinAI per analizzare la tua pelle e monitorare i tuoi progressi direttamente con l'APP Lumea.

### **Delicato ed efficace per una pelle liscia a lungo**

- Risultati rapidi con trattamenti solo ogni 2 settimane
- Per la massima praticità, con e senza filo
- Sviluppato in collaborazione con dermatologi per essere facile da utilizzare ed efficace

### **Soluzione completa per viso e corpo**

- Soluzione completa per viso e corpo con 3 accessori intelligenti
- Adatto alla maggior parte delle tonalità di pelle e dei colori del pelo

### **Trattamento di epilazione a luce pulsata IPL personalizzato**

- Delicato e comodo grazie alla tecnologia SenseIQ
- Analisi dei peli Smart Body con SkinAI

## Lumea IPL 9900 Series

Dispositivo di epilazione IPL con SenseIQ

BRI953/02

# In evidenza

### 2 trattamenti al mese per risultati rapidi



4 trattamenti ogni 2 settimane per iniziare, poi solamente una volta al mese per mantenere i risultati: quindi, la metà dei trattamenti rispetto agli altri brand.

### Tecnologia SenseIQ



Lumea Serie 9900 offre cinque impostazioni di luce regolabili facilmente. Il nostro sensore SmartSkin rileva la tonalità della tua pelle consigliando l'impostazione di luce più adatta a te. Gli accessori intelligenti personalizzano il trattamento in base alla zona del corpo.

### Per la massima praticità, con e senza filo



Philips Lumea è progettato per un utilizzo semplice e pratico: con filo per un trattamento rapido su aree più estese del corpo, come le

gambe, oppure senza filo e a batteria per trattare con precisione le zone del corpo difficili da raggiungere.

### 3 accessori intelligenti




Gli accessori appositamente progettati si adattano alla perfezione ad ogni curva del corpo e attivano i programmi più efficaci in base alla zona quando sono collegati. Viso: design piatto e piccola finestra dotata di filtro UV. Corpo: design curvato verso l'interno con ampia finestra di trattamento. Precisione: design curvato verso l'esterno per le zone più difficili da raggiungere.

### Sviluppato in collaborazione con dermatologi



In qualità di leader nel settore delle tecnologie per la salute, Philips ha sviluppato Lumea IPL in collaborazione con dermatologi, affinché tu possa utilizzarlo a casa tua in modo sicuro e funzionale. Grazie a questa tecnologia già impiegata nei centri estetici, Lumea IPL offre un trattamento delicato, anche sulle zone sensibili.

### Funzionalità esclusive SkinAI

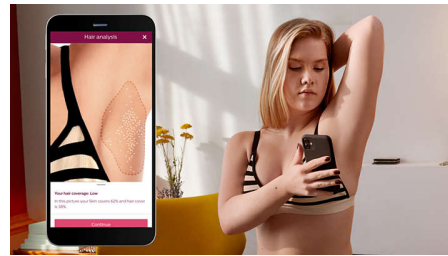

La nostra app di coaching gratuita offre una guida dettagliata, ora integrata con l'esclusiva tecnologia SkinAI per analizzare i peli del corpo e monitorare il trattamento.

### Per la maggior parte delle tonalità di pelle e colori del pelo



La tecnologia IPL ha bisogno di contrasto tra il pigmento del pelo e quello della pelle, pertanto funziona su peli di colore biondo scuro naturale oppure su peli castani o neri e su pelli da chiara a marrone scuro (I-V).

## Specifiche

### Specifiche tecniche accessori

**Accessorio trattamento corpo:** Forma: convesso, Dimensione finestra: 4,1 cm<sup>2</sup>, Trattamento personalizzato per il corpo: gambe, braccia e addome

**Accessorio trattamento viso:** Forma: piatto, Dimensione finestra: 2 cm<sup>2</sup>, filtro aggiuntivo, Trattamento personalizzato per il viso: labbro superiore, mento e linea della mascella

**Accessorio trattamento di precisione:** Forma: concavo, Dimensione finestra: 3 cm<sup>2</sup>, Trattamento personalizzato per la zona bikini e per le ascelle

### Impostazioni di sicurezza regolabili

**Filtro UV integrato:** Protegge la pelle dai raggi UV

**5 impostazioni di intensità della luce:** Regolabile in base al tipo di pelle

**Sistema di sicurezza integrato:** Impedisce

l'attivazione accidentale degli impulsi

**Sensore del fototipo:** Rileva il colore della pelle

**Sensore SmartSkin:** La giusta impostazione in ogni momento

### Modalità di applicazione

**Scorrimento e flash:** Per un'applicazione rapida

**Pressione e flash:** Per il trattamento su zone di piccole dimensioni

**Con filo/cordless:** Funzionamento cordless e con filo

### Specifiche tecniche

**Voltaggio:** 100-240 V

**Tipo di batteria:** Batteria ricaricabile

**Lampada ad alte prestazioni:** Progettato per durare a lungo, eroga 450.000 flash, pari a 39 anni di trattamenti con lampada\*\*

### Assistenza

**Garanzia:** 2 anni di garanzia globale + 1 anno extra di garanzia registrando il prodotto entro 90 giorni

### Accessori inclusi

**Istruzioni d'uso:** Manuale utente

**A magazzino:** Custodia elegante

**Adattatore:** 19,5V / 4000mA

### Tempo di applicazione

**Parte inferiore della gamba:** 8,5 min

**Ascelle:** 2,5 min

**Zona bikini:** 2 minuti

**Zone del viso:** 1,5 minuti



\* \*A partire da 3 trattamenti. Riduzione media dei peli dopo 18 mesi: 86% per la parte inferiore delle gambe

\* \*Quando si segue il programma di trattamento. Calcolato per l'utilizzo sulla parte inferiore delle gambe, zona bikini, ascelle e viso. La durata della lampada non si estende oltre alla garanzia internazionale di 2+3 anni di Philips