

PHILIPS

AVENT



Dvojna električna
prsna črpalka

Hands-free

Posnema dojenčkov ritem pitja

Svoboda med črpanjem

Enostavna uporaba, čiščenje in
sestavljanje

Vključujoče in brezhibno
prileganje



SCF532/11

Imejte bolj proste roke. In več prostega časa.

Posnema dojenčkov ritem pitja

Prostoročna dvojna električna prsna črpalka Philips Avent je zasnovana za učinkovito* in udobno črpanje. Posnema dojenčkov ritem in s svojo zmogljivostjo, nežnostjo in majhno težo predstavlja idealen pripomoček za prostoročno črpanje.

Fizična svoboda med črpanjem

- Z izredno lahkimi posodica za zbiranje mleka se lahko brezskrbno premikate
- Nosljivo udobje za maksimalno svobodo premikanja

Posnema dojenčkov ritem pitja

- Črpajte učinkovito* z ritmom, ki posnema dojenčkovega
- Tiho črpanje z bolnišnično zmogljivostjo

Preprosta uporaba, enostavno čiščenje in sestavljanje

- Enostavno čiščenje in sestavljanje z manj sestavnimi deli
- Spremljajte pretok mleka s popolnoma prozornimi posodicami za zbiranje mleka
- Prilagodite črpanje svojim potrebam

Vključujoče in brezhibno prileganje

- Silikonski ščitniki se nežno prilagodijo vašim prsim
- Ponudba velikosti ščitnikov za prsi in vstavkov za vsako mamo

Značilnosti

Posnema dojenčkov ritem pitja



Dojenčki vedo, kako najbolje piti! Zato naša prostoročna električna prsna črpalka posnema njihov naraven ritem pitja – da lahko vi najdete svoj ritem za učinkovito* črpanje in optimalno proizvodnjo mleka. Z do 85 črpalni gibi na minuto je prostoročna prsna črpalka Philips Avent 2-krat hitrejša od večine drugih črpalk.

Motor z bolnišnično zmogljivostjo




Skoraj neslišna motorna enota zagotavlja bolnišnično zmogljivost, ki jo pričakujete od tradicionalnih prsnih črpalk, a jo zagotavlja kompaktna in nosljiva enota. Zahvaljujoč akumulatorski bateriji, brezžična motorna enota zagotavlja zmogljivo in diskretno črpanje kjer koli.

Edinstveni ščitniki SkinSense



Naši edinstveni silikonski ščitniki za prsi SkinSense so zasnovani za vrhunsko udobje, saj se nežno prilagodijo vašim prsim s pomočjo naravne toplote telesa. Za popolno brezskrbnost so ščitniki za prsi izdelani iz silikona za uporabo v prehrabeni industriji.

Pregledno zbiranje

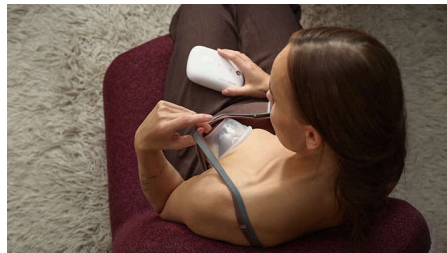

Prozorne posodice za zbiranje mleka ponujajo neoviran pogled v notranjost. Pomagajo pri pravilni namestitvi na bradavico za najboljšo proizvodnjo mleka in vizualno spremljanje količine materinega mleka. Za samozavestno črpanje od prve kapljice pa vse do konca.

Izredno lahka posodica za zbiranje mleka



Ena prazna posodica za zbiranje mleka je le malce težja od 100 g, kar je 3-krat manj od popolnoma nosljivih prsnih črpalk. Posodice udobno počivajo v nedrčku, brez znakov prisotnosti.

Nosite jo na svoj način




Naši črpalke je priložena pletena vrstica za prenašanje in zaponka za oblačila za prenašanje motorne enote čez ramo ali okoli pasu. S svobodo prenašanja na svoj način ostanete v svojem ritmu, saj se zavedate, da je nadzor na doseg roke. Za natančnejše prilagajanje prileganja uporabite spojnik za cev in regulator vrvice.

Prilagojeno črpanje




Z 8 stopnjami sesanja za stimulacijo pretoka mleka in 16 stopnjami sesanja lahko dobro izkoristite vsako črpanje. Nastavitve lahko natančneje prilagodite tudi med črpanjem, dodatno pa lahko svojo popolno nastavitve samodejno shranite, da je vaša črpalka vedno pripravljena na uporabo.

Preprosto čiščenje in sestava

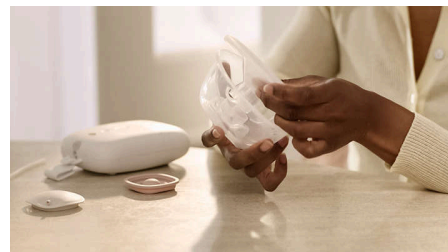

Črpalke in dodatno opremo smo zasnovali za čim preprostejšo uporabo. Zahvaljujoč le nekaj priključkom je razstavljanje, čiščenje (ročno ali v pomivalnem stroju), razkuževanje in sestavljanje posamezne posodice za zbiranje mleka enostavno.

Poiščite ustrezno velikost

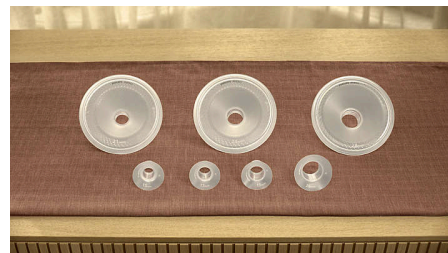

Želimo podpreti vsako mamo pri najboljšem počutju in izbira ustrezne velikosti je tukaj bistvena. Naša ponudba velikosti ščitnikov za prsi in vstavkov za ščitnike je primerna za 99 % mamic. Naprodaj ločeno, da lahko med črpanjem izkusite vrhunsko udobje.

Specifikacije

Napajanje

Vir: Akumulatorska baterija/USB-C (napajalnik ni priložen)

Material

Posodica, sprednji pokrovček, pokrovček za

ščitnik: Polipropilen

Ščitnik, membrana ventil in vstavki za prsi:

Tekoči silikon

Silikonska cevka: Silikon

Kaj vsebuje

Kabel USB-C: 1 kos

Vrvice za prenašanje: 1 kos

Spojnik za cev: 1 kos

Akumulatorska motorna enota (z odstranljivo zaponko): 1 kos

Posodica za zbiranje (sestavljena): 2 kosa

Silikonske cevke: 2 kosa

Protiprašni pokrovček ščitnika za prsi: 2 kosa

Ščitnik za prsi (21 mm, 24 mm): 2 kosa vsak

Kartica za določanje velikosti bradavice: 1 kos

Vstavki – 19 mm: 2 kosa

Enostavna uporaba

Uporaba prsne črpalke: Preprosta uporaba, enostavno čiščenje in sestavljanje

Funkcije

Prilagodljivost pri premikanju: Prostoročno črpanje

Nastavitve za prilagoditev: 16 stopenj sesanja v načinu črpanja, 8 stopenj sesanja v načinu stimulacije

Motorna enota: Akumulatorska baterija/USB-C, Da se baterija popolnoma napolni traja do 1,5 ure, kar zadostuje za približno 5 črpanj

Lastnosti ščitnika in vstavka za prsi: Več velikosti za najustreznejše prileganje

