

PHILIPS



IPL-hårborttagningsenhet
med SenseIQ

Lumea IPL 8000 Series

SmartSkin-sensor

3 intelligenta tillbehör: kropp,
ansikte, precision

Med SenseIQ-teknik

Användning med sladd



BRI946/00

Skräddarsydd för dig med SenseIQ

Få tolv månader hårfri och len hud*

Få en snabb och anpassad behandling med vår Lumea IPL i 8000-serien. SenseIQ-teknik med smarta tillbehör och Lumea IPL-app för att få len hud länge.

Skonsam och effektiv för len hud som varar länge

- Skonsam och behaglig med SenseIQ
- Snabba resultat med behandlingar endast varannan vecka
- Utvecklad i samarbete med dermatologer för att vara enkel och effektiv
- Extra lång sladd för ökad flexibilitet under behandlingen

Komplett lösning för ansikte och kropp

- Komplett lösning för ansikte och kropp med tre smarta tillbehör
- Lämpar sig för de flesta hudtoner och hårfärger

Anpassad IPL-hårborttagningsbehandling

- Optimera din rutin med Philips Lumea IPL-appen

Lumea IPL 8000 Series

IPL-hårborttagningsenhet med SenseIQ

BRI946/00

Funktioner

Två gånger i månaden för snabba resultat



Kom igång med den inledande fasen med endast fyra behandlingar varannan vecka – det är hälften så många behandlingar som med andra varumärken. Gör sedan uppfryschningar varje månad för att bibehålla resultaten.

SenseIQ-teknik



Lumea 8000-serien har fem enkelt justerbara ljusinställningar. Vår SmartSkin-sensor läser av din hudton och hjälper dig hitta den behagligaste inställningen. Intelligent tillbehör anpassar behandlingen efter varje kroppsdel.

Extra lång sladd



Smidig att använda tack vare en extra lång sladd för enkel åtkomst och bättre manövrering.

Tre smarta tillbehör



Specialdesignade tillbehör följer kroppens konturer perfekt och aktiverar automatiskt de mest effektiva programmen för varje kroppsdel när de ansluts. Ansikte: platt design och litet fönster med UV-filter. Kropp: svängt inåt med ett stort fönster. Precision: svängt utåt för svåråtkomliga ställen.


Utvecklad i samarbete med dermatologer



Som ledare inom medicinsk teknik har Philips utvecklat Lumea IPL tillsammans med dermatologer för enkel och effektiv användning

hemma. Lumea IPL har utvecklats utifrån teknik som används på professionella skönhetsalonger och ger en skonsam behandling, även i känsliga områden.

Philips Lumea IPL-appen

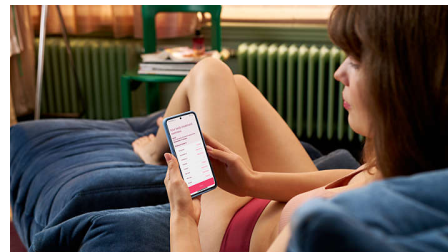

Vår kostnadsfria instruktionsapp hjälper dig att planera och hålla dig till ditt behandlingsschema och vägleder dig sedan genom varje session steg för steg. Har laddats ned av fler än 2,1 miljoner användare.

För de flesta hud- och hårtyper



IPL behöver ha kontrast mellan pigmentet i hårfärgen och pigmentet i hudtonen, och därför fungerar det på naturligt mörkblont, brunt och svart hår och på hudtoner som sträcker sig från ljus till mörkbrun (I–V).

Specifikationer

Tekniska specifikationer tillbehör

Tillbehör för kroppsbehandling: Form: konvex svängd, Fönsterstorlek: 4,1 cm², Skräddarsydd behandling för kroppen: ben, armar och mage

Tillbehör för ansiktsbehandling: Form: platt, Fönsterstorlek: 2 cm², extra filter, Skräddarsydd behandling för ansiktet: överläpp, haka och käklinje

Tillbehör för precisionsbehandling: Form: konkav svängd, exakt, Fönsterstorlek: 3 cm², Skräddarsydd behandling för bikinilinen och armhålorna

Säkerhet och justerbara inställningar

Integrerat UV-filter: Skyddar din hud från UV-ljus

5 ljusenergiinställningar: Justerbar för din hudtyp

Integrerat säkerhetssystem: Förhindrar

oavsiktliga ljuspulser

SmartSkin-sensor: Rätt inställningsindikering på begäran

Programläge

Dra och skicka ljuspuls: För snabb användning

Tryck och skicka ljuspuls: För behandling på små områden

Användning med eller utan sladd: Användning med sladd

Tekniska specifikationer

Spänning: 100–240 V

Lampa med höga prestanda: Gjord för att hålla, 450 000 ljuspulser, vilket motsvarar en lamplivslängd på 39 år**

Service

Garanti: 2 års global garanti + 1 extra års garanti vid produktregistrering inom 90 dagar

Artiklar som ingår

Bruksanvisning: Användarhandbok

Förvaring: Skönhetsfodral

Adapter: 19,5 V/4000 mA

Appliseringstid

Armhålor: 2,5 min.

Bikinilinj: 2 min

Områden i ansiktet: 1,5 min.

Underben: 8,5 min

