

# PHILIPS

## sonicare



Escova de dentes  
recarregável

Series 7100

Remove até 10 vezes mais placa  
bacteriana\*

Gengivas até 7x mais saudáveis\*\*

Tecnologia Next Generation  
Sonicare

Sensor de pressão visual



HX7423/08

## Cuidado avançado para gengivas mais saudáveis\*\*\*

Elimina suavemente até 10 vezes mais placa bacteriana\*

Apoie a saúde das gengivas sempre que escovar os dentes. A nossa tecnologia Sonicare de próxima geração oferece uma limpeza potente mas suave, mesmo em áreas difíceis de alcançar, com gengivas até 7 vezes mais saudáveis\*\* e uma remoção até 10 vezes superior de placa bacteriana\*.

### Escovagem sem esforço

- Escolha a sua experiência de limpeza ideal
- Sessões de escovagem orientadas
- Informações de escovagem na palma da sua mão
- Continue a escovar da melhor forma possível com o alerta para a substituição da cabeça da escova

### Desenvolvida para o seu estilo de vida

- 21 dias de escovagem regular
- Tenha o cuidado, carregue-o em qualquer lado

### Sinta o cuidado da Sonicare

- Gengivas até 7x mais saudáveis\*\*
- Remoção superior da placa bacteriana e dentes mais brancos\*
- Ajuda a proteger as suas gengivas com o sensor de pressão

## Series 7100

Escova de dentes recarregável

HX7423/08

# Destaques

### Cuidado adicional para as suas gengivas



Apoie a saúde das gengivas com esta cabeça da escova G3 especialmente formulada para a saúde das gengivas. A disposição das cerdas permite que as cerdas exteriores mantenham a linha das gengivas escovada, mesmo quando está a concentrar-se nos dentes. O resultado é gengivas até 7 vezes mais saudáveis em duas semanas\*\*. A sua flexibilidade técnica também o ajuda a remover até 10 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual\*.

### Branqueia e dá brilho



Esta escova de dentes elétrica utiliza a nossa tecnologia Sonicare de próxima geração, que proporciona a nossa escovagem mais fiável e consistente para obter sempre resultados excelentes. O motor ajusta automaticamente a potência para que não exista nenhuma diminuição do desempenho quando atinge as áreas mais difíceis de limpar. Desfrute de uma

limpeza suave, mas eficaz, para os seus dentes e gengivas com 62 000 movimentos das cerdas por minuto. A Sonicare Fluid Action suporta a limpeza das cerdas ao fazer com que o fluido penetre em profundidade entre os dentes e ao longo da linha das gengivas.

### Sensor de pressão visual



Esta escova de dentes elétrica Sonicare conta com um anel luminoso na base, que lhe indica de forma simples que está a exercer demasiada pressão. Quando a luz acender, faça menos pressão e as suas gengivas permanecerão protegidas.

### Modos e intensidades



Melhore a sua limpeza com 12 definições de escovagem. Quer pretenda um pouco mais de vigor ou um foco específico para a sua limpeza,

ambos são possíveis. Escolha entre o modo Clean, Sensitive, Gum Health e White. Escolha uma das três definições de intensidade.

### App Philips Sonicare



Atinja os seus objetivos de saúde oral com a escova de dentes e a aplicação Sonicare. Os dois emparelham-se perfeitamente para proporcionar uma escovagem orientada, dicas e sugestões e conteúdo personalizado para si. Juntos, são imparáveis.

### Estojo de viagem para carregamento



O nosso estojo de viagem para carregamento com uma porta de carregamento permite-lhe carregar o seu dispositivo em qualquer lugar. É suficientemente resistente para manter a sua escova de dentes Sonicare segura, mas suficientemente compacto para caber em qualquer saco, tornando-o no companheiro de viagem perfeito.

## Series 7100

Escova de dentes recarregável

HX7423/08


# Destques

### SmarTimer e BrushPacer



Escove durante o tempo adequado com os temporizadores de limpeza da Sonicare. A cada 20 segundos, o BrushPacer solicitará que limpe uma nova área. Após 2 minutos, o SmartTimer indica que a sua sessão está concluída.

### Lembrete de substituição

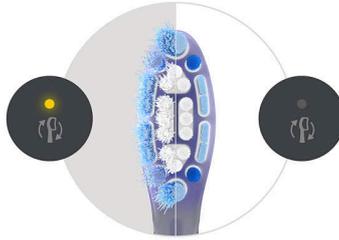

Sabia que as cabeças da escova se tornam menos eficazes após três meses? Os especialistas em saúde oral recomendam a substituição regular da cabeça da escova. É por este motivo que as escovas de dentes Philips Sonicare possuem alertas para a substituição da cabeça da escova.

Monitoriza a frequência e a intensidade da sua escovagem e alerta-o quando é necessário substituir a cabeça da escova.

### 21 dias de vida útil da bateria



Desfrute de até 21 dias de escovagem regular após uma única carga. Isto confere um novo nível de conveniência à sua rotina de escovagem.

# Series 7100

Escova de dentes recarregável

HX7423/08

## Especificações

### Intensidades

**Elevada:** Para melhorar a limpeza

**Média:** Para limpeza diária

**Baixa:** Para dentes e gengivas sensíveis

### Alimentação elétrica

**Voltagem:** 100-240 V

### Especificações técnicas

**Pilha:** Recarregável

**Tempo de funcionamento (carga total a carga vazia):** 21 dias

**Tipo de pilha:** Iões de lítio

**Consumo de energia:** Em modo de espera sem ecrã <0,5 W

### Design e acabamento

**Cor:** Azul-marinho

### Assistência

**Garantia:** 2 anos de garantia limitada

### Compatibilidade

**Tecnologia Bluetooth sem fios:** Aplicação de escovagem conectada

**Compatibilidade Android:** Telemóveis Android

com Bluetooth 4.0 e superior

**Compatibilidade iOS:** iPhone com Bluetooth 4.0 e superior

### Fácil de utilizar

**Pega:** Design ergonómico esguio

**Compatibilidade da pega:** Cabeças de escova de encaixe fácil

**Indicador de bateria:** Ícone iluminado indica a carga da bateria

**Estojo de viagem:** Estojo de viagem para carregamento

**Temporizador:** BrushPacer e SmartTimer

### Ítems incluídos

**Pega:** 1 escova de dentes recarregável 7100

**Estojo de viagem:** 1 estojo de viagem carregador

**Cabeça de escova:** 4 G3 Premium Gum Care

**Carregador:** 1 carregador USB-A

### Desempenho de limpeza

**Remoção da placa dentária:** Até 10x mais eficaz\*

**Saúde das gengivas:** Gengivas até 7x mais saudáveis\*\*

**Velocidade:** 62 000 movimentos da escova/min.

### Modos

**Limpeza:** Para limpeza diária excepcional

**Branco:** Para eliminar manchas da superfície

**Sensível:** Para dentes e gengivas sensíveis

**Saúde das gengivas:** Massaja suavemente as suas gengivas

### Tecnologia de sensor inteligente

**Resposta da pressão:** O anel luminoso acende-se com uma luz roxa, Vibração e som pulsante

**Lembrete de substituição:** O BrushSync permite-lhe saber quando deve substituir a cabeça da escova

### Aplicação Sonicare

**Relatórios de monitorização e de progresso:**

Monitoriza os padrões de escovagem ao longo do tempo, ajudando-o a manter a sua higiene oral.

