

PHILIPS

AVENT



Двойной электрический
молокоотсос

Hands-free

Имитирует ритм питья
младенца

Свобода движений при
сцеживании

Легко использовать, собирать и
мыть

Комфортная и незаметная
посадка



SCF532/11

Освободите руки. Освободите время.

Имитирует ритм питья младенца

Двойной электрический молокоотсос Philips Avent Hands-free создан для эффективного* и комфортного сцеживания. Он имитирует ритм питья младенца, обеспечивая мощное, бережное и легко сцеживание молока.

Свобода движений при сцеживании

- Свободно перемещайтесь благодаря легким чашам для сбора
- Удобство ношения и свобода движений

Имитирует движения младенца

- Эффективное сцеживание* благодаря имитации движений младенца во время кормления
- Тихий и мощный молокоотсос

Легко использовать, очищать и собирать

- Легко мыть и собирать благодаря небольшому количеству деталей
- Следите за потоком молока с прозрачными чашами для сбора
- 24 режима для персональной настройки

Комфортная и незаметная посадка

- Силиконовые накладки для комфорта груди

Основные особенности

Имитирует ритм питья младенца



Малышам виднее, как пить — именно поэтому наш электрический молокоотсос Hands-free имитирует их естественный ритм питья, чтобы вы могли найти подходящие настройки для эффективного* сцеживания и оптимального количества молока. До 85 движений в минуту — молокоотсос Philips Avent Hands-free вдвое быстрее, чем большинство других носимых молокоотсосов**.

Мощный мотор, как в больницах



Практически бесшумный мотор обеспечивает высокую мощность стимуляции и сцеживания, совсем как у традиционных молокоотсосов, однако в более компактном и портативном устройстве. Благодаря аккумулятору беспроводной моторный блок обеспечит мощное и незаметное сцеживание в любом месте.


Уникальные накладки SkinSense



Наши уникальные силиконовые накладки SkinSense предназначены для максимального комфорта и защитят вас от неприятных

ощущений для сосков и груди. Эти накладки созданы из силикона пищевого стандарта для вашего полного спокойствия.

Прозрачная коллекция

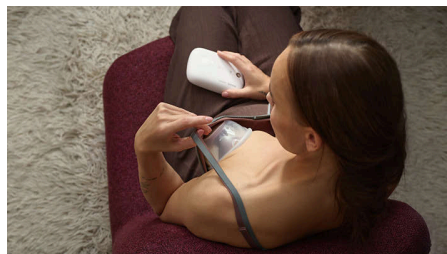

Чаши для сбора с прозрачными стенками позволят следить за результатом сцеживания. Благодаря этому вы сможете отрегулировать положение прибора для оптимального сцеживания и отслеживать, сколько грудного молока уже собрано, — все ради того, чтобы вы были уверены в своих силах и результате.

Легкая чаша для сбора



Наша чаша для сбора весит чуть более 100 г, она в три раза легче, чем полный комплект молокоотсоса. Чаши достаточно компактные и незаметные, поэтому их можно разместить в бюстгальтере.

Носите, как удобно вам



Наш молокоотсос поставляется с шнуром в оплетке для переноски и карабином для крепления к одежде, что позволит носить его через плечо или крепить на пояс. Носите его, как удобно вам, и будьте уверены, что все под


контролем. Используйте переходник для трубки и регулятор длины шнура, чтобы выбрать оптимальные длину и положение молокоотсоса.

Индивидуальный режим сцеживания



Обеспечьте наибольшую эффективность сцеживания с 8 режимами стимуляции потока молока и 16 режимами сцеживания. Можно регулировать прямо во время сеанса, а с функцией памяти прибор запомнит настройки, выбранные в последний раз, и применит их в начале следующего сеанса.

Легко разбирать и мыть

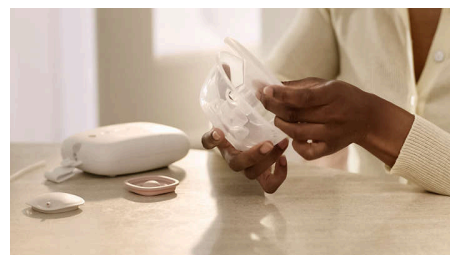

Мы создали этот молокоотсос и его аксессуары с расчетом на минимализм и ваше удобство. Всего несколько соединяющихся деталей позволят без труда использовать чаши для сбора — их легко разбирать, мыть (вручную или в посудомоечной машине), дезинфицировать и собирать обратно.

Характеристики

Питание

Источник: Аккумулятор / USB-C (без адаптера в комплекте)

Материал

Чаша, передний колпачок, защита накладки на сосок: полипропилен

Накладка на сосок, мембрана, клапан,

вставка: Жидкий силикон

Силиконовая трубка: Силикон

В комплект входят:

Кабель USB-C: 1 шт.

Шнур для переноски: 1 шт.

Переходник для трубки: 1 шт.

Блок электродвигателя с аккумулятором и съемной клипсой: 1 шт.

Чаша для сбора (в сборе): 2 шт.

Силиконовые трубки: 2 шт.

Защита накладки на сосок (от пыли): 2 шт.

Защитная накладка (21 мм, 24 мм): 2 шт. каждой

Схема с размерами сосков: 1 шт.

Вставка (19 мм): 2 шт.

Удобство использования

Использование молокоотсоса: Легко использовать, очищать и собирать

Функции

Свобода движений: Свободные руки при сцеживании

Настройки персонализации: 16 уровней режимов сцеживания, 8 уровней стимуляции

Блок электродвигателя: Аккумулятор / USB-C, Полная зарядка аккумулятора занимает до 1,5 ч; заряда хватает прикл. на 5 сеансов сцеживания

Характеристики накладки и вставки для сосков: Несколько размеров для идеальной посадки

