

# PHILIPS

## sonicare

Leistungsstarke  
Zahnbürste mit SenseIQ

DiamondClean Prestige  
9900

Limited Edition in Dunkelblau

SenseIQ: Erkennung, Anpassung +  
Pflege

All-in-One-Bürstenkopf

KI-gesteuerte Sonicare App

HX9992/42



## Außergewöhnliche und individuelle Pflege für Sie mit SenseIQ

Die Sonicare 9900 Prestige mit SenseIQ Technologie ist unsere fortschrittlichste Zahnbürste. Sie unterstützt unsere bewährte Schalltechnologie mit Intelligenz, erkennt Ihre Anforderungen und passt sich für eine umfassende Pflege an, damit Sie stets die gewünschten Ergebnisse erzielen.

### Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

- Schlankes und kompaktes Design

### Stets die richtige Pflege mit SenseIQ

- Passt sich in Echtzeit an dich an, wenn du beim Putzen zu viel Druck ausübst
- Echtzeit-Feedback zu deiner Putzweise
- Erkennung, Anpassung und Pflege mit SenseIQ Technologie
- Erkennt Ihren Putzstil
- Pflegt Zähne und Zahnfleisch intuitiv

### Personalisierte Reinigung ohne Kompromisse

- All-in-One-Bürstenkopf für umfassende Pflege
- Personalisierte Anleitungen von der Philips Sonicare App
- Schallzahnbürste für eine rundum effiziente Reinigung

### Hochwertige Zubehörteile

- Einfaches Aufladen mit minimalistischer Ladestation und -basis
- Limited Edition USB-Etui in Dunkelblau für Reisen mit Stil

# DiamondClean Prestige 9900

Leistungsstarke Zahnbürste mit SenseIQ

HX9992/42

## Besonderheiten

### Passt sich in Echtzeit an dich an



Die meisten von uns üben beim Putzen zu viel Druck aus. Daher passt sich die Zahnbürste automatisch an die Intensität an, wenn du zu stark drückst. Und mit der kostenlosen Philips Sonicare App erhältst du personalisierte Anleitungen und Empfehlungen, für ein ganz neues Putzerlebnis.

### Einfaches Aufladen

Wenn es an der Zeit ist, die Zahnbürste zu laden, stelle sie einfach auf die Ladestation. Perfekt, um das klare, moderne Design Ihrer Zahnbürste zu bewundern.

### Premium All-in-One-Bürstenkopf



Genieße eine Reinigung ohne Kompromisse mit dem A3 Premium All-in-One-Bürstenkopf. Unser bester Bürstenkopf verfügt über angewinkelte Borsten, um bis zu 20 x mehr Plaque selbst an schwer erreichbaren Stellen zu entfernen\*. Dreieckige Spitzen entfernen bis zu 100 % mehr Verfärbungen in weniger als zwei Tagen\*\*\*. Längere Borsten reinigen dein Zahnfleisch gründlich, sodass du in nur zwei Wochen ein um bis zu 15 x gesünderes Zahnfleisch hast\*\*. Und das alles, ohne die Bürstenköpfe wechseln zu müssen. Wusstest du schon, dass Bürstenköpfe nach 3 Monaten Verwendung weniger effizient sind? Unsere BrushSync™ Funktion erinnert dich rechtzeitig, wenn es Zeit für einen Austausch ist.

### Schlank und kompakt



Beim Erlebnis mit der Sonicare 9900 Prestige geht es um hoch moderne Technologie im eleganten und kompakten Design. Die Zahnbürste ist 18 mm kürzer als die DiamondClean und besteht aus hochwertigen Materialien, wodurch dieses Gerät luxuriös aussieht und sich angenehm anfühlt.

### Personalisierte Gesundheitstipps



Die Philips Sonicare App basiert auf künstlicher Intelligenz und funktioniert perfekt mit der Zahnbürste. Verwende sie zum Putzen mit Echtzeitanleitung zu Druck, Bewegung, Putzfläche, Dauer und Frequenz. Zeige Fortschrittsberichte nach Tag, Woche, Monat und Jahr an. Erhalte personalisierte Empfehlungen und konkrete Schritte für eine bessere Reinigung. Die automatische Synchronisierung speichert die aktuellsten Putzdaten in der App, auch wenn du ohne App deine Zähne putzt.

### Putzen mit bewährter Schalltechnologie



Entferne Plaque mit der Schalltechnologie – unserem Maßstab für eine effiziente und sanfte Reinigung. Während des Putzens werden selbst


schwer erreichbare Stellen mit bis zu 62.000 Borstenbewegungen und dynamischer Flüssigkeitsströmung gereinigt, sodass sich dein Mund außergewöhnlich frisch und sauber anfühlt.

### Rückmeldung in Echtzeit



Vielleicht bemerkst du es nicht, wenn du zu viel Druck beim Zähneputzen ausübst oder mit dem Schrubben beginnst, aber deine Zahnbürste schon. Der Leuchtring am Ende des Handstücks erinnert dich daran, den Druck zu reduzieren oder nicht zu stark zu schrubben.

### SenseIQ Technologie

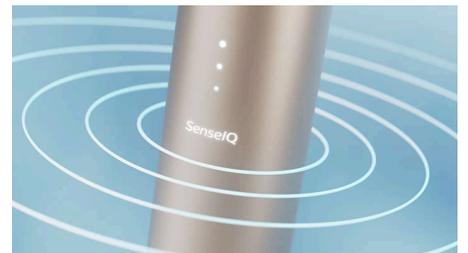

Die SenseIQ Technologie erfasst bis zu 100 Mal pro Sekunde Druck, Bewegung, Putzfläche und mehr, während du putzt. Sie passt die Intensität dann an, wenn du zu stark drückst. Die intelligente SenseIQ Technologie erklärt die Putzmodi so einfach, dass du mit der Zeit von einer mühelosen Pflege und einem besseren Zahnputzerlebnis profitieren kannst.

# DiamondClean Prestige 9900

Leistungsstarke Zahnbürste mit SenselQ

HX9992/42

## Besonderheiten

### Limited Edition in Dunkelblau



Das elegante und kompakte Reiseetui passt in jede Tasche und sorgt so für sorgenfreien Komfort unterwegs. Das robuste Etui ist von weichem veganen Leder umhüllt, als Limited Edition mit Ginkgoblatt-Design. Und für noch mehr Komfort verfügt es über einen integrierten USB-C-Anschluss und ein USB-Ladekabel, sodass Sie die Zahnbürste ganz einfach aufladen können, ohne sie aus dem Etui nehmen zu müssen.

### Erkennt Ihren Putzstil



Während der Reinigung verwendet Philips Sonicare 9900 Prestige Sensoren, um den Druck, den Sie ausüben, sowie die Reinigungsbewegung und die Putzfläche zu erkennen – bis zu 100 Mal pro Sekunde. Die Sensoren erkennen außerdem, wie lange und wie oft Sie putzen.

### Pflege für Ihre Mund- und Zahngesundheit



Die Philips Sonicare Diamond Clean Prestige 9900 wurde speziell für Dich entwickelt. Ihre hochmoderne Technologie ist ganz auf Dich abgestimmt und so einfach zu bedienen, dass das Zähneputzen wie von selbst geht. Die Ergebnisse sprechen für sich.

# DiamondClean Prestige 9900

Leistungsstarke Zahnbürste mit SenseIQ

HX9992/42

## Daten

### Anschlüsse

**Kabellose Bluetooth®-Technologie:** Verbundene Zahnpflege-App

### Leistung

**Stromversorgung:** 110 V bis 220 V

### Technische Daten

**Batterie:** Wiederaufladbar

**Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):** Min. 2 Wochen\*\*\*\*

**Batterietyp:** Lithium-Ionen

### Design und Materialausführung

**Farbe:** Mitternachtsblau

### Service

**Gewährleistung:** 2 Jahre eingeschränkte Garantie

### Kompatibilität

**Android-Kompatibilität:** Android OS 8.0 oder höher

**iOS-Kompatibilität:** iPhones mit iOS 13.0 oder höher

### Benutzerfreundlichkeit

**Handstück:** Schlankes und kompaktes Design, Flüssige Touch-Steuerung

**Akkuanzeige:** Beleuchtete Symbolanzeige

**Handstück-Kompatibilität:** Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

**Reiseetui:** Edel, Limited Edition Mitternachtsblau, Kompaktes Ladeetui, Veganes Leder

**BrushSync Erinnerungsfunktion:** Erinnerungssymbol leuchtet auf, Stellt jederzeit optimale Ergebnisse sicher

### Artikel enthalten

**Handstück:** 1 x Sonicare 9900 Prestige

**Bürstenköpfe:** 2 x A3 Premium All-in-One

**Prestige USB-Ladeetui:** 1

**Ladestation:** 1

**USB-Kabel:** 1

### Reinigungsleistung

**Vorteile für die Gesundheit:** Um bis zu 15 x gesünderes Zahnfleisch\*\*

**Leistung:** Entfernt bis zu 20 x mehr Plaque\*

**Geschwindigkeit:** Bis zu 62.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

**Timer:** BrushPacer und 2-Minuten-Timer

**Weißer Zähne:** Bis zu 100 % weniger Verfärbungen\*\*\*

**Druck-Feedback:** Ring leuchtet violett, Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers

**Scheuer-Feedback:** Ring leuchtet gelb auf, Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers, Option zum Ein-/Ausschalten in der App

### SenseIQ Technologie

**Drucksensor:** Warnmeldungen bei zu starkem Druck

**Positionssensor:** Erfasst die Putzfläche, bei jedem Putzvorgang

**Scheuersensor:** Hinweise zur Vermeidung von Scheuern

**3D-Karte Ihres Mundes:** Hebt fehlende Bereiche hervor

**Adaptive Intensität:** Passt die Intensitätsstufe an, wenn zu viel Druck ausgeübt wird

**Künstliche Intelligenz:** Erkennt und synchronisiert die Reinigung

### Sonicare App mit KI

**Echtzeitanleitung:** Personalisierte Empfehlungen, Fortschrittsbericht für Tag/Monat/Jahr

**Individualisierbare Modi:** Clean, White+, Gesundes Zahnfleisch, Deep Clean, Sensitive

