

PHILIPS

AVENT



Enkele elektrische
borstkolf

Hands-free

Bootst het drinkritme van baby's
na

Vrijheid tijdens het kolven

Eenvoudig te gebruiken, schoon
te maken en in elkaar te zetten

Inclusieve, naadloze pasvorm



SCF531/11

Hou je handen vrij en maak tijd vrij.

Bootst het drinkritme van je baby na

De Philips Avent handsfree enkele elektrische borstkolf is ontwikkeld voor effectief* en comfortabel kolven en bootst het drinkritme van je baby na. Krachtig, comfortabel en licht, en daarmee de ideale handsfree kolf.

Fysieke vrijheid tijdens het kolven

- Beweeg je vrij met de ultralichte opvangcup
- Draagbaar comfort voor maximale bewegingsvrijheid

Bootst het drinkritme van baby's na

- Kolf effectief* met een ritme dat het ritme van je baby nabootst
- Geluidloos kolven op ziekenhuisniveau

Eenvoudig te gebruiken, schoon te maken en in elkaar te zetten

- Houd de melkstroom in de gaten met de volledig transparante opvangcup
- Personaliseer je kolfessie
- Minder onderdelen dus eenvoudig in elkaar te zetten en schoon te maken

Inclusieve, naadloze pasvorm

- Een assortiment borstschildjes en inzetstukken voor elke moeder
- Siliconen schildje vormt zich zacht naar je borst

Kenmerken

Bootst het drinkritme van baby's na



Baby's weten zelf het beste hoe ze moeten drinken! Daarom bootst onze handsfree elektrische borstkolf hun natuurlijke drinkritme na, zodat jij je eigen ritme kunt vinden voor effectief* kolven en een optimale melkproductie. Met tot wel 85 kolfbewegingen per minuut is de Philips Avent handsfree borstkolf 2 keer sneller dan de meeste andere kolfsets**.

Motor van ziekenhuissterkte



De bijna geruisloze motorunit levert de kracht die je verwacht van een traditionele borstkolf, maar dan in een compact en draagbaar apparaat. Dankzij de oplaadbare batterij en de draadloze motorunit kun je overal krachtig en discreet kolven.

Unieke SkinSense-schildjes



Ons unieke siliconen SkinSense-borstschildje is ontworpen voor ultiem comfort en vormt zich zacht rond je borst door middel van de natuurlijke warmte van je lichaam. Het borstschildje is gemaakt van voedselveilig siliconen voor volledige gemoedsrust.

Transparante opvangcups



De transparante opvangcup biedt een onbelemmerd zicht op de binnenkant. De cup helpt je tepel op de juiste manier te plaatsen voor de beste melkafgifte en zorgt ervoor dat je visueel het volume moedermelk kunt bijhouden. Zo kolf je vol zelfvertrouwen, van de eerste tot de laatste druppel.

Ultralichte opvangcup



Een lege opvangcup weegt iets meer dan 100 gram. Dat is tot 3 keer lichter dan een volledig draagbare borstkolf. De cup zit comfortabel in je bh, waardoor je nauwelijks merkt dat je hem draagt.

Draag hem op jouw manier



Onze pomp wordt geleverd met een gevlochten draagkoord en een kledingklep, waarmee je de motor over het lichaam of aan je broek kunt dragen. Zo heb je de vrijheid om hem op jouw manier te dragen. Blijf je ding doen, in de wetenschap dat je al je behoeften bij de hand hebt. Gebruik de slangkoppeling en koordversteller om je pasvorm nauwkeurig af te stemmen.

Personaliseerbaar




Haal het maximale uit elke kolfsessie, dankzij de 8 zuigniveaus om de melkstroom te stimuleren en 16 zuigniveaus om de melk af te kolven. Je kunt tijdens het kolven fijnafstellen en omdat je ideale instelling automatisch wordt onthouden, is je kolf altijd klaar voor gebruik.

Eenvoudig schoon te maken en te monteren



We hebben onze pomp en accessoires zo eenvoudig mogelijk ontworpen. Met slechts een paar verbindingstukken is elke opvangcup in een handomdraai uit elkaar te halen, schoon te maken (met de hand of in de vaatwasser), te desinfecteren en weer in elkaar te zetten.

Vind de juiste pasvorm

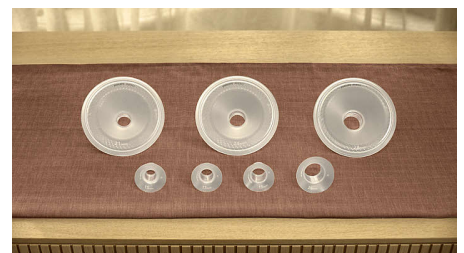

Wij willen dat iedere moeder zich op haar best voelt. De juiste pasvorm is daar een essentieel onderdeel van. Ons assortiment van borstschildjes en kussentjes past 99% van de moeders. Ze zijn afzonderlijk verkrijgbaar, zodat je het ultieme comfort ervaart tijdens het kolven.

Specificaties

Vermogen

Bron: Oplaadbare batterij/USB-C (adapter niet meegeleverd)

Materiaal

Cup, beschermkapje, beschermhoes voor borstbeschermer: Polypropyleen
Borstbeschermer, membraan, ventiel, inzetstuk: Vloeibare siliconen
Siliconen slangetje: Siliconen

Inclusief

USB-C-kabel: 1 x
Draagkoord: 1 x
Oplaadbare accu (met afneembare klem): 1 x

Opvangcup (gemonteerd): 1 x
Siliconen slangetjes: 1 x
Stofbestendige beschermhoes voor borstbeschermer: 1 x
Borstschildje (21 mm, 24 mm): 1 stuks
Tepelmaatkaart: 1 x
Inzetstuk - 19 mm: 1 x

Gebruiksgemak

Gebruik borstkolf: Eenvoudig te gebruiken, schoon te maken en in elkaar te zetten

Funcities

Flexibiliteit in beweging: Handsfree kolven
Persoonlijke instellingen: 16 zuigniveaus in expressiemodus, 8 zuigniveaus in stimulatiemodus

Motoronderdeel: Oplaadbare batterij/USB-C, Het volledig opladen van de batterij duurt tot 1,5 uur en gaat ongeveer 5 kolfsessies mee

Details borstbeschermer en kussentje: Verschillende maten beschikbaar voor de beste pasvorm

