

PHILIPS

sonicare



Akku-Zahnbürste

DiamondClean Prestige 9900

SenseIQ

Bis zu 20 x mehr Plaque-
Entfernung*

15 x gesünderes Zahnfleisch**

Visueller Drucksensor



HX9992/45

Personalisierte Pflege für Ihre Mundgesundheit

Entfernt sanft bis zu 20 x mehr Plaque*

Erleben Sie unsere fortschrittlichste elektrische Zahnbürste: Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 mit SenseIQ Technologie. Sie optimiert unsere Schalltechnologie durch Intelligenz, Sensoren und Anpassung für eine personalisierte Mundpflege.

Putzen leicht gemacht

- Schützen Sie Ihr Zahnfleisch mit unserem Drucksensor
- Wählen Sie Ihr ideales Putzerlebnis
- Personalisierte Anleitung und Feedback in Echtzeit

Für Ihren Lifestyle entwickelt

- Mit Sorgfalt für die Dentalpflege entwickelt
- Putzen Sie weiterhin mit optimaler Leistung dank Erinnerungsfunktion zum Austauschen des Bürstenkopfes
- 14 Tage Akkulaufzeit

Fühlen Sie die Pflege von Sonicare

- 20 x effektiver bei Plaque*, sanft zum Zahnfleisch
- SenseIQ Technologie für Ihr individuelles Erlebnis
- Sonicare Flüssigkeitsströmung

Besonderheiten

Unsere beste Plaque-Entfernung



Jeder putzt seine Zähne anders. Daher haben wir diesen Bürstenkopf mit mehrwinkligen Borsten entwickelt, um Plaque-Entfernung auf Kurs zu halten, unabhängig von Ihrer Technik. Unser All-in-One A3 Bürstenkopf bietet unsere beste Reinigung und entfernt bis zu 20 x mehr Plaque, liefert 15 x gesünderes Zahnfleisch in sechs Wochen und bis zu 100 % mehr Fleckenentfernung in weniger als zwei Tagen im Vergleich zu einer Handzahnbürste.

SenseIQ Technologie



Die SenseIQ Technologie sorgt für eine ausgewogene Zahnputzweise und erfasst Druck, Bewegung und Abdeckung bis zu 100 Mal pro Sekunde beim Putzen. Wenn Sie zu viel Druck ausüben, passt die Zahnbürste die Intensitätsstufe automatisch an, um Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch zu schonen.

Sonicare Flüssigkeitsströmung




Die Philips Sonicare Zahnbürsten reinigen und pflegen sanft und zugleich effizient Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch mit bis zu 62.000 Borstenbewegungen pro Minute. Die Sonicare Flüssigkeitsströmung unterstützt die Borsten bei der Reinigung, indem Flüssigkeit bis tief in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands gespült wird.

Visueller Drucksensor




Diese elektrische Sonicare Zahnbürste verfügt über einen Leuchtring an der Basis, der Sie freundlich darüber informiert, wenn Sie zu viel Druck ausüben. Wenden Sie einfach weniger Druck an, sobald er leuchtet, um Ihr Zahnfleisch zu schonen.

Modi und Intensitäten

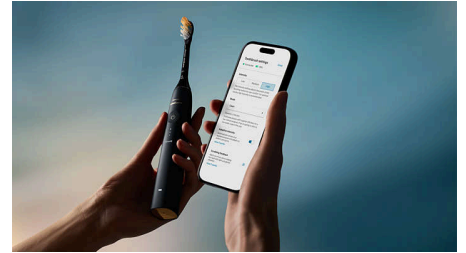

Verbessern Sie Ihre Zahnpflegerroutine mit 15 Putzeinstellungen. Egal, ob Sie nach einer gründlichen Reinigung oder einem bestimmten Fokus suchen, diese elektrische Zahnbürste ist genau das Richtige für Sie. Wählen Sie aus fünf Putzprogrammen – Clean, White+, Gum Health, Deep Clean und Sensitive – und stellen Sie diese auf eine von drei Intensitätsstufen für eine personalisierte Reinigung ein. Öffnen Sie einfach die App, wählen Sie Ihre Einstellungen aus, und überlassen Sie der Zahnbürste den Rest.

Sonicare App

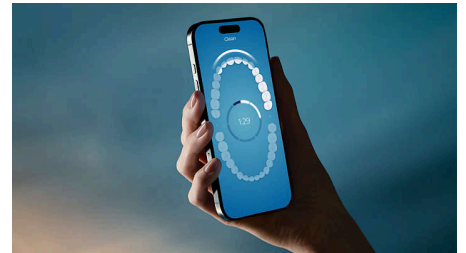

Erreichen Sie Ihre Ziele im Bereich Mundhygiene mit Ihrer Sonicare Zahnbürste und App. Beide lassen sich für ein Echtzeit-Coaching, personalisierte Anleitungen und maßgeschneiderte Einblicke nahtlos miteinander verbinden, um Ihre Putzroutine zu verbessern. Verfolgen Sie Ihren Fortschritt, verfeinern Sie Ihre Technik und erhalten Sie kontinuierliches Feedback, um jede Putzeinheit optimal zu nutzen. Gemeinsam sind Sie unaufhaltsam. Durch die automatische Synchronisierung bleiben die Putzdaten in der App immer auf dem neuesten Stand, auch wenn Sie die App beim Putzen nicht an Ihrer Seite haben.

DiamondClean Prestige 9900

Akku-Zahnbürste

HX9992/45


Besonderheiten

Hochwertiges Design und Zubehör



Vom schlanken Design bis zur hochmodernen Ladestation – jedes Detail dieser elektrischen Zahnbürste wird von unseren engagierten Designern und Ingenieuren mit Liebe zum Detail gefertigt. Mit dem mitgelieferten Reiseladeetui können Sie Ihre Mundpflegeroutine auch unterwegs beibehalten.


Erinnerungsfunktion

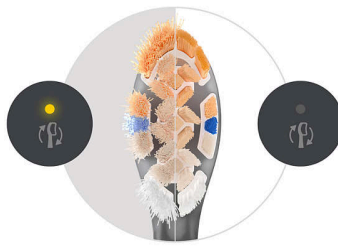

Wussten Sie, dass Bürstenköpfe nach drei Monaten an Effektivität verlieren? Zahnmedizinisches Fachpersonal empfiehlt, den Bürstenkopf regelmäßig zu wechseln. Deshalb verfügen Philips Sonicare Zahnbürsten über die Erinnerungsfunktion zum Austauschen des Bürstenkopfes. Diese erfasst, wie oft und mit

welchem Druck Sie Ihre Zähne putzen, und erinnert Sie dann daran, Ihren Bürstenkopf zu gegebener Zeit auszutauschen.

Akkulaufzeit

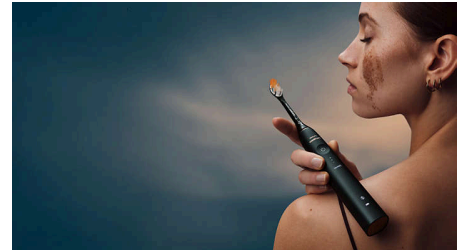

Eine vollständige Ladung hält bis zu 14 Tage regelmäßigem Putzen. Sie erhalten einen ganz neuen Komfort in Ihrer täglichen Routine.

DiamondClean Prestige 9900

Akku-Zahnbürste

HX9992/45

Daten

Intensitätsstufen

Hoch: Für eine noch bessere Reinigung

Mittel: Für die tägliche Reinigung

Niedrig: Für empfindliche Zähne und Zahnfleisch

Leistung

Stromversorgung: 100 bis 240 V

Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): 14 Tage

Energieverbrauch: Standby ohne Anzeige <0,06 W

Batterietyp: Lithium-Ionen

Consumer Trade Item

Height: 24.2 cm

Width: 16.8 cm

Length: 7.4 cm

Net weight: 0.474 kg

Gross weight: 0.745 kg

GTIN: 8720689042765

Country of origin: CN

Außenkarton

Height: 21 cm

Width: 24.1 cm

Length: 26.4 cm

Net weight: 1.422 kg

Gross weight: 2.595 kg

GTIN: 18720689042762

Palette

Height: 119.4 cm

Width: 120 cm

Length: 80 cm

Net weight: 85.32 kg

Gross weight: 180.96 kg

GTIN: 68720689042767

Design und Materialausführung

Farbe: Mitternachtsblau

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Software-Support: Philips bietet für 2 Jahre ab Kaufdatum entsprechende Softwareaktualisierungen an.

Pallet Layer

Height: 21 cm

Width: 120 cm

Length: 80 cm

Sonstiges

Height: 119.4 cm

Width: 120 cm

Length: 80 cm

GTIN: 68720689042767

Kompatibilität

Kabellose Bluetooth-Technologie: Verbundene Sonicare App

Android-Kompatibilität: Android-Telefone mit Bluetooth 4.0 oder höher

iOS-Kompatibilität: iPhone mit Bluetooth 4.0 oder höher

Benutzerfreundlichkeit

Handstück: Schlankes und kompaktes Design

Akkuanzeige: Beleuchtetes Symbol zeigt

Akkustand an

Handstück-Kompatibilität: Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

Timer: BrushPacer und SmartTimer

Artikel enthalten

Handstück: 1 DiamondClean Prestige 9900

Bürstenköpfe: 4 x A3 All-in-One

Reiseetui: 1 Prestige USB-Reiseladeetui

Ladegerät: 1 Ladebasis und -station

Reinigungsleistung

Plaque-Entfernung: 20 x effektiver*

Gesundes Zahnfleisch: Bis zu 15 x gesünderes Zahnfleisch***

Weißer Zähne: Entfernt bis zu 100 % mehr Verfärbungen***

Geschwindigkeit:

62.000 Bürstenkopfbewegungen/Min.

Programme

Clean: Für eine außergewöhnliche Reinigung jeden Tag

Deep Clean: Für eine besonders gründliche Reinigung

Gesundes Zahnfleisch: Massiert sanft das Zahnfleisch

Sensitive: Für empfindliche Zähne und Zahnfleisch

White+: Hilft oberflächliche Verfärbungen zu entfernen

Intelligente Sensor-Technologie

Druck-Feedback: Ring leuchtet violett, Vibration und pulsierendes Geräusch

SenseIQ: Automatische Anpassung des Putzvorgangs auf Basis von Druck und Bewegung

Erinnerungsfunktion: informiert Sie, wenn der Bürstenkopf ausgewechselt werden sollte

Sonicare App

Nachverfolgung und Fortschrittsberichte:

Verfolgen Sie Ihre Putzgewohnheiten und Verbesserungen im Laufe der Zeit mit detaillierten Daten und personalisierten Erkenntnissen.

Echtzeit-Coaching mit SenseIQ: Erhalten Sie direkt Feedback zu Druck, Bewegung und Putzfläche, um Ihre Putztechniken beim Putzen zu verbessern.

Personalisierte Gesundheitstipps: Erhalten Sie Tipps zum Putzen basierend auf Ihren Putzmustern und -gewohnheiten.

