

PHILIPS

AVENT



Elektrische Einzelmilchpumpe

Hands-free

Spiegelt den Trinkrhythmus des Babys wider

Freiheit beim Abpumpen

Benutzerfreundlich, einfache
Reinigung und einfaches
Zusammenbauen

Inklusive, nahtlose Passform



SCF531/11

Mehr Hände. Mehr Zeit für dich.

Passt 99% aller Mütter***

Babys wissen am besten, wie sie von Mamas Brust trinken. Die elektrische Philips Avent Hands-free Einzelmilchpumpe spiegelt den Trinkrhythmus deines Babys wider und pumpt dabei doppelt so schnell wie andere Milchpumpen.**

Körperliche Freiheit beim Abpumpen

- Bewegen Sie sich frei mit der ultraleichten Auffangschale
- Tragekomfort für maximale Bewegungsfreiheit

Spiegelt den Trinkrhythmus des Babys wider

- Effizientes Abpumpen*, da der Rhythmus deines Babys widergespiegelt wird
- Leises Abpumpen in Krankenhausqualität

Einfaches Verwenden, Reinigen und Zusammensetzen

- Gute Sicht auf den Milchfluss dank der vollständig durchsichtigen Auffangschale
- Personalisiere deine Sitzungen mit 24 Stufen
- Dank weniger Teile einfach zu reinigen und zusammenzusetzen

Inklusive, nahtlose Passform

- Eine Auswahl an Brustkissen- und Einsatzgrößen für jede Mutter
- Das Silikon-Brustkissen schmiegt sich sanft an deine Brust an

Besonderheiten

Spiegelt den Trinkrhythmus des Babys wider



Babys wissen, wie sie am besten trinken! Deshalb spiegelt unsere Hands-free elektrische Milchpumpe ihre natürliche Saugstärke, -geschwindigkeit und -bewegung, sodass du deinen eigenen Rhythmus für ein effizientes* Abpumpen und eine optimale Milchabgabe finden kannst. Mit bis zu 85 Saugbewegungen pro Minute ist die Philips Avent Hands-free Milchpumpe 2 x schneller als andere tragbare Milchpumpen**.

Motor in Krankenhausqualität




Die nahezu geräuschlose Motoreinheit liefert die Leistung, die du von einer herkömmlichen Milchpumpe wie im Krankenhaus erwartest, und ist zugleich kompakt und tragbar. Mit dem wiederaufladbaren Akku pumpt die kabellose Motoreinheit überall leistungsstark und diskret.

Einzigartige SkinSense Brustkissen



Unser einzigartiges SkinSense Silikon-Brustkissen wurde für ultimativen Komfort entwickelt und schmiegt sich dank der natürlichen Körperwärme sanft an deine Brustform an. Das Brustkissen besteht aus lebensmittelechtem Silikon für optimale Sicherheit.

Vollständig durchsichtige Auffangschalen

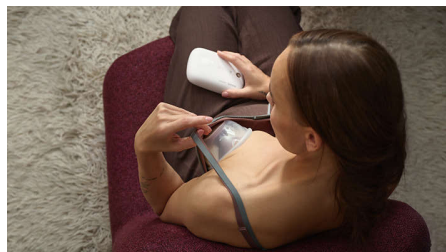

Die vollständig durchsichtige Auffangschale bietet freie Sicht. Sie hilft dir, deine Brustwarze richtig auszurichten, um die Milch optimal abzupumpen und zu sehen, welche Menge an Muttermilch abgepumpt wurde. Für zuverlässiges Abpumpen vom ersten Tropfen bis zum Ende.

Ultraleichte Auffangschale



Unsere Auffangschale wiegt nur etwas mehr als 100 Gramm, wenn sie leer ist – bis zu 3 x leichter als eine vollständig tragbare Milchpumpe. Die Schale sitzt bequem im BH und ist kaum spürbar.


Trage sie, wie du es möchtest



Unsere Pumpe wird mit einem geflochtenen Trageband und einem Clip geliefert, um die Motoreinheit umzuhängen oder an deinem Bund zu befestigen. Da du die Pumpe tragen kannst, wie du es möchtest, kannst du nach deinen Wünschen abpumpen, ohne die Kontrolle abgeben zu müssen. Verwende die Schlauchverbindung und die Bandeinsteller, um die Passform präzise einzustellen.

Besonderheiten

Personalisiertes Abpumpen

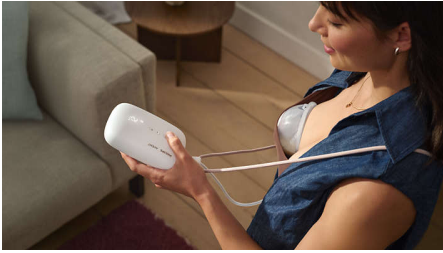

Hole das Beste aus der Abpumpzeit heraus – mit 8 Stufen zur Stimulierung des Milchflusses und 16 Stufen zum Abpumpen. Du kannst während des Abpumpens feine Anpassungen vornehmen und deine ideale Einstellung automatisch speichern, sodass deine Pumpe jederzeit einsatzbereit ist.

Einfache Reinigung und Zusammensetzung



Wir haben unsere Pumpe und die Zubehörteile so entwickelt, dass sie so einfach wie möglich zu verwenden sind. Mit nur wenigen Verbindungsstücken kann jede Auffangschale im Handumdrehen auseinandergebaut, gereinigt (von Hand oder in der Spülmaschine), desinfiziert und wieder zusammengesetzt werden.

Die richtige Passform finden



Wir unterstützen jede Mutter dabei, sich wohl zu fühlen, und die richtige Passform ist ein wesentlicher Bestandteil davon. Unser Sortiment an unterschiedlich großen Brustkissen und Einsätzen eignet sich für 99 % der Mütter. Du kannst sie separat kaufen, sodass du ultimativen Komfort beim Abpumpen erlebst.

Daten

Leistung

Quelle: Wiederaufladbarer Akku/USB-C (Adapter nicht im Lieferumfang enthalten)

Material

Auffangschale, Frontkappe, Abdeckung

Brustkissen: Polypropylen

Brustkissen, Membran, Ventil, Einsatz:

Flüssigsilikon

Silikonschlauch: Silikon

Lieferumfang

USB-C-Kabel: 1 Stck.

Trageband: 1 Stck.

Wiederaufladbare Motoreinheit (mit

abnehmbaren Clip): 1 Stck.

Auffangschale (zusammengesetzt): 1 Stck.

Silikonschläuche: 1 Stck.

Brustkissen (Staubschutz-)Abdeckung: 1 Stck.

Brustkissen (21 mm, 24 mm): Je 1 Stück

Größenkarte für Brustwarzen: 1 Stck.

Einsatz 19 mm: 1 Stck.

Benutzerfreundlichkeit

Verwendung der Milchpumpe: Einfaches

Verwenden, Reinigen und Zusammensetzen

Funktionen

Flexibilität bei der Bewegung: Freihändiges Abpumpen

Personalisierte Einstellungen: 16

Abpumpeinstellungen, 8

Simulationseinstellungen

Motoreinheit: Wiederaufladbarer Akku/USB-C,

Eine vollständige Aufladung des Akkus dauert

bis zu 1,5 Stunden und reicht für ca. 5

Abpumpansitzungen

Spezifika Brustkissen und Einsatz: Mehrere

Größen verfügbar für die beste Passform

