

PHILIPS

AVENT



**Bomba Tira-leite
Elétrica Dupla**

Mãos livres



SCF547/11

Mãos livres. Mais tempo para a mãe.

Simula o ritmo de sucção do bebé

A bomba tira-leite elétrica dupla mãos livres Philips Avent foi concebida para uma extração eficaz* e confortável. Silenciosa e com potência hospitalar, simula o ritmo de sucção do bebé. Os copos colectores leves, transparentes e a almofada exclusiva Skinsense, tornam esta a bomba tira-leite a opção ideal para uma extração mãos livres.

Liberdade durante a utilização

- Mova-se livremente com os copos colectores ultra leves
- Confortável e portátil, para maior liberdade de movimentos

Replica o ritmo de sucção do bebé

- Extração eficaz* replica o ritmo de sucção do bebé
- Extração silenciosa de potência hospitalar

Fácil de utilizar, simples de limpar e montar

- Fácil de limpar e montar com poucas peças
- Acompanhe e controle o fluxo de leite, através dos copos colectores totalmente transparentes
- Personalize a sua sessão de extração

Ajuste inclusivo e perfeito

- As almofadas em silicone moldam-se gentilmente ao seu peito
- Uma gama de almofadas e diafragmas, que se ajusta a todas as mães

Destaques

Simula o ritmo de sucção do bebé



Os bebés sabem qual o melhor ritmo de sucção! É por isso que a nossa bomba tira-leite elétrica mãos livres replica o ritmo de de sucção natural do bebé – para que possa encontrar o seu próprio ritmo, conseguir uma extração eficaz* e uma produção de leite ótima. As almofadas e os diafragmas no tamanho correto, permitem uma extração segura e confortável em todas as etapas.

Motor de potência hospitalar




O motor silencioso, com potência de nível hospitalar, design compacto e portátil. Desenvolvido com bateria recarregável, o motor sem fios efetua uma extração potente e discreta, em qualquer lugar.

Almofada SkinSense exclusiva



As nossas almofadas em silicone SkinSense exclusivas, foram concebidos a pensar no máximo de conforto, moldando-se gentilmente ao peito através do calor natural do seu corpo. As almofadas desenvolvidas em silicone de grau alimentar, são muito confortáveis.

Copos colectores transparentes

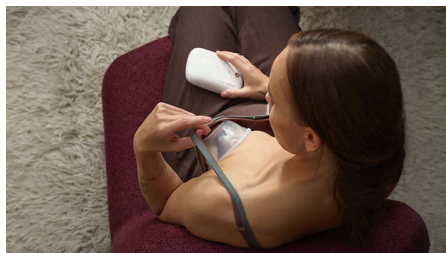

Os copos colectores transparentes proporcionam uma vista desobstruída sobre a mama e o mamilo. Ajudam a garantir que os mamilos estão corretamente encaixados, para uma melhor produção de leite e acompanhamento visual da extração do leite materno, durante todo o processo.

Copos colectores leves



Um copo colector pesa pouco mais de 100 gramas quando vazio – até 3 vezes mais leve do que uma bomba tira-leite totalmente portátil. Fácil colocação e ajuste dentro do soutien, passando praticamente despercebido.

Use da forma que melhor se ajusta a si




A nossa bomba tira-leite é fornecida com um cordão e um clipe de transporte, para encaixar facilmente o motor a tiracolo ou à cintura. Escolha o encaixe que melhor se adapta a si e utilize o regulador do cordão, caso necessite fazer algum ajuste.

Extração personalizada




Tire o máximo partido de cada sessão com 8 níveis para estimular o fluxo de leite e 16 níveis para o extrair. Pode ajustar durante a extração e, com a definição ideal memorizada automaticamente, a sua bomba tira-leite está sempre pronta a utilizar.

Fácil de limpar e de montar

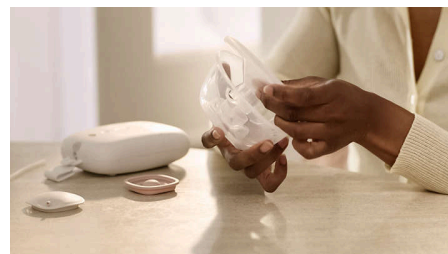

Concebemos a nossa bomba tira-leite e os nossos acessórios para serem o mais simples possível. Com apenas algumas peças, cada copo colector é fácil de desmontar, limpar (à mão ou na máquina de lavar louça), desinfetar e voltar a montar.

Encontre o tamanho certo

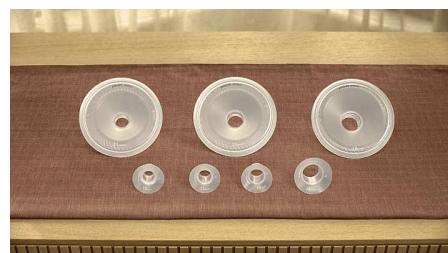

Queremos que todas as mães se sintam confortáveis e encontrar o tamanho certo é fundamental. A nossa gama de almofadas e diafragmas, disponibiliza diferentes tamanhos, compatíveis com 99% das mães. Disponíveis para compra em separado, para uma extração confortável durante a utilização.

Especificações

Alimentação elétrica

Fonte: Bateria recarregável/USB-C (adaptador não incluído)

Material

Copo coletor, tampa frontal, tampa do protetor do peito: Polipropileno

Protetor do peito, membrana, válvula, inserção: Silicone líquido

Tubo em silicone: Silicone

Inclui

Bolsas de armazenamento de leite materno: 25 unid.

Cabo de transporte: 1 un.

Acoplador do tubo: 1 un.

Unidade do motor recarregável (com um clipe amovível): 1 un.

Copo de recolha (montado): 2 unidades

Tubos em silicone: 2 unidades

Tampa do protetor do peito: 2 unidades

Protetor do peito (21 mm, 24 mm): 2 unidade cada

Biberão Natural Response de 125 ml (4 oz) (com tetina de fluxo 2): 1 un.

Cartão de medição do mamilo: 1 un.

Inserção de 19 mm: 2 unidades

Cabo USB: 1 un.

Fácil de utilizar

Utilização da bomba tira-leite: Fácil de utilizar, simples de limpar e montar

Funções

Flexibilidade em movimento: Extração com mãos livres

Definições de personalização: Modo de estimulação com 8 níveis e modo de extração com 16 níveis

Motor: Bateria recarregável/USB-C, O carregamento completo da bateria demora até 1,5 horas e dura aproximadamente 5 sessões de utilização da bomba tira-leite

Detalhes sobre o protetor do peito e a inserção: Vários tamanhos disponíveis para um melhor ajuste

