

PHILIPS

AVENT



Dobbel elektrisk
startsett

Hands-free

Etterligner babyens drikkerytme

Frihet ved amming

Enkel å bruke, rengjøre og sette
sammen

Inkluderende, sømløs passform



SCD553/11

Frigjør hendene dine. Frigjør tiden din.

Perfekt for 99 % av alle mammaer

Gjør deg klar for det nye håndfrie doble elektriske startsettet for brystpumpe. Det har alt du trenger for å pumpe, oppbevare brystmelk og mate babyen fra den første dagen, inkludert brystskjold og innlegg, puter, flasker og oppbevaringsposer.

Andre fordeler

- Alt du trenger for å oppbevare, mate med mer

Fysisk frihet mens du pumper

- Beveg deg fritt med de ultralette oppsamlingskoppene
- Slitesterk komfort for maksimal bevegelse

Etterligner babyens drikkerytme

- Effektiv* pumping med en rytme som etterligner babyen
- Stille pumping med sykehusstyrke

Enkel å bruke, enkel å rengjøre og montere

- Overvåk melkestrømmen med de helt gjennomsiktige oppsamlingskoppene
- Tilpass pumpeøkten
- Enkel å rengjøre og sette sammen med få deler

Inkluderende, sømløs passform

- Det komplette utvalget av brystskjolds- og innleggsstørrelser

Høydepunkter

Etterligner babyens drikkerytme



Babyer er de beste på å drikke! Det er derfor vår håndfrie elektriske brystpumpe etterligner deres naturlige drikkerytme – slik at du kan finne din egen rytme for effektiv* pumping og optimal melkeproduksjon. Med en pumpefrekvens på 85 ganger i minuttet pumper Philips Avents håndfrie brystpumpe opptil dobbelt så raskt som de fleste andre pumper**.

Motor med sykehusstyrke




Den nesten lydløse motorenheten leverer samme sykehusstyrke som du forventer fra en tradisjonell brystpumpe, fra det som likevel er en kompakt og slitesterk enhet. Med det oppladbare batteriet pumper den batteridrevne motorenheten kraftig og diskret, hvor som helst.

Unike SkinSense-skjold




Våre unike SkinSense-silikonbrystskjold er designet for optimal komfort, og former seg mykt rundt brystene ved hjelp av kroppens naturlige varme. Brystskjoldene er laget med silikon i matkvalitet, for full trygghet.

Passer til 99 % av alle mødre

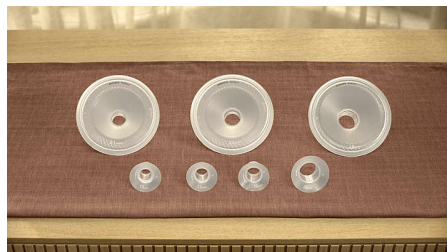

Vi hjelper enhver mamma med å føle seg best mulig, og å finne riktig passform er en viktig del av dette. Dette startsettet inneholder vårt komplette utvalg av brystskjolds- og innleggsstørrelser, som passer til 99 % av mødrene, for optimal komfort mens de pumper.

Gjennomsiktig oppsamling

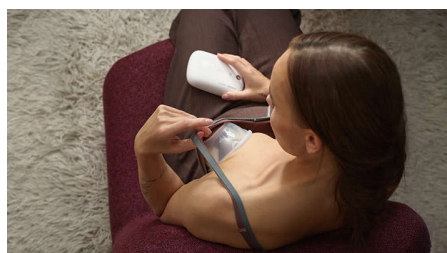

De gjennomsiktige oppsamlingskoppene lar deg uhindret se innsiden. Dette hjelper deg med å plassere brystvortene riktig for best mulig

melkeproduksjon, og se mengden brystmelk. Dermed får du sikker pumping fra første til siste dråpe.

Ultralette oppsamlingskopper



Vårt utvalg av kopper veier bare litt over 100 gram når de er tomme, noe som er opptil 3 ganger lettere enn en fullt ut bærbar brystpumpe. Koppen sitter komfortabelt i BH-en, og det er knapt mulig å se tegn på at den er der.


Bruk den på din måte



Vår pumpe leveres med en flettet bæreledning og klemme, slik at du kan bære motorenheten på kroppen eller festet til linningen. Med frihet til å bruke enheten på din måte kan du holde deg i gang vite at du har full kontroll. Bruk slangekoblingen og justeringen av ledningen for å tilpasse passformen nøyaktig som du vil.

Høydepunkter

Tilpasset pumping

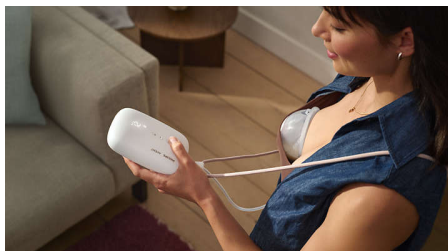

Få mest mulig ut av hver økt med 8 sugenivåer for å stimulere melkestrømmen og 16 sugenivåer for å pumpe melken ut. Du kan finjustere mens du pumper, og med automatisk lagring av din ideelle innstilling er pumpen alltid klar til bruk.

Enkel å rengjøre og sette sammen



Vi har designet pumpen og tilbehøret slik at den er så enkel som mulig. Med bare noen få tilkoblingsstykker er hver oppsamlingskopp en lek å ta fra hverandre, rengjøre (for hånd eller i oppvaskmaskin), desinfisere og å sette sammen igjen.

Grunnleggende startsett



Opplev bekvemmelighet og fleksibilitet med startsettets mate- og oppbevaringsprodukter som er utformet for å passe sømløst inn med dine rutiner. Fem par brystputer inngår også i settet, for større komfort.

Spesifikasjoner

Drift

Kilde: Oppladbart batteri / USB-C (adapter følger ikke med)

Materiale

Kopp, frontdeksel, brystskjolddeksel:

Polypropylen

Brystskjold, membran, ventil, innlegg: Flytende silikon

Silikonrør: Silikon

Følgende er inkludert:

Engangsammeinnlegg: 10 deler

Poser til morsmelk: 25 deler

USB-C-kabel: 1 del

Veske: 1 del

Bæreledning: 1 del

Slangekobling: 1 del

Oppladbar motorenhet (med avtakbar klemme): 1 del

Oppsamlingskopp (montert): 2 deler

Silikonslanger: 2 deler

Brystskjold (støv)-deksel: 2 deler

125 ml Natural Response-flaske (smokk med gjennomstrømning 2): 1 del

Kort for brystvortestørrelse: 1 del

Innlegg (15 mm, 17 mm, 19 mm, 26 mm): 2 stk. hver

Brystskjold (21 mm, 24 mm, 28 mm): 2 stk. hver

Brukervennlighet

Bruke brystpumpen: Enkel å bruke, enkel å rengjøre og montere

Funksjoner

Bevegelsesfrihet: Håndfri pumping

Innstillinger for personlig tilpasning: 16 sugenivåer i pumpemodus, 8 sugenivåer i stimuleringsmodus

Motorenhet: Oppladbart batteri / USB-C., Det tar opptil 1,5 timer å lade batteriet helt opp og det varer i ca. 5 pumpeøkter

Detaljert informasjon om brystskjold og -innlegg: Flere størrelser er tilgjengelige for den beste passformen

