

PHILIPS

AVENT



Sähkökäyttöisen
kaksoisrintapumpun
aloituspakkaus

Hands-free

Jäljittelee vauvan juomisrytmiä

Vapaus pumppaamisen aikana

Helppo käyttää, puhdistaa ja
koota

Saumaton istuvuus



SCD553/11

Saat vapaat kädet ja enemmän aikaa.

Sopii täydellisesti 99 prosentille äideistä

Valmistaudu vauvan tuloon sähkökäyttöisen hands-free-kaksoisrintapumpun aloituspakkauksella. Siinä on kaikki, mitä tarvitset rintamaidon pumppaamiseen ja säilyttämiseen ja vauvan syöttämiseen alusta alkaen, kuten rintakumit ja sisäkkeet, liivinsuojat, pullot ja säilytyspussit.

Muita etuja

- Kaikki säilytykseen ja syöttämiseen

Vapaus liikkua pumppaamisen aikana

- Liiku vapaasti erittäin kevyiden keruukuppien kanssa
- Liikkumisvapautta puettavan rintapumpun avulla

Jäljittelee vauvan juomisrytmiä

- Pumppaa tehokkaasti* vauvasi rytmiä jäljitellen
- Hiljaista sairaalataso pumppausta

Helppo käyttää, puhdistaa ja koota

- Seuraa maidontuloa läpinäkyvien keruukuppien avulla
- Mukauta pumppauskerta
- Helppo puhdistaa ja koota – vain vähän osia

Saumaton istuvuus

- Silikoniset rintakumit mukautuvat rintoihisi

Kohokohdat

Jäljittelee vauvan juomisrytmiä



Vauvat osaavat syömisen! Siksi sähkökäyttöinen hands-free-rintapumpumme jäljittelee vauvojen luonnollista juomisrytmiä – voit siis etsiä oman rytmiä tehokkaalle* pumppaamiselle ja parhaalle mahdolliselle maidontulolle. Philips Avent Hands-free -rintapumppu pumppaa jopa 85 kertaa minuutissa ja on kaksi kertaa nopeampi kuin useimmat muut pumput**.

Sairaalatason moottori



Lähes äänettömässä rungossa on sairaalatason teho, jota voi odottaa perinteiseltä rintapumpulta, vaikka tämä on pienikokoinen ja puettava malli. Johdottomassa rungossa on ladattava akku, jotta voit pumpata tehokkaasti ja huomaamattomasti missä tahansa.

Ainutlaatuiset SkinSense-rintakumit



Ainutlaatuiset silikoniset SkinSense-rintakumit mukautuvat pehmeästi rintojen ympärille käyttämällä kehon luonnollista lämpöä. Rintakumit on valmistettu elintarviketasoisesta silikonista, jotta voit käyttää niitä luottavaisin mielin.

Sopii 99 prosentille kaikista äideistä



Haluamme, että jokainen äiti tuntee olonsa mukavaksi, ja siksi istuvuus on tärkeää. Tässä aloituspakkauksessa on kattava valikoima rintakumien ja sisäkkeiden kokoja, jotka sopivat 99 prosentille äideistä ja tekevät pumppauksesta miellyttävää.

Läpinäkyvät keruukupit



Koska näet esteettä keruukuppien sisälle, voit asettaa nannit oikein parhaan maidontulon takaamiseksi ja seurata rintamaidon määrää. Voit pumpata luottavaisin mielin ensimmäisestä pisarasta loppuun saakka.

Erittäin kevyet keruukupit



Keruukuppi painaa tyhjänä vain hiukan yli 100 grammaa, ja on jopa kolme kertaa kevyempi kuin puettava rintapumppu. Kuppi asettuu mukavasti ja lähes huomaamattomasti liiveihin.

Pue niin kuin haluat



Pumpun mukana toimitetaan punottu kantohihna ja pidike, jotta rungon voi pukea ristiin rinnan yli tai vyötärölle. Koska voit pukea rungon niin kuin haluat, voit hallita pumpun käyttöä kätevästi. Voit hienosäätää istuvuutta putken liittimellä ja hihnan säädöllä.


Hands-free

Sähkökäyttöisen kaksoisrintapumpun aloituspakkaus

SCD553/11

Kohokohdat

Mukautettavat tehoasetukset

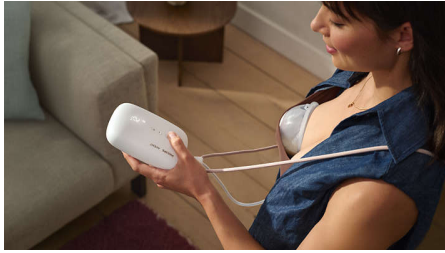

Saat parhaan hyödyn jokaisesta pumppauskerrasta 8 imuteholla, jotka stimuloivat maidontuloa, ja 16 imuteholla maidon pumppaamiseen. Voit hienosäätää asetuksia käytön aikana, ja koska sopivin asetus tallennetaan automaattisesti, pumppu on aina valmiina käyttöön.

Helppo puhdistaa ja koota



Pumppu ja tarvikkeet on suunniteltu mahdollisimman yksinkertaisiksi. Keruukupissa on vähän osia, joten se on helppo purkaa, puhdistaa (käsin tai astianpesukoneessa), desinfioida ja koota uudelleen.

Aloituspakkauksen perustarvikkeet



Kätevä aloituspakkaus tuo joustavuutta käyttöön, sillä sen ruokinta- ja säilytystuotteet on suunniteltu sopimaan saumattomasti rutiineihisi. Pakkauksessa on myös viisi paria liivinsuojia.

Tekniset tiedot

Virta

Lähde: Ladattava akku / USB-C (ei sisällä sovittinta)

Materiaali

Kuppi, suojus, rintakumin suojus: Polypropeeni
Rintakumi, kalvo, venttiili, sisäke: Nestemäinen silikoni
Silikoniputki: Silikoni

Sisältö

Kertakäyttöinen liivinsuoja: 10 kpl
Rintamaitopussit: 25 kpl
USB-C-kaapeli: 1 kpl
Pussi: 1 kpl

Kantojohto: 1 kpl
Putken liitin: 1 kpl
Ladattava runko (jossa irrotettava pidike): 1 kpl
Keruukuppi (koottu): 2 kpl
Silikoniputket: 2 kpl
Rintakumin pölysuojus: 2 kpl
125 ml:n Natural Response -tuttipullo (mukana Flow 2 -tutti): 1 kpl
Nännien mittauskortti: 1 kpl
Sisäkkeet (15 mm, 17 mm, 19 mm, 26 mm): 2 kpl kussakin
Rintakumi (21 mm, 24 mm, 28 mm): 2 kpl kussakin

Helppokäyttöinen

Rintapumpun käyttö: Helppo käyttää, puhdistaa ja koota

Toiminnot

Joustavuutta liikkuu: Kädet vapaiksi jättävä pumppaus
Mukautettavat asetukset: 16 imutehoa pumppaustilassa, 8 imutehoa stimulointitilassa
Runko: Ladattava akku / USB-C, Akun lataaminen täyteen kestää enintään 1,5 tuntia ja täysi lataus riittää noin 5 pumppauskertaan
Rintakumin ja sisäkkeen tiedot: Saatavilla useita eri kokoja

