

PHILIPS

AVENT



Dobbelt elektrisk
startsæt

Hands-free

Efterligner barnets drikkerytme

Frihed, mens du udmalker

Nem at anvende, rengøre og
samle

Inklusiv, problemfri pasform



SCD553/11

Hav hænderne fri. Spar tid.

En perfekt pasform til 99 % af mødre

Vær forberedt på barnets ankomst med dette håndfri startsæt med dobbelt elektrisk brystpumpe. Det har alt hvad der er brug for til at udmalke og opbevare modermælk og ernære barnet fra dag ét, herunder brystskjolde og indsatser, puder, flasker og opbevaringsposer.

Andre fordele

- Alt hvad du behøver til opbevaring, madning med mere

Fysisk frihed, mens du udmalker

- Bevæg dig frit med de meget lette opsamlingskopper
- Bærbar komfort for at få maksimal bevægelse

Efterligner barnets drikkerytme

- Effektiv* udmalkning, der efterligner barnets rytme
- Støjsvag pumpning med professionel kvalitet

Nem at anvende, rengøre og samle

- Registrer mælkestrømmen med de helt gennemsigtige opsamlingskopper
- Tilpas pumpning
- Nem at rengøre og samle med få dele

Inklusiv, problemfri pasform

- Silikoneskjolde former sig skånsomt efter dine bryster

Vigtigste nyheder

Efterligner barnets drikkerytme



Barnet ved bedst, hvordan det drikker! Derfor efterligner vores håndfri elektriske brystpumpe den naturlige drikkerytme, så du kan finde din egen rytme til effektiv* udmalkning og optimal mælkemængde. Philips Avents håndfri brystpumpe pumper op til 85 gange i minuttet og er dobbelt så hurtig som de fleste andre pumper**.

Motor i professionel kvalitet




Den næsten lydløse motorenhed leverer den professionelle kvalitet, du forventer af en traditionel brystpumpe, samtidig med den er kompakt og bærbar. Med det genopladelige batteri pumper den batteridrevne motorenhed kraftfuldt og diskret overalt.

Unikke SkinSense-skjolde



Vores unikke SkinSense silikonebrystskjolde er designet til ultimativ komfort, og former sig blødt omkring dine bryster ved hjælp af din krops naturlige varme. Brystskjoldene er lavet af fødevaregodkendt silikone for at give fuldstændig ro i sindet.

Passer til 99 % af alle mødre

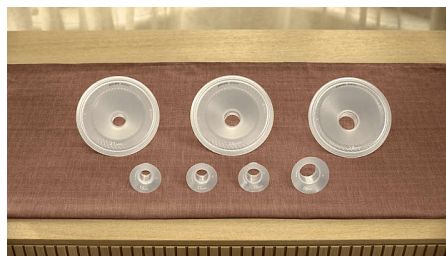

Vi hjælper alle mødre med at føle sig godt tilpas, og at have den rigtige pasform er en væsentlig del af det. Dette startsæt omfatter hele vores udvalg af brystskjolde og skjoldindsatser, der passer til 99 % af alle mødre for at give ultimativ komfort under pumpning.

Overskuelig opsamling



De gennemsigtige opsamlingskopper gør det muligt, at se indholdet. De hjælper dig med at placere dine brystvorter korrekt for at opnå den

bedste mælkeproduktion, og se mængden af modermælk. Til tryk pumpning fra første til sidste dråbe.

Meget lette opsamlingskopper



Vores opsamlingskopper vejer kun lidt over 100 gram, når de er tomme – op til 3 gange lettere end en fuldt bærbar brystpumpe. Koppen placeres komfortabelt og næsten usynligt i bh'en.


Bær den på din egen måde



Vores pumpe leveres med en flettet bæresnor og klemme til at bære motorenheden på tværs af kroppen eller fastgjort til linningen. Med mulighed for at bære den, som du ønsker, kan du være helt sikker på, at du har kontrollen. Brug slangekoblingen og snorereguleringen til at finjustere din pasform.

Vigtigste nyheder

Individuelt tilpasset pumpning

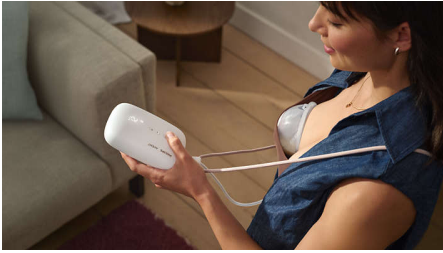

Få mest muligt ud af hver pumpning med 8 sugeniveauer til stimulering af mælkestrømmen og 16 sugeniveauer til udmalkning. Du kan finjustere, mens du pumper, og med din ideelle indstilling automatisk gemt, er din pumpe altid klar til brug.

Nem at rengøre og samle



Vi har designet vores pumpe og tilbehør til at være så enkle som muligt. Med kun nogle få dele at samle er opsamlingskopperne nemme at skille ad, rengøre (i hånden eller i en opvaskemaskine), desinficere og samle igen.

Vigtigste ting i startsæt



Oplev bekvemmelighed og fleksibilitet med startsettets madnings- og opbevaringsprodukter, der er designet til at passe perfekt ind i dine rutiner. For ekstra komfort indeholder sættet også fem par ammeindlæg.

Specifikationer

Strøm

Target: Genopladeligt batteri/USB-C (adapter medfølger ikke)

Materiale

Kop, fronthætte, overtræk til brystskjold:

Polypropylen

Brystskjold, membran, ventil, indsats: Flydende silikone

Silikonerør: Silikone

Hvad følger med

Engangsammeindlæg: 10 stk.

Poser til brystmælk: 25 stk.

USB-C-kabel: 1 stk.

Etui: 1 stk.

Bærerem: 1 stk.

Slangekobling: 1 stk.

Genopladelig motorenhed (med aftagelig klemme): 1 stk.

Opsamlingskop (samlet): 2 stk.

Silikoneslange: 2 stk.

Overtræk (støv) til brystskjold: 2 stk.

125 ml Natural Response-flaske (med Flow 2-sut): 1 stk.

Størrelsestabel for brystvorter: 1 stk.

Indsatser (15 mm, 17 mm, 19 mm, 26 mm): 2 stk. hver

Brystskjold (21 mm, 24 mm, 28 mm): 2 stk. hver

Brugervenlig

Brystpumpebrug: Nem at anvende, rengøre og samle

Funktioner

Fleksibilitet i bevægelse: Håndfri pumpning

Personlige indstillinger: 16 sugeniveauer i udmalkningstilstand, 8 sugeniveauer i stimuleringstilstand

Motorenhed: Genopladeligt batteri/USB-C, Fuld opladning af batteriet tager op til 1,5 time og holder til ca. 5 pumpesessioner

Specifikationer for brystbeskytter og indlæg: Flere størrelser til rådighed for den bedste pasform

