

PHILIPS

AVENT



**Elektrisk
enkeltbrystpumpe**

Hands-free

Efterligner barnets drikkerytme

Frihed, mens du udmalker

Nem at anvende, rengøre og
samle

Inklusiv, problemfri pasform



SCF531/11

Hav hænderne fri. Spar tid.

Efterligner babyens drikkerytme

Philips Avent Håndfri elektriske enkelte brystpumper er fremstillet til effektiv* og behagelig udmalkning. Den efterligner babyens rytme, og med kraft, skånsomhed og lethed er den den ideelle håndfri pumpeledsager.

Fysisk frihed, mens du udmalker

- Bevæg dig frit med den meget lette opsamlingskop
- Bærbar komfort for at få maksimal bevægelse

Efterligner barnets drikkerytme

- Effektiv* udmalkning, der efterligner barnets rytme
- Støjsvag pumpning med professionel kvalitet

Nem at anvende, rengøre og samle

- Registrer mælkestrømmen med den helt gennemsigtige opsamlingskop
- Tilpas pumpning
- Nem at rengøre og samle med få dele

Inklusiv, problemfri pasform

- Et udvalg af størrelser af brystskjolde og indsatser til alle mødre
- Skjoldet af silikone former sig blidt til dit bryst

Vigtigste nyheder

Efterligner barnets drikkerytme



Barnet ved bedst, hvordan det drikker! Derfor efterligner vores håndfri elektriske brystpumpe den naturlige drikkerytme, så du kan finde din egen rytme til effektiv* udmalkning og optimal mælkemængde. Philips Avents håndfri brystpumpe pumper op til 85 gange i minuttet og er dobbelt så hurtigt som de fleste andre pumper**.

Motor i professionel kvalitet




Den næsten lydløse motorenhed leverer den professionelle kvalitet, du forventer af en traditionel brystpumpe, samtidig med den er kompakt og bærbar. Med det genopladelige batteri pumper den batteridrevne motorenhed kraftfuldt og diskret overalt.

Unikke SkinSense-skjolde



Vores unikke SkinSense-brystskjold af silikone er designet til ultimativ komfort, og former sig blødt omkring dit bryst ved hjælp af kroppens naturlige varme. Brystskjoldet er lavet af fødevaregodkendt silikone for at give fuldstændig ro i sindet.

Overskuelig opsamling

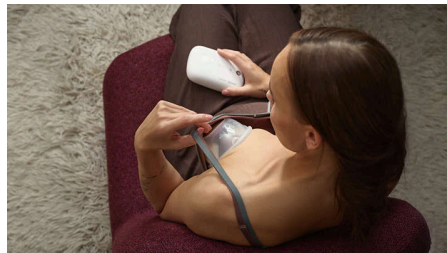

Den gennemsigtige opsamlingskop gør det muligt, at se indholdet. Den hjælper dig med at placere din brystvorte korrekt for at opnå den bedste mælkeproduktion, og se mængden af modernmælk. Til tryk pumpning fra første til sidste dråbe.

Met let opsamlingskop




Vores opsamlingskopper vejer kun lidt over 100 gram, når de er tomme – op til 3 gange lettere end en fuldt bærbar brystpumpe. Koppen placeres komfortabelt og næsten usynligt i bh'en.

Bær den på din egen måde



Vores pumpe leveres med en flettet bæresnor og klemme til at bære motorenheden på tværs af kroppen eller fastgjort til linningen. Med mulighed for at bære den, som du ønsker, kan du være helt sikker på, at du har kontrollen. Brug slangekoblingen og snorereguleringen til at finjustere din pasform.

Individuelt tilpasset pumpning

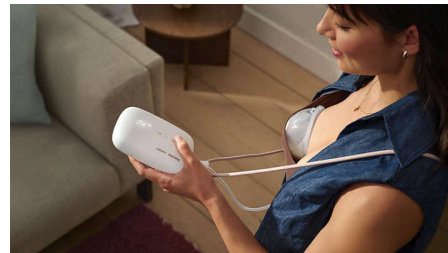


Få mest muligt ud af hver pumpning med 8 sugeniveauer til stimulering af mælkestrømmen og 16 sugeniveauer til udmalkning. Du kan finjustere, mens du pumper, og med din ideelle indstilling automatisk gemt, er din pumpe altid klar til brug.

Nem at rengøre og samle



Vi har designet vores pumpe og tilbehør til at være så enkle som muligt. Med kun nogle få dele at samle er opsamlingskopperne nemme at skille ad, rengøre (i hånden eller i en opvaskemaskine), desinficere og samle igen.

Find den rigtige pasform

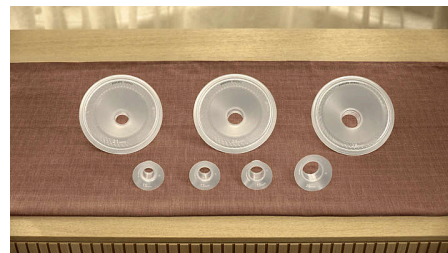

Vi hjælper alle mødre med at føle sig godt tilpas, og at have den rigtige pasform er en væsentlig del af det. Vores udvalg af størrelser af brystskjolde og skjoldindsatser passer til 99 % af mødre. Kan købes separat, så du kan opleve din ultimative komfort, mens du pumper.

Specifikationer

Strøm

Target: Genopladeligt batteri/USB-C (adapter medfølger ikke)

Materiale

Kop, fronthætte, overtræk til brystskjold:

Polypropylen

Brystskjold, membran, ventil, indsats: Flydende silikone

Silikonerør: Silikone

Hvad følger med

USB-C-kabel: 1 stk.

Bærerem: 1 stk.

Genopladelig motorenhed (med aftagelig

klemme): 1 stk.

Opsamlingskop (samlet): 1 stk.

Silikoneslange: 1 stk.

Overtræk (støv) til brystskjold: 1 stk.

Brystskjold (21 mm, 24 mm): 1 stk. hver

Størrelsestabel for brystvorter: 1 stk.

Indsats 19 mm: 1 stk.

Brugervenlig

Brystpumpebrug: Nem at anvende, rengøre og samle

Funktioner

Fleksibilitet i bevægelse: Håndfri pumpning

Personlige indstillinger: 16 sugeniveauer i udmalkningstilstand, 8 sugeniveauer i stimuleringstilstand

Motorenhed: Genopladeligt batteri/USB-C, Fuld opladning af batteriet tager op til 1,5 time og holder til ca. 5 pumpesessioner

Specifikationer for brystbeskytter og indlæg:

Flere størrelser til rådighed for den bedste pasform

