

**PHILIPS**

**AVENT**



Dubbele elektrische  
borstkolf

Hands-free



SCF547/11

## Hou je handen vrij en maak tijd vrij.

Bootst het drinkritme van je baby na

De Philips Avent handsfree dubbele elektrische borstkolf is ontwikkeld voor effectief\* en comfortabel kolven en bootst het drinkritme van je baby na. Krachtig, comfortabel en licht, en daarmee de ideale handsfree kolf.

### Fysieke vrijheid tijdens het kolven

- Beweeg je vrij met de ultralichte opvangcups
- Draagbaar comfort voor maximale bewegingsvrijheid

### Bootst het drinkritme van baby's na

- Kolf effectief\* met een ritme dat het ritme van je baby nabootst
- Geluidloos kolven op ziekenhuisniveau

### Eenvoudig te gebruiken, schoon te maken en in elkaar te zetten

- Houd de melkstroom in de gaten met de volledig transparante opvangcups
- Minder onderdelen dus eenvoudig in elkaar te zetten en schoon te maken
- Personaliseer je kolfsessie met 24 modi

### Inclusieve, naadloze pasvorm

- Een assortiment borstschildjes en inzetstukken voor elke moeder
- Siliconen schildjes vormen zich naar je borsten

## Kenmerken

### Bootst het drinkritme van baby's na



Baby's weten zelf het beste hoe ze moeten drinken! Daarom bootst onze handsfree elektrische borstkolf hun natuurlijke drinkritme na, zodat jij je eigen ritme kunt vinden voor effectief\* kolven en een optimale melkproductie. Met tot wel 85 kolfbewegingen per minuut is de Philips Avent handsfree borstkolf 2 keer sneller dan de meeste andere kolfsets\*\*.

### Motor van ziekenhuissterkte




De bijna geruisloze motorunit levert de kracht die je verwacht van een traditionele borstkolf, maar dan in een compact en draagbaar apparaat. Dankzij de oplaadbare batterij en de draadloze motorunit kun je overal krachtig en discreet kolven.

### Unieke SkinSense-schildjes



Onze unieke siliconen SkinSense-borstschildjes zijn ontworpen voor ultiem comfort en vormen zich zacht rond je borsten door middel van de natuurlijke warmte van je lichaam. De borstschildjes zijn gemaakt van voedselveilige siliconen.

### Transparante opvangcups

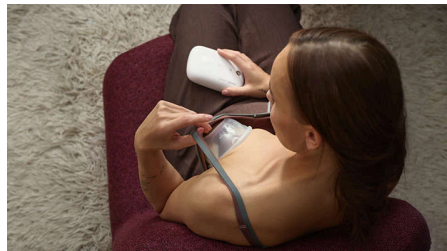

De transparante opvangcups bieden een onbelemmerd zicht op de binnenkant. Ze helpen je tepels op de juiste manier te plaatsen voor de beste melkafgifte en zorgen ervoor dat je visueel het volume moedermelk kunt bijhouden. Zo kolf je vol zelfvertrouwen, van de eerste tot de laatste druppel.

### Ultralichte opvangcup



Een lege opvangcup weegt iets meer dan 100 gram. Dat is tot 3 keer lichter dan een volledig draagbare borstkolf. De cups zitten comfortabel in je bh, waardoor je nauwelijks merkt dat je ze draagt.

### Draag hem op jouw manier




Onze pomp wordt geleverd met een gevlochten draagkoord en een kledingklep, waarmee je de motor over het lichaam of aan je broek kunt dragen. Zo heb je de vrijheid om hem op jouw manier te dragen. Blijf je ding doen, in de wetenschap dat je al je behoeften bij de hand hebt. Gebruik de slangkoppeling en koordversteller om je pasvorm nauwkeurig af te stemmen.

### Personaliseerbaar




Haal het maximale uit elke kolfsessie, dankzij de 8 standen om de melkstroom te stimuleren en 16 standen om de melk af te kolven. Je kunt tijdens het kolven fijnafstellen en omdat je ideale instelling automatisch wordt onthouden, is je kolf altijd klaar voor gebruik.

### Eenvoudig schoon te maken en te monteren

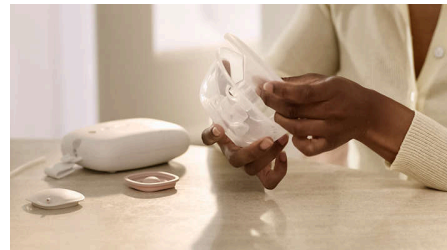

We hebben onze pomp en accessoires zo eenvoudig mogelijk ontworpen. Met slechts een paar verbindingstukken is elke opvangcup in een handomdraai uit elkaar te halen, schoon te maken (met de hand of in de vaatwasser), te desinfecteren en weer in elkaar te zetten.

### Vind de juiste pasvorm

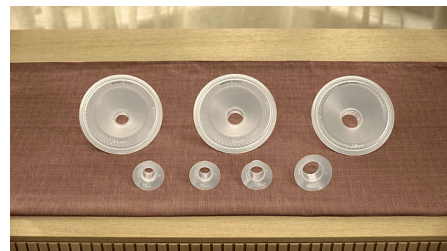

Wij willen dat iedere moeder zich op haar best voelt. De juiste pasvorm is daar een essentieel onderdeel van. Ons assortiment van borstschildjes en kussentjes past 99% van de moeders. Ze zijn afzonderlijk verkrijgbaar, zodat je het ultieme comfort ervaart tijdens het kolven.

## Specificaties

### Vermogen

**Bron:** Oplaadbare batterij/USB-C (adapter niet meegeleverd)

### Materiaal

Cup, beschermkapje, beschermhoes voor borstbeschermer: Polypropyleen  
Borstbeschermer, membraan, ventiel, inzetstuk: Siliconen gietrubber  
Siliconen slangetje: Siliconen

### Inclusief

Bewaarsakken voor moedermelk: 25 stk  
Draagkoord: 1 x  
Slangkoppeling: 1 x  
Oplaadbare accu (met afneembare klem): 1 x

Opvangcup (gemonteerd): 2 stuks

Siliconen slangetjes: 2 stuks

Stofbestendige beschermhoes voor borstbeschermer: 2 stuks

Borstschildje (21 mm, 24 mm): 2 stuks

Natural Response-fles van 125 ml (4 oz) (met Flow 2-speen): 1 x

Tepelmaatkaart: 1 x

Inzetstuk - 19 mm: 2 stuks

USB-kabel: 1 x

### Gebruiksgemak

Gebruik borstkolf: Eenvoudig te gebruiken, schoon te maken en in elkaar te zetten

### Funcities

**Flexibiliteit in beweging:** Handsfree kolven

**Persoonlijke instellingen:** Stimulatiemodus met 8 zuigniveaus en een expressiemodus met 16 zuigniveaus

**Motoronderdeel:** Oplaadbare batterij/USB-C, Het volledig opladen van de batterij duurt tot 1,5 uur en gaat ongeveer 5 kolfsessies mee

**Details borstbeschermer en kussentje:**

Verschillende maten beschikbaar voor de beste pasvorm

