

PHILIPS

AVENT



**Elektrisk
dobbelbrystpumpe**

Hands-free

Efterligner barnets drikkerytme

Frihed, mens du udmalker

Nem at anvende, rengøre og
samle

Inklusiv, problemfri pasform



SCF532/11

Hav hænderne fri. Spar tid.

Efterligner babyens drikkerytme

Philips Avent Håndfri dobbelte elektriske brystpumper er fremstillet til at være effektiv* og behagelig udmalkning. Den efterligner barnets rytme, og med kraft, skånsomhed og lethed er den den ideelle håndfri pumpeledsager.

Fysisk frihed, mens du udmalker

- Bevæg dig frit med de meget lette opsamlingskopper
- Bærbar komfort for at få maksimal bevægelse

Efterligner barnets drikkerytme

- Effektiv* udmalkning, der efterligner barnets rytme
- Støjsvag pumpning med professionel kvalitet

Nem at anvende, rengøre og samle

- Registrer mælkestrømmen med de helt gennemsigtige opsamlingskopper
- Nem at rengøre og samle med få dele
- Tilpas pumpning

Inklusiv, problemfri pasform

- Et udvalg af størrelser af brystskjolde og indsatser til alle mødre
- Silikoneskjalde former sig skånsomt efter dine bryster

Vigtigste nyheder

Efterligner barnets drikkerytme



Barnet ved bedst, hvordan det drikker! Derfor efterligner vores håndfri elektriske brystpumpe den naturlige drikkerytme, så du kan finde din egen rytme til effektiv* udmalkning og optimal mælkemængde. Philips Avents håndfri brystpumpe pumper op til 85 gange i minuttet og er dobbelt så hurtig som de fleste andre pumper**.

Motor i professionel kvalitet




Den næsten lydløse motorenhed leverer den professionelle kvalitet, du forventer af en traditionel brystpumpe, samtidig med den er kompakt og bærbar. Med det genopladelige batteri pumper den batteridrevne motorenhed kraftfuldt og diskret overalt.

Unikke SkinSense-skjolde



Vores unikke SkinSense silikonebrystskjolde er designet til ultimativ komfort, og former sig blødt omkring dine bryster ved hjælp af din krops naturlige varme. Brystskjoldene er lavet af fødevaregodkendt silikone for at give fuldstændig ro i sindet.

Overskuelig opsamling

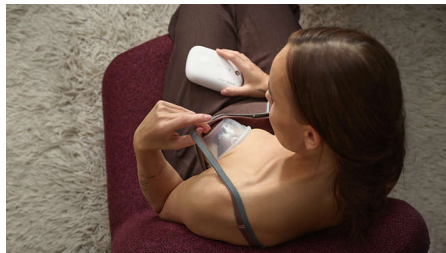

De gennemsigtige opsamlingskopper gør det muligt, at se indholdet. De hjælper dig med at placere dine brystvorter korrekt for at opnå den bedste mælkeproduktion, og se mængden af modernælk. Til tryk pumpning fra første til sidste dråbe.

Met let opsamlingskop



En opsamlingskop vejer kun lidt over 100 gram, når den er tom – op til 3 gange lettere end en fuldt bærbar brystpumpe. Kopperne placeres komfortabelt og næsten usynligt i bh'en.

Bær den på din egen måde



Vores pumpe leveres med en flettet bæresnor og klemme til at bære motorenheden på tværs af kroppen eller fastgjort til linningen. Med mulighed for at bære den, som du ønsker, kan du være helt sikker på, at du har kontrollen. Brug slangekoblingen og snorereguleringen til at finjustere din pasform.

Individuelt tilpasset pumpning



Få mest muligt ud af hver pumpning med 8 sugeniveauer til stimulering af mælkestrømmen og 16 sugeniveauer til udmalkning. Du kan finjustere, mens du pumper, og med din ideelle indstilling automatisk gemt, er din pumpe altid klar til brug.

Nem at rengøre og samle



Vi har designet vores pumpe og tilbehør til at være så enkle som muligt. Med kun nogle få dele at samle er opsamlingskopperne nemme at skille ad, rengøre (i hånden eller i en opvaskemaskine), desinficere og samle igen.

Find den rigtige pasform



Vi hjælper alle mødre med at føle sig godt tilpas, og at have den rigtige pasform er en væsentlig del af det. Vores udvalg af størrelser af brystskjolde og skjoldindsatser passer til 99 % af mødre. Kan købes separat, så du kan opleve din ultimative komfort, mens du pumper.

Specifikationer

Strøm

Target: Genopladeligt batteri/USB-C (adapter medfølger ikke)

Materiale

Kop, fronthætte, overtræk til brystskjold:

Polypropylen

Brystskjold, membran, ventil, indsats: Flydende silikone

Silikonerør: Silikone

Hvad følger med

USB-C-kabel: 1 stk.

Bærerem: 1 stk.

Slangekobling: 1 stk.

Genopladelig motorenhed (med aftagelig klemme): 1 stk.

Opsamlingskop (samlet): 2 stk.

Silikoneslange: 2 stk.

Overtræk (støv) til brystskjold: 2 stk.

Brystskjold (21 mm, 24 mm): 2 stk. hver

Størrelsestabel for brystvorter: 1 stk.

Indsats 19 mm: 2 stk.

Brugervenlig

Brystpumpebrug: Nem at anvende, rengøre og samle

Funktioner

Fleksibilitet i bevægelse: Håndfri pumpning

Personlige indstillinger: 16 sugeniveauer i udmalkningstilstand, 8 sugeniveauer i stimuleringstilstand

Motorenhed: Genopladeligt batteri/USB-C, Fuld opladning af batteriet tager op til 1,5 time og holder til ca. 5 pumpesessioner

Specifikationer for brystbeskytter og indlæg:

Flere størrelser til rådighed for den bedste pasform

