

PHILIPS

sonicare



Sonisk, elektrisk
tannbørste med app

ExpertClean 7300

Tilkoblet børsting i en fei

Innebygd trykksensor

Anerkjent smart børstehode

3 modi, 3 intensiteter



HX9641

Smart teknologi for sunne munnpleievaner

Total rengjøring for pasientenes behov.

Philips Sonicare ExpertClean fungerer som pasientenes personlige børsteguide og bruker smart sensorteknologi og fremgangsrapporter til å spore vaner og gi tilbakemeldinger for å forbedre pusseteknikken og den daglige munnpleierutinen.

Bevist at den forbedrer munnhygiene

- Økt overflatekontakt for å eliminere plakk
- Bedre tannkjøttpleie gir bedre generell helse

Forbedrer munnhygiene til pasientene

- Fjerner opptil ti ganger mer plakk* for en grundigere rengjøring
- Opptil syv ganger sunnere tannkjøtt* på bare to uker

Designet rundt pasienten

- 3 modi, 3 intensiteter
- Varsler pasienter om lavt batterinivå
- Få den mest effektive tannpussen, hver dag
- Veileder pasienten i å bruke riktig mengde trykk
- Veileder pasientene til bedre munnpleievaner
- Børstehoder velger automatisk optimale innstillinger

ExpertClean 7300

Sonisk, elektrisk tannbørste med app

HX9641/01

Høydepunkter

Fjerner opptil 10 ganger mer plakk*




G3 Premium Plaque-børstehodet gir deg den grundigste tannpussen noensinne. De myke, fleksible sidene gjør at børstehårene kan tilpasse seg formen til alle tannoverflater. Du får opptil fire ganger så stor kontaktflate** og opptil ti ganger så mye plakkfjerning i områder som er vanskelige å nå*.

Opptil syv ganger sunnere tannkjøtt*



G3 Premium Gum Care-børstehodet forbedrer tannkjøtt helsen din. Den mindre størrelsen og de målrettede børstehårene for tannkjøtttranden gir skånsom, men effektiv rengjøring i områder der tannkjøtt sykdommer kan oppstå. Det er klinisk bevist at børstehodet reduserer forekomsten av tannkjøttbetennelse* med opptil 100 %, og at det gir opptil syv ganger sunnere tannkjøtt på bare to uker.*

Fremgangsrapport

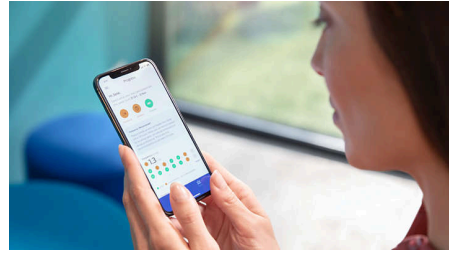

Sensorer sporer og måler pasientens børstevaner, mens Philips Sonicare ExpertClean-børstehåndtaket gir umiddelbar tilbakemelding. Over tid lagrer og analyserer Sonicare-appen disse vanene og genererer en fremdriftsrapport for å bidra til å fremme bedre børsteteknikk.

3 modi, 3 intensiteter



Med tre pussemoduser (Clean, Gum Health, DeepClean+) og tre intensitetsinnstillinger (lav, medium, høy) kan pasientene dine tilpasse pusseopplevelsen for optimal komfort og fullstendig rengjøring. Se Spesifikasjoner for mer detaljert informasjon om modusene.


Gjenkjenning av smarte børstehoder



En mikrobrikke i børstehodet synkroniseres med Philips Sonicare ExpertClean-håndtaket. Hvis en pasient klikker på et C3 Premium Plaque

Control/Defense/Defence-, G3 Premium Gum Care- eller W3 Premium White-børstehode, velger tannbørsten automatisk den optimale børstomodusen og intensitetsnivået. Alt pasientene dine trenger å gjøre er å begynne å pusse. Det hjelper pasientene med å finne de beste innstillingene for den beste ytelsen og deres behov

Trykksensor

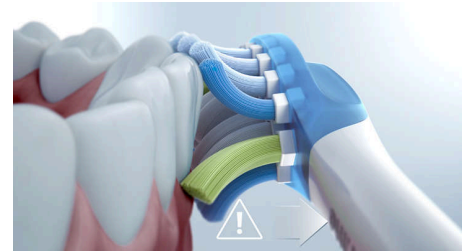

Hvis pasientene trykker for hardt, vil den intuitive trykksensoren forsiktig pulsere håndtaket og gi pasientene den tilbakemeldingen de trenger i sanntid for å bli mer forsiktige. I en studie av amerikanske pasienter reduserte 7 av 10 aggressive tannpussere børstetrykket sitt når de brukte trykksensoren.****

C3 Premium Plaque Control



C3 Premium Plaque Control er vårt hittil mest dyptgående børstehode. Med myke, fleksible sider former børstehårene seg etter hver tanns overflate for å gi fire ganger mer overflatekontakt og fjerner opptil ti ganger mer plakk fra vanskelig tilgjengelige områder*.

ExpertClean 7300

Sonisk, elektrisk tannbørste med app

HX9641/01

Høydepunkter

G3 Premium Gum Care-børstehode



G3 Premium Gum Care er det beste børstehode vårt for å forbedre tannkjøttelse. Den mindre størrelsen og de målrettede børstehårene langs tannkjøtttranden gir skånsom, men effektiv rengjøring langs tannkjøtttranden, der tannkjøtt sykdom starter. Det er klinisk bevist at den gir opptil sju ganger friskere tannkjøtt* på bare to uker.

Børstehodereserve



Børstehodene blir slitne og børsten slites etter tre måneders normal bruk. Philips Sonicare ExpertClean gir en nøyaktig påminnelse om utskifting av børstehode basert på hvor ofte pasientene børster, hvor lenge de børster og hvor mye trykk de bruker. Når det er på tide å

skifte børstehode, gir et lys på håndtaket beskjed om det, slik at pasienten kan fortsette å oppnå best mulig resultat.

Batteriindikator



Når Philips Sonicare ExpertClean er fulladet, har den nok batteri til tre ukers regelmessig bruk. Batteriindikatoren lyser og varsler pasienten tydelig når batteriet er lavt og må lades.

ExpertClean 7300

Sonisk, elektrisk tannbørste med app

HX9641/01

Spesifikasjoner

Produktoppdatering

Støtteperiode: Philips vil levere de nødvendige sikkerhetsoppdateringene til og med 31. desember 2026.

Tilkoblingsmuligheter

Trådløs Bluetooth®-teknologi: Børsteapp tilkoblet

Drift

Spenning: 110–220 V

Tekniske spesifikasjoner

Batteri: Oppladbar

Driftstid (full til tom): 14 dager***

Batteritype: Litium-ION

Utforming og utseende

Farge: Hvit og lyseblå

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

Kompatibilitet

Android-kompatibilitet: Android-telefoner, Bluetooth 4.0-aktiverte nettbrett

iOS-kompatibilitet: Tredjegerasjons iPad eller nyere, iPhone 4S eller nyere, med iOS7 eller nyere, med iOS7-operativsystem

Brukervennlighet

Håndtak: Slank, ergonomisk form

Håndtakets kompatibilitet: Børstehoder som klikkes enkelt på plass

Byttepåminnelse: Sikrer alltid best mulige resultater, påminnelsesikonet lyser opp

Deler som medfølger

Håndtak: 1 ExpertClean

Børstehoder: 1 C3 Premium Plaque Control, 1 G3 Premium Gum Care

Lader: 1

Rengjøring

Helsefordeler: Opptil syv ganger sunnere tannkjøtt*

Ytelse: Fjerner opptil 10 ganger mer plakk*

Hastighet: Opptil 62 000 børstebevegelser/min

Tidsbryter: BrushPacer og SmarTimer

Hvitere tenner: Bidrar til å fjerne flekker på en

naturlig måte

Tilbakemelding om pussetrykk: Vibrering i håndtaket for å varsle brukeren

Moduser

Tre intensiteter: Lav, Middels stor, Høy

Clean: For enestående hverdagsrengjøring

Deep Clean+: For en oppfriskende, grundig tannpuss

For sunt tannkjøtt: Pusser jekslene ekstra godt

Paring i BrushSync-modus

C3 Premium Plaque Control: Paring med Clean-modus

G3 Premium Gum Care-børstehode: Paring med Gum Health-modus

Teknologi med Smart-sensor

Trykksensor: Sier ifra når du børster for hardt

Byttepåminnelse med BrushSync: Få alltid

beskjed når du bør, bytte børstehode

BrushSync-teknologi: Kobler til smarthåndtaket og, smart børstehode

Programvarestøtte

Programvareoppdateringer: Philips tilbyr relevante programvareoppdateringer i to år etter kjøpsdatoen.

