

PHILIPS

sonicare



Sonic elektrisk
tannbørste

ProtectiveClean 4700

Innebygd trykksensor

To rengjøringsmoduser

1x BrushSync-funksjon



HX6483

Renere tenner. På en skånsom måte.

Fjern opptil ti ganger så mye plakk som med en manuell tannbørste

Kjenn hvor annerledes en skånsom tannpuss er, med trykksensoren vår som fjerner opptil ti ganger så mye plakk som en manuell tannbørste

Bevist at den forbedrer munnhygien

- Økt overflatekontakt for å eliminere plakk

Nyskapende teknologi

- En mild påminnelse om å pusse lett og varsomt
- Pasientene får mest mulig ut av børstehodene
- Kobler smarthåndtak med smartbørstehoder
- Philips Sonicares avanserte soniske teknologi

Optimaliser tannpussen


- Clean- og Gum Plus-modus

Designet rundt pasienten

- Bli vant til den nye tannbørsten din
- Oppmuntrer deg til å børste grundig

Høydepunkter

Fjerner opptil 10 ganger mer plakk*

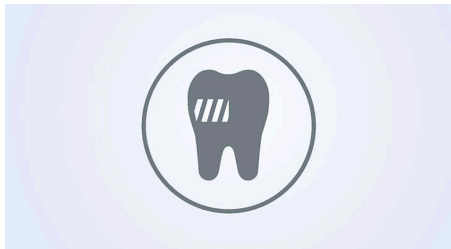


G3 Premium Plaque-børstehodet gir deg den grundigste tannpussen noensinne. De myke, fleksible sidene gjør at børstehårene kan tilpasse seg formen til alle tannoverflater. Du får opptil fire ganger så stor kontaktflate** og opptil ti ganger så mye plakkfjerning i områder som er vanskelige å nå*.

Trykker du for hardt?



Det er ikke alltid pasientene merker at de pusser for hardt, men tannbørsten gjør det. Hvis pasientene trykker for hardt mot tannkjøttet, lager tannbørsten en pulserende lyd. Dette er en påminnelse om å pusse mer skånsomt.

Clean- og Gum Care-modus

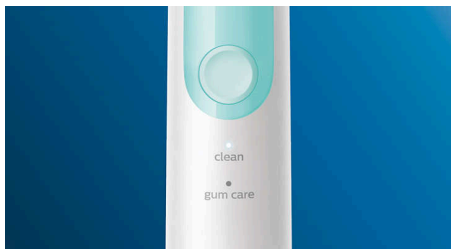

Uansett om du vil fokusere på å fjerne plakk eller på å få tannkjøttet sunt og holde det på den måten, har denne børsten en modus for deg:

Clean-modus gir overlegen rengjøring, mens Gum Care-modusen gir et ekstra minutt med pussing på redusert effekt, slik at du kan skånsomt masserer tannkjøttet.

BrushSync-teknologi



Teknologi med mikrobrikke registrerer og synkroniserer smartbørstehodet med smarthåndtaket. Smarthåndtaket og smartbørstehodet fungerer godt sammen og gir deg smart byttepåminnelse.

Smart byttepåminnelse




Alle børstehodene slites ut over tid. Men vi passer på dette også: Vår smarte børstegjenkjenningsteknologi sporer hvor lenge pasientene har brukt børstehodet, og hvor hardt de har pusset. Når det er på tide å bytte det, får de beskjed av et lys på håndtaket. Dermed kan de være sikre på at børstehodet alltid gjør en fantastisk jobb.

Easy-start-program



Det kan ta tid å bli vant med noe nytt. Med Easy-start-programmet vårt kan du derfor øke børstekraften gradvis og forsiktig de første fjorten gangene du bruker den nye tannbørsten.

Nyttige tidtakere

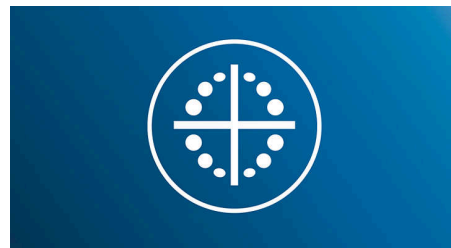

QuadPacer varsler pasientene når de har brukt god nok tid på hver del av munnen, og Smartimer varsler dem når de har pusset tennene i to minutter, som er den anbefalte pussetiden.

Philips Sonicare-teknologi



Philips Sonicares avanserte soniske teknologi pulserer vann mellom tennene, mens børsten bryter opp plakk og børster den bort for å gi deg en svært god daglig tannpuss.

ProtectiveClean 4700

Sonic elektrisk tannbørste

HX6483/52

Spesifikasjoner

Drift

Spenning: 110–220 V

Tekniske spesifikasjoner

Driftstid (full til tom): Opptil to uker

Batteri: Oppladbar

Batteritype: Litium-ION

Utforming og utseende

Farge: Hvit mynte

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

Brukervennlighet

Håndtakets kompatibilitet: Børstehoder som klikkes enkelt på plass

Batteriindikator: Lyset viser batteristatusen

Håndtak: Slank, ergonomisk form

Børstetid: Opptil to uker

Deler som medfølger

Børstehoder: 1 C3 Premium Plaque Control, 1 G3 Premium Gum Care, 1 W2c Optimal White, kompakt

Håndtak: 1 ProtectiveClean

Lader: 1

Reiseetui: Hardt reiseetui

Rengjøring

Ytelse: Fjerner opptil 10 ganger mer plakk*

Hastighet: Opptil 62 000 børstebevegelser/min

Helsefordeler: Bidrar til å redusere hull

Tidsbryter: Quadpacer og SmarTimer

Tilbakemelding om pussetrykk: Vibrering i håndtaket for å varsle brukeren

Moduser

Clean: For enestående hverdagsrengjøring

Gum Care: Masserer tannkjøttet forsiktig

Teknologi med Smart-sensor

Byttepåminnelse med BrushSync: Få alltid beskjed når du bør, bytte børstehode

Trykksensor: Sier ifra når du børster for hardt

