

# PHILIPS

## sonicare



Genopladelig sonisk  
tandbørste

7100

Op til 20 gange bedre  
bekæmpelse af plak

4 indstillinger, 3 intensiteter

Synlig trykalarm

Philips Sonicare-app



HX7428/02

## Perfekt rensning med op til 7 x sundere tandkød\*\*

Op til 20 gange bedre bekæmpelse af plak\*

Philips Sonicare 7100 er udstyret med næste generation af Sonicare-teknologi, 4 børstetilstande, 3 intensitetsniveauer, en synlig trykalarm og vores G3 Premium Gum Care-børstehoved.

### Førsteklasses, skånsom rensning

- Ét børstehoved til komplet pleje

### Ubesværet børstning

- Beskyt tandkødet med den synlige tryksensor
- Tag patienternes rutine til det næste niveau med Philips Sonicare-appen
- Vær altid orienteret om, hvornår det er tid til at udskifte børstehovedet
- Tilpas din rensning med 12 børsteindstillinger

### Optimal rensning

- Den nyeste generation af Sonicare-teknologien

### Tilpasset din livsstil

- Gør det nemt at rejse med vores kompakte, ultra-holdbare rejsetaske
- Lasersvejset for styrke og holdbarhed
- Optimér børstningen med SmarTimer og BrushPacer
- Op til 3 ugers børstning med én fuld opladning

# Vigtigste nyheder

## A3 All-in-One-børstehoved + mere



A3 Premium All-in-One-børstehovedet er designet med patienter i tankerne. Med A3-børstehovedet kan patienterne få fjernet op til 20 gange mere plak\*, opnå op til 15 gange sundere tandkød\*\* og fjerne op til 100 % flere pletter\*\*\*. Også inkluderet: S2 Sensitive-børstehoved, som er vores mest skånsomme og blødes og klinisk bevist til at give en skånsom rengøring, der fjerner 10 gange mere plak i svært tilgængelige områder\* G3 Premium Gum Care-børstehovedet giver op til 7 gange sundere tandkød på kun 2 uger\*\*\*\*.

## Nyeste generation af Sonicare-teknologien



Nyd en dejlig børsteoplevelse og et nyt niveau af mundpleje med den nyeste generation af Sonicare-teknologien. Mens du børster, justerer tandbørstens innovative magnetiske system børstekraften under hver rengøring, hvilket giver optimal ydeevne med 62.000 børstebevægelser i minuttet, selv i svært tilgængelige områder.

Samtidig hjælper dynamisk væsketilførsel børstehårene med at fjerne plak, så du opnår en komplet rengøring, hver gang du børster.

## 12 børsteindstillinger



Patienters foretrukne børstning ligger i deres hænder med Philips Sonicare 7100. Fire børsteindstillinger hjælper med at tage sig af tandkødet sundhed, blegning, følsomhed og daglig rengøring. Gumm Health-tilstanden opretholder et sundt tandkød ved skånsomt at massere langs tandkødslinjen. White-tilstanden fjerner overfladepletter og polerer tænderne for et hvidere smil. Sensitiv-tilstand giver skånsom, grundig rengøring, mens Clean-tilstand fokuserer på fjernelse af plak for at opnå en overlegen rengøring. For en tilpasset rengøring kan patienter kombinere enhver tilstand med et af tre intensitetsniveauer, fra høj til lav, for en børstning, der er helt perfekt.


## Tryksensor med lysring



Patienter lægger måske ikke selv mærke til, når du børster for hårdt, men det gør denne tandbørste. Den smarte optiske sensor


registrerer præcist for stort børstetryk og blinker derefter lilla, mens vibrationerne reduceres. Patienter vil til enhver tid vide, hvornår de skal justere børstningen, og tandkødet forbliver beskyttet.

## Philips Sonicare-app

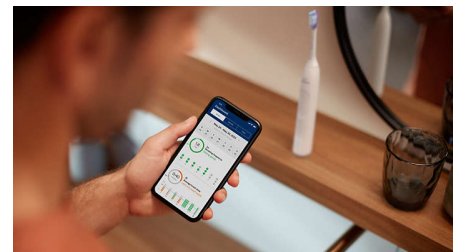

Philips Sonicare-appen kan parres problemfrit med tandbørsten og hjælper patienter med at forbedre og opretholde deres mundhygiejne. Vores app holder styr på børsteudviklingen og giver personlig vejledning og statusrapporter, så patienter kan få værdifuld indsigt i deres børstning.

## 2-minutters timer og børste-pacer

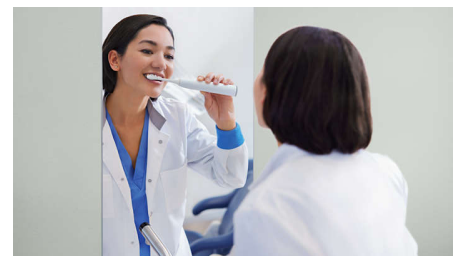

To minutter er alt, hvad patienterne behøver for en optimal rengøring, så vores SmarTimer fortæller patienterne, hvornår tiden er gået. For at opnå en jævn rengøring af hele munden opdeler BrushPacer børstebehandlinger i segmenter, hvor en lille pause i vibrationen er et tegn til at gå videre. Dette hjælper patienterne med at opnå en jævn rengøring, hver gang de børster.


# Vigtigste nyheder

## Påmindelse om at udskifte BrushSync



Regelmæssig udskiftning af børstehovedet er en vigtig del af opretholdelsen af en god mundhygiejne. Med BrushSync-teknologien er det nemt at opretholde børstehovedets præstation. Ved at spore brugsfrekvensen og børsteintensiteten orienterer den innovative teknologi om, når det er tid til et nyt børstehoved.

## Skabt til at vare

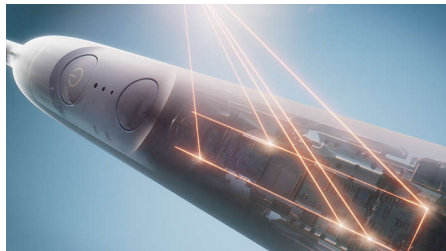

Vi har optimeret vores Philips Sonicare-tandbørster indefra og ud til at være stærke, lette og langtidsholdbare. Takket være vores avancerede lasersvejsningsproces er vores tandbørster designet til at børste med patienter i mange år fremover.

## Op til 3 uger mellem opladninger



Denne tandbørste bruger et højtydende batteri, der er udviklet til at forbedre patientens børsteoplevelse. Med en enkelt opladning kan

patienter få glæde af op til tre ugers regelmæssig børstning, før de skal genoplade den.

## Kompakt rejseetui



Vores optimerede rejsetaske er kompakt nok til at passe ned i tasken og stærkt nok til at holde din Philips Sonicare-tandbørste beskyttet undervejs. Den beskytter ikke kun tandbørsten, men har også plads til to børstehoveder. Nu kan patienter rejse trygt, uanset hvor deres rejse fører dem hen.

# Specifikationer

## Intensiteter

**Høj:** For at øge din rensning

**Mellem:** Til daglig rensning

**Lav:** Til følsomme tænder og følsomt tandkød

## Produktopdatering

**Supportperiode:** Philips leverer de nødvendige sikkerhedsopdateringer frem til den 31. december 2026.

## Strøm

**Spænding:** 100-240 V

## Tekniske specifikationer

**Brugstid (fuldt opladet til tom):** 21 dage

**Batteri:** Genopladelig

**Batteritype:** Litiumion

**Energiforbrug:** Standby-tilstand uden skærm  
<0,5 W

## Design og finish

**Farve:** Hvid

## Service

**Garanti:** 2 års begrænset garanti

## Kompatibilitet

**Trådløs Bluetooth-teknologi:** App Forbundet tandbørstning

**Android-kompatibilitet:** Android-telefoner med Bluetooth 4.0 og nyere

**iOS-kompatibilitet:** iPhone med Bluetooth 4.0 og nyere

## Brugervenlig

**Håndgreb:** Slankt, ergonomisk design

**Batteriindikator:** Illumineret ikon indikerer batterilevetid

**Håndtagskompatibilitet:** Børstehoveder, der nemt klikkes på

**Timer:** SmarTimer og BrushPacer til komplet og grundig børstning

**USB-A-opladning:** Strømadapter medfølger ikke

## Medfølgende dele

**Håndgreb:** 1 7100 genopladelig tandbørste

**Børstehoved:** 1 A3 Premium All-in-One, 1 S2 Sensitive, 1 G3 Premium Gum Care

**Rejseetui:** 1 slankt rejseetui

**Oplader:** 1

**USB-C-kabel:** 1

## Rensydelse

**Fjernelse af plak:** Op til 20 gange mere effektiv\*

**Gum Health:** Op til 15 gange sundere tandkød\*\*\*

**Blegning:** Op til 100 % færre misfarvninger\*\*

**Hastighed:** 62.000 børstebevægelser i minuttet

## Indstillinger

**Clean:** Giver en uovertruffen rensning hver dag

**Hvid:** Fjerner misfarvninger på tænderne

**Gum Health:** Masserer forsigtigt dit tandkød

**Sensitive:** Til følsomme tænder og følsomt tandkød

## Smart sensorteknologi

**Trykfeedback:** Lysringen lyser lilla, Reduceret vibration og pulserende lyd

**Udskiftningspåmindelse:** BrushSync fortæller dig, hvornår du skal udskifte børstehovedet



\* sammenlignet med en manuel tandbørste.

\*\* i Clean-tilstand sammenlignet med en manuel tandbørste.

\*\*\* sammenlignet med en manuel tandbørste. I en in-vitro undersøgelse kan de faktiske resultater variere.

\*\*\*\* i Gum Care-tilstand sammenlignet med en manuel tandbørste, målt af GBI.