

PHILIPS

sonicare



Sonic elektrisk
tannbørste

ProtectiveClean 4500

Innebygd trykksensor
To rengjøringsmoduser
1x BrushSync-funksjon



HX6836

Hvitere tenner. På en skånsom måte.

Gir hvitere tenner på bare én uke.

Føl forskjellen fra en skånsom tannpuss med trykksensor som gir deg hvitere tenner på én uke.

Bevist at den forbedrer munnhygien

- Sikker og skånsom på sensitive områder, tannarbeid og ortodontiske implantater
- Hvitere tenner på bare én uke

Designed around you

- Oppmuntrer deg til å børste grundig

Nyskapende teknologi


- Sier fra når du trykker for hardt
- Få alltid beskjed når det er på tide å bytte børstehode
- Philips Sonicares avanserte soniske teknologi
- Kobler smarthåndtak med smartbørstehoder

Optimaliser tannpussen

- Clean- og White-modus

Høydepunkter

Naturlig hvitere tenner

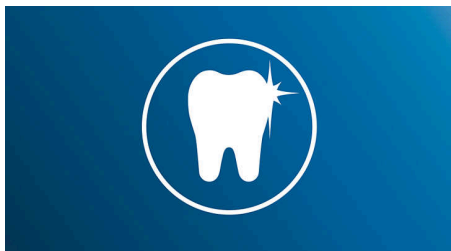

Klikk på W DiamondClean-børstehodet for å fjerne misfarging og få et hvitere smil. Det er klinisk bevist at de tettpakkede, sentralt plasserte børstehårene for flekkfjerning gjør tennene hvitere på bare én uke.

Clean- og White-modus



Uansett om du ønsker å fjerne plakk eller pusse tennene ekstra godt, kan vi hjelpe deg: Clean-modusen gir enestående rengjøring, og White fjerner misfarging på tennene.

Sikker og skånsom



Vær trygg på at du får en sikker pusseopplevelse: Den soniske teknologien vår gjør at den kan brukes på tannreguleringer, fyllinger, kroner og skallfasetter. Den forhindrer også hull og gir sunnere tannkjøtt.

Overvåker børstetrykket



Hvis du pusser for hardt, kan det skade tennene og tannkjøttet. For å forhindre dette avgir Philips Sonicare ProtectiveClean en svak pulserende lyd som minner deg om å lette trykket.

BrushSync-teknologi



Teknologi med mikrobrikke registrerer og synkroniserer smartbørstehodet med smarthåndtaket. Smarthåndtaket og smartbørstehodet fungerer godt sammen og gir deg smart byttepåminnelse.


Byttepåminnelse med BrushSync



Alle børstehoder slites ut over tid. Men BrushSync-teknologien vet nøyaktig hvor lenge du har brukt børstehodet, og hvor hardt du har pusset. Når det er på tide å bytte børstehode,

kommer det et lite lys på håndtaket, og du hører en kort pipelyd. Dermed kan du være trygg på at børstehodet gjør en god jobb.

Nyttige tidtakere

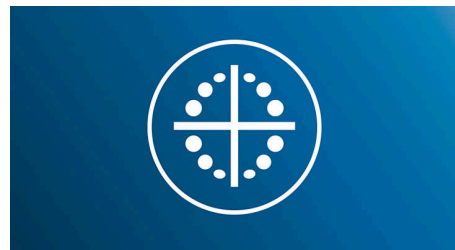

Trenger du en elektrisk tannbørste med tidtaker? QuadPacer varsler deg når du har brukt god nok tid på hver del i munnen, og Smartimer varsler deg når du har pusset tennene i to minutter, som er den anbefalte pussetiden.

Philips Sonicare-teknologi



Philips Sonicares avanserte soniske teknologi pulserer vann mellom tennene, mens børsten bryter opp plakk og børster den bort for å gi deg en svært god daglig tannpuss.

Spesifikasjoner

Drift

Spenning: 110–220 V

Tekniske spesifikasjoner

Driftstid (full til tom): 14 dager**

Batteri: Oppladbar

Batteritype: Litium-ION

Utforming og utseende

Farge: Pastellrosa

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

Brukervennlighet

Batteriindikator: Lyset viser batteristatusen

Håndtakets kompatibilitet: Børstehoder som klikkes enkelt på plass

Håndtak: Slank, ergonomisk form

Gjenkjenning av børstehode: Synkroniserer med optimal modus

Byttepåminnelse: Sikrer alltid best mulige resultater, påminnelsesikonet lyser opp

Deler som medfølger

Børstehoder: 1 W2 Optimal White

Håndtak: 1 ProtectiveClean

Lader: 1

Rengjøring

Hastighet: Opptil 62 000 børstebevegelser/min

Helsefordeler: Bidrar til å redusere hull

Hvitere tenner: Gir hvitere tenner på én uke

Tidsbryter: Quadpacer og SmarTimer

Tilbakemelding om pussetrykk: Vibrering i håndtaket for å varsle brukeren

Moduser

Clean: For enestående hverdagsrengjøring

Hvit: Fjerner misfarging

Teknologi med Smart-sensor

Byttepåminnelse med BrushSync: Få alltid beskjed når du bør, bytte børstehode

Trykksensor: Sier ifra når du børster for hardt

