

PHILIPS



Sonisk elektrisk
tandbørste med app

ExpertClean 7300

Nem tilsluttet tandbørstning

Indbygget tryksensor

Smart børstehovedsgenkendelse

3 indstillinger, 3 intensiteter



HX9601

Alt, hvad du har brug for til en god mundhygiejne

Op til 7 gange sundere tandkød*

Det er svært at opretholde gode børstevaner. ExpertClean hjælper dig mellem tandlægebesøgene. Få at vide, hvornår du skal justere dit tryk ved hjælp af de indbyggede intelligente sensorer, og brug appens statusrapport til at hjælpe dig med at få gode børstevaner.

Enjoy a stylish and user-friendly design

- Nem at oplade og helt igennem stilfuld
- Gør det nemmere for dig at rejse

ExpertClean users experience improved oral health

- Effektiv mod plak, skånsom mod tandkødet
- Renser grundigt og beskytter samtidig dit følsomme tandkød
- Fjerner op til 10 gange mere plak* og giver en dybderens
- Op til 7 gange sundere tandkød* på blot 2 uger

Let ExpertClean adapt to your needs


- Personlig børsteoplevelse
- Giver dig besked, hvis du trykker for hårdt med børsten
- Hav altid styr på, hvornår dine børstehoveder skal udskiftes
- BrushSync vælger automatisk den bedste tilstand for dig

Stay on track with personalized guidance

- Vejledning til at komme i gang og holde fast i de sunde vaner


Vigtigste nyheder

Op til 7 gange sundere tandkød*

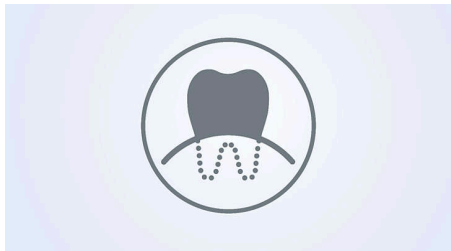


Fokuser på at forbedre tandkødets sundhed med G3 Premium Gum Care-børstehovedet. Den kompakte størrelse og børstehår målrettet tandkødslinjen gør det til den perfekte måde at holde dette område fri for tandkødslidelser. Personer, der bruger dette børstehovedet har op til 100 % mindre tandkødsbetændelse* og får op til 7x sundere tandkød på blot to uger.*

Fjerner op til 10 gange mere plak*

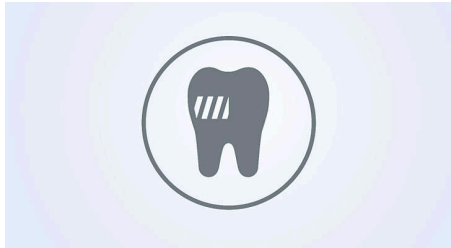

Du kan være sikker på, at du får den dybest mulige rensning med C3 Premium Plaque Defence-børstehovedet. De bløde, fleksible børstehår er designet til at bøje rundt om tændernes konturer, hvilket giver 4x større overfladekontakt** og fjerner op til 10x mere plak fra svært tilgængelige steder.

Statusrapport

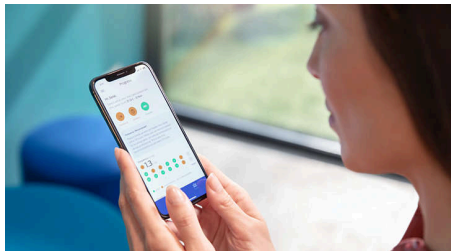

ExpertClean giver dig den vejledning, du har brug for til at forbedre og fastholde sunde børstevaner mellem dine tandlægebesøg. Indbyggede, smarte sensorer giver dig besked, når du trykker for hårdt med børsten, og ved at slutte din børsteoplevelse til Sonicare-appen

hjælper en personlig statusrapport dig med at holde dig på rette spor, så du kan følge med i, hvor meget du har forbedret dig over tid.

3 indstillinger, 3 intensiteter




ExpertClean leveres med indstillingerne Clean, Gum Health og Deep Clean+, så du kan opnå den korrekte tandbørstning. Clean-indstillingen er til effektiv daglig rensning, Gum Health giver en nænsom, men effektiv rensning af tandkødet, og Deep Clean+ giver dig en forfriskende, grundig rensning. Tre intensiteter giver dig mulighed for at vælge mellem en højere indstilling for at give din rensning et boost og en lavere indstilling til mere følsomme munde.

Smart børstehovedsgenkendelse



Smarte børstehoveder sikrer, at du bruger den rigtige tilstand og intensitet, så du får den bedst mulige rensning. Hvis du f.eks. bruger G3 Premium Gum Care-børstehovedet, synkroniserer ExpertCleans BrushSync-teknologi automatisk dit børstehoved med Gum Health-tilstanden, så dit tandkød er sundt.

Indbygget tryksensor

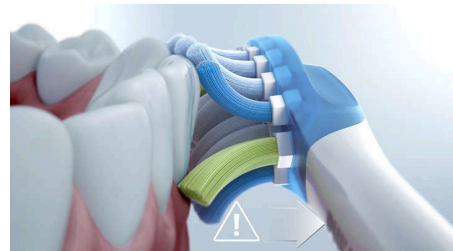

Du bemærker måske ikke, hvis du børster for hårdt, men din ExpertClean gør. Hvis du børster for hårdt, udsender denne intelligente tandbørste en pulserende lyd. Dette er en påmindelse om at lade dit børstehoved gøre arbejdet. 7 ud af 10 personer syntes, at denne funktion har hjulpet dem med at blive bedre til at børste deres tænder.

Påmindelse om at udskifte BrushSync



Alle børstehoveder slides med tiden, så du skal holde øje med dem for at sikre, at du stadig får en effektiv rensning. Vores BrushSync-teknologi registrerer, hvor længe du har brugt børstehovedet, og hvor hårdt du har børstet. BrushSync-påmindelsesfunktionen på håndtaget og kort bip giver dig besked, når det er tid til at udskifte det.

C3 Premium Plaque Defence



C3 Premium Plaque Defence-børstehovedet er designet til at give dig den dybeste rensning nogensinde. Bløde, fleksible sider og børstehår bøjer sig perfekt om dine tænderes konturer, giver 4x større overfladekontakt og hjælper dig med at nå ind til svært tilgængelige steder*.

ExpertClean 7300

Sonisk elektrisk tandbørste med app

HX9601/02

Vigtigste nyheder

G3 Premium Gum Care-børstehoved



G3 Premium Gum Care-børstehovedet er designet til at hjælpe dig med at forbedre tandkødets sundhed. Den kompakte størrelse og børstehår målrettet tandkødsranden renser blidt og effektivt tandkødsranden, hvor tandkødslidelser som regel starter.

Langtidsholdbart batteri



Din ExpertClean holder i op til to uger på en enkelt opladning ved regelmæssig brug.

Gør det nemmere for dig at rejse



Med det eksklusive rejseetui kan du opbevare din tandbørste hygiejnisk, mens vores kompakte USB-rejseoplader sørger for, at du har strøm, når du er på farten. Der er nok til to ugers regelmæssig brug fra en enkelt fuld opladning, så selvom du er på farten, kan du stadig få den gode, friske fornemmelse.

Specifikationer

Produktopdatering

Supportperiode: Philips leverer de nødvendige sikkerhedsopdateringer frem til den 31. december 2026.

Tilslutningsmuligheder

Trådløs Bluetooth®-teknologi: App Forbundet tandbørstning

Strøm

Spænding: 110-220 V

Tekniske specifikationer

Brugstid (fuldt opladet til tom): 14 dage***

Batteri: Genopladelig

Batteritype: Litiumion

Energiforbrug: Standby-tilstand uden skærm <0,5 W

Design og finish

Farve: Sort

Service

Garanti: 2 års begrænset garanti

Kompatibilitet

Android-kompatibilitet: Android-telefoner, Bluetooth 4.0-aktiverede tablets

iOS-kompatibilitet: iPad 3. generation eller nyere, iPhone 4S eller nyere, med iOS7 eller højere, med iOS7-operativsystem

Brugervenlig

Håndgreb: Slankt, ergonomisk design

Håndtagskompatibilitet: Børstehoveder, der nemt klikkes på

Udskiftningspåmindelse: Sørger altid for de bedste resultater, Påmindelsesikonet tændes

Medfølgende dele

Håndgreb: 1 ExpertClean

Børstehoveder: 1 C3 Premium Plaque Defence, 1 G3 Premium Gum Care

Rejseetui: 1

Oplader: 1

Rensecydelse

Performance: Fjerner op til 10 gange mere plak*

Sundhedsmæssige fordele: Op til 7 gange sundere tandkød*

Timer: BrushPacer og SmarTimer

Trykfeedback: Håndtaget vibrerer for at alarmere brugeren

Indstillinger

3 intensiteter: Lav, Mellem, Høj

Clean: Giver en uovertruffen rensning hver dag

Deep Clean+: Giver en forfriskende dybderens

Gum Health: Særlig opmærksomhed omkring kindtænderne

Parring af BrushSync-indstilling

G3 Premium Gum Care-børstehoved: Kan parres med Gum Health-funktion

C3 Premium Plaque Defence: Kan parres med Clean-funktion

Smart sensorteknologi

Tryksensor: Udsender en alarm, hvis du trykker for hårdt med børsten

Påmindelse om at udskifte BrushSync: Hav altid styr på, hvornår, børstehoveder skal udskiftes

BrushSync-teknologi: Opretter forbindelse mellem smart håndtag og, smart børstehoved

Softwaresupport

Softwareopdateringer: Philips tilbyder relevante softwareopdateringer i en periode på 2 år efter købsdatoen.

