

# PHILIPS

## sonicare



Genopladelig sonisk  
tandbørste

7100

Op til 10 gange bedre  
bekæmpelse af plak

4 indstillinger, 3 intensiteter

Synlig trykalarm

Philips Sonicare-app



HX7429/03

## Perfekt rensning med op til 7 x sundere tandkød\*

Op til 10 gange bedre bekæmpelse af plak\*\*

Philips Sonicare 7100 er udstyret med næste generation af Sonicare-teknologi, 4 børstetilstande, 3 intensitetsniveauer, en synlig trykalarm og vores G3 Premium Gum Care-børstehoved.

### Førsteklasses, skånsom rensning

- Op til 7 gange sundere tandkød på blot 2 uger\*

### Ubesværet børstning

- Tilpas din rensning med 12 børsteindstillinger
- Vær altid orienteret om, hvornår det er tid til at udskifte børstehovedet
- Gør din rutine endnu bedre med Philips Sonicare-appen
- Beskyt dit tandkød med den synlige trykalarm

### Optimal rensning

- Den nyeste generation af Sonicare-teknologien

### Tilpasset din livsstil

- Optimér din børstning med SmarTimer og BrushPacer
- Rejs ubesværet med vores førsteklasses rejsetaske til opladning
- Op til 3 ugers børstning med én fuld opladning
- Lasersvejet for styrke og holdbarhed


# Vigtigste nyheder

## G3 Premium Gum Care-børstehoved



Philips Sonicare 7100 hjælper dig med at opnå sundere tandkød for et sundere smil. Med G3 Premium Gum Care-børstehovedet arbejder børsterne hårdt for at fjerne plak langs tandkødslinjen og giver dig op til 7 gange sundere tandkød på kun 2 uger\*. Takket være børstehovedets bløde, fleksible design tilpasser det sig konturerne af dine tænder og tandkød for en dyb rensning, mens det fjerner op til 10 gange mere plak sammenlignet med en manuel tandbørste\*\*.

## Nyeste generation af Sonicare-teknologien

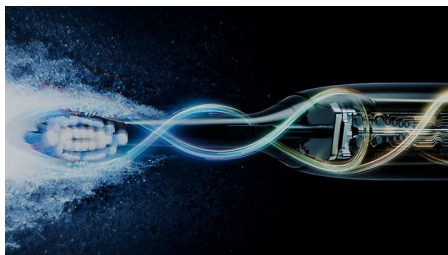


Nyd en dejlig børsteoplevelse og et nyt niveau af mundpleje med den nyeste generation af Sonicare-teknologien. Mens du børster, justerer tandbørstens innovative magnetiske system børstekraften under hver rensning, hvilket giver optimal ydeevne med præcis 62.000 børstebevægelser i minuttet, selv i svært tilgængelige områder. Samtidig understøtter dynamisk væskehandling børstehovedets renseevne ved forsigtigt at skylle langs tandkødslinjen og mellem hver tand, hvilket hjælper dig med at opnå en komplet rensning, hver gang du børster.

## 12 børsteindstillinger




Din foretrukne børstning ligger i dine hænder med Philips Sonicare 7100. 4 børsteindstillinger hjælper dig med at varetage tandkødets sundhed, blegning, følsomhed og daglig rensning. Gum Health-tilstanden understøtter sundt tandkød ved forsigtigt at massere langs tandkødet. Blegnings-tilstanden fjerner overfladepletter og polerer tænderne for et hvidere smil. Sensitiv-tilstand giver blid, grundig rensning, mens Clean-tilstand fokuserer på fjernelse af plak for at opnå en overlegen rensning. For en personlig rensning kan du kombinere enhver tilstand med et af 3 intensitetsniveauer, fra høj til lav, for en børstning, der passer til dig.

## Trykalarm med lysring

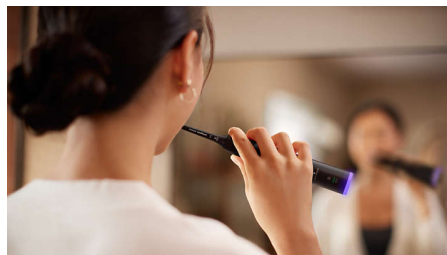

Du lægger måske ikke selv mærke til, når du børster for hårdt, men det gør denne tandbørste. Den smarte optiske sensor registrerer præcist for stort børstetryk og blinker derefter lilla, mens vibrationerne reduceres. Du ved altid, hvornår du skal justere børstningen, og tandkødet forbliver beskyttet.

## Philips Sonicare-app

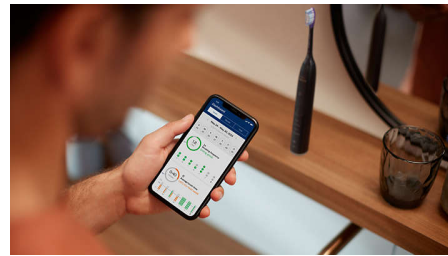

Philips Sonicare-appen parres problemfrit med din tandbørste og hjælper dig med at forbedre og opretholde din mundhygiejne. Vores app holder styr på dine børstefremskridt og giver personlig vejledning og statusrapporter, så du kan få værdifuld indsigt i din børstning.

## 2-minutters timer og børste-pacer



To minutter er alt, hvad du behøver for en komplet rensning, så vores SmarTimer fortæller dig, hvornår tiden er gået. For at opnå en jævn rensning af hele din mund opdeler BrushPacer din session i segmenter, hvor en lille pause i vibrationen er dit tegn på at gå videre. Dette hjælper dig med at opnå en jævn rensning, hver gang du børster.

## Påmindelse om at udskifte BrushSync



Regelmæssig udskiftning af børstehovedet er en vigtig del af opretholdelsen af en god mundhygiejne. Med BrushSync-teknologien er det nemt at opretholde børstehovedets præstation. Ved at spore din brugsfrekvens og børsteintensitet minder den innovative teknologi dig om, når det er tid til et nyt børstehoved.

# Vigtigste nyheder

## Skabt til at vare



Vi har optimeret vores Philips Sonicare-tandbørster indefra og ud til at være stærke, lette og langtidsholdbare. Takket være vores avancerede lasersvejsningsproces er vores tandbørster designet til at børste med dig i mange år fremover.

## Op til 3 uger mellem opladninger



Denne tandbørste bruger et højtydende batteri, der er udviklet til at forbedre din børsteoplevelse. Med en enkelt opladning kan du nyde op til tre ugers regelmæssig børstning, før du skal genoplade den.

## Rejseetui til opladning



Vores optimerede rejsetaske til opladning med integreret USB-C-port og opladningskabel gør det muligt at genoplade din tandbørste på farten uden at skulle åbne æsken. Ikke alene er den stærk nok til at holde din tandbørste beskyttet undervejs, men den er også kompakt nok til at passe ned i enhver taske, hvilket gør den til den perfekte rejse ledsager.

# Specifikationer

## Intensiteter

**Høj:** For at øge din rensning

**Mellem:** Til daglig rensning

**Lav:** Til følsomme tænder og følsomt tandkød

## Smart sensorteknologi

**Udskiftningspåmindelse:** BrushSync fortæller dig, hvornår du skal udskifte børstehovedet

## Smart sensorteknologi

**Trykfeedback:** Lysringen lyser lilla, Reduceret vibration og pulserende lyd

## Kompatibilitet

**Trådløs Bluetooth-teknologi:** App Forbundet tandbørstning

## Produktopdatering

**Supportperiode:** Philips leverer de nødvendige sikkerhedsopdateringer frem til den 31. december 2026.

## Strøm

**Spænding:** 100 - 240 V

## Tekniske specifikationer

**Brugstid (fuldt opladet til tom):** 21 dage

**Batteri:** Genopladelig

**Batteritype:** Litiumion

## Design og finish

**Farve:** Sort

## Service

**Garanti:** 2 års begrænset garanti

## Kompatibilitet

**Android-kompatibilitet:** Android-telefoner med Bluetooth 4.0 og nyere

**iOS-kompatibilitet:** iPhone med Bluetooth 4.0 og nyere

## Brugervenlig

**Håndgreb:** Slankt, ergonomisk design

**Batteriindikator:** Illumineret ikon indikerer batterilevetid

**Håndtagskompatibilitet:** Børstehoveder, der nemt klikkes på

**Timer:** SmarTimer og BrushPacer giver en komplet og grundig børstning

**USB-A-opladning:** Strømadapter medfølger ikke

## Medfølgende dele

**Rejseetui:** 2 rejsetasker til opladning

**Oplader:** 2

**Håndgreb:** 2 7100 genopladelig tandbørste

**Børstehoved:** 1 G3 Premium Gum Care, 1 C3 Premium Plaque Defence

## Renseydelse

**Fjernelse af plak:** Op til 10 gange mere effektiv\*\*

**Hastighed:** 62.000 børstebevægelser i minuttet

**Gum Health:** Op til 7 gange sundere tandkød\*

## Indstillinger

**Clean:** Giver en uovertruffen rensning hver dag

**Hvid:** Fjerner misfarvninger på tænderne

**Gum Health:** Masserer forsigtigt dit tandkød

**Sensitive:** Til følsomme tænder og følsomt tandkød

