

PHILIPS

sonicare



Sonisk eltandborste

ProtectiveClean 4700

Inbyggd trycksensor

Två rengöringslägen

1 st BrushSync-funktion



HX6483

Renare tänder. Fint ska det vara.

Tar bort upp till tio gånger mer plack än en manuell tandborste

Känn skillnaden med en skonsam rengöring med vår trycksensor samtidigt som du tar bort upp till tio gånger mer plack än med en manuell tandborste

Ger bevisat bättre munhälsa

- Större ytkontakt för att ta bort plack

Innovativ teknik

- En liten påminnelse om att ta det lugnt och försiktigt
- Patienter får ut mesta möjliga från sina borsthuvuden
- Ansluter det smarta borsthandtaget och smarta borsthuvuden
- Philips Sonicares avancerade soniska teknik

Få bästa möjliga resultat med tandborstningen


- Clean- och Gum Care-läge

Utformad runt din patient

- Ett bra sätt att vänja sig vid din nya tandborste
- Uppmuntran att borsta noggrant

Funktioner

Tar bort upp till 10 gånger mer plack*

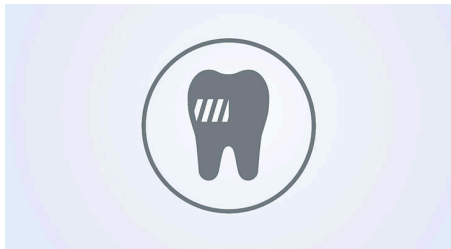

C3 Premium Plaque Control-borsthuvudet levererar vår djupaste rengöring. Med mjuka, flexibla sidor formar sig borststråna efter varje tandyta för att ge fyra gånger mer ytkontakt** och tar bort upp till tio gånger mer plack på svåråtkomliga ställen*.

Borstar du för hårt?



Patienter kanske inte märker om de borstar för hårt, men deras tandborste gör det. Om patienter börjar trycka hårt mot tandköttet avger tandborsten ett pulserande ljud som en påminnelse om att lätta på trycket.

Clean- och Gum Care-läge



Oavsett om du vill fokusera på att ta bort plack eller få ett friskt tandkött och hålla det friskt, så har den här borsten ett läge för dig: Clean-läget ger en överlägsen rengöring, medan Gum Care-

läget ger en extra minut av borstning med reducerad effekt, så att du kan massera tandköttet försiktigt.

BrushSync-teknik



En mikrochip-aktiverad teknik som känner av och synkroniserar det smarta borsthuvudet med det smarta handtaget. Det smarta handtaget och smarta borsthuvudet är en kraftfull kombination som aktiverar påminnelse av smart borsthuvud.

Smarta påminnelser om byte




Alla borsthuvuden slits ut med tiden. Men vi har tagit hand om det också: Vår smarta borstigenkänningsteknik registrerar hur länge patienter har använt sitt borsthuvud och hur hårt de har borstat. En lampa på handtaget meddelar när det är dags att byta borsthuvud. På så sätt kan de vara säkra på att deras borsthuvud konsekvent gör ett fantastiskt jobb.

Easy-start-program



Det kan ta ett tag att vänja sig vid att börja med något nytt. Det är därför som vårt mjukstartsprogram ger dig möjligheten att gradvis öka borstningseffekten de första 14 gångerna som du använder den nya tandborsten.

Praktiska timers

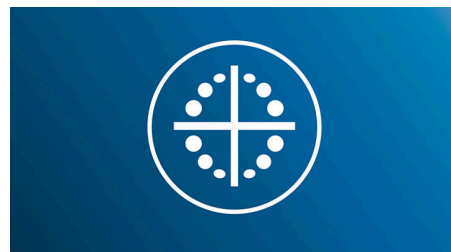

QuadPacer informerar patienter när de har ägnat precis rätt mängd tid åt rengöring av alla tänder i munnen medan vår SmarTimer informerar dem när de har borstat i de rekommenderade två minuterna.

Philips Sonicare-teknik



Philips Sonicares avancerade soniska teknik sprutar vatten mellan tänderna, och dess borsttag bryter upp plack och sveper bort den för en mycket effektiv daglig borstning.

Specifikationer

Effekt

Spänning: 110–220 V

Tekniska specifikationer

Drifttid (full till tom): Upp till 2 veckor

batteri: Laddningsbar

Batterityp: Litiumjon

Design och finish

Färg: Vit mint

Service

Garanti: 2 års begränsad garanti

Lättanvänd

Skaftkompatibilitet: Borsthuvud som enkelt knäpps på

Batteriindikator: Lampan visar batteristatusen

Handtag: Tunn, ergonomisk design

Borstningstid: Upp till 2 veckor

Medföljande tillbehör

Handtag: En ProtectiveClean

Laddare: 1

Borsthuvuden: 1 C3 Premium Plaque Control, 1 G3 Premium Gum Care, 1 W2c Optimal White, kompakt

Resefodral: Hårt resefodral

Rengöringsprestanda

Hälsofördelar: Bidrar till att minska risken för hål

Prestanda: Tar bort upp till 10 gånger mer plack*

Hastighet: Upp till 62000 borströrelser/min

Timer: Quadpacer och SmarTimer

Tryckfeedback: Handtag som vibrerar för att varna användaren

Lägen

Rengöra: För överlägsen daglig rengöring

Tandköttsvård: Masserar tandköttet varsamt

Smart-sensorteknologi

Påminnelse om att byta BrushSync: Du vet alltid när det är dags, att byta borsthuvud

Trycksensor: Varnar när du borstar för hårt

