

PHILIPS

AVENT



Dubbelt elektriskt
startset

Hands-free

Efterliknar barnets drickrytm

Frihet vid pumpning

Lätt att använda, rengöra och
sätta ihop

Har en smidig passform



SCD553/11

Fria händer. Mer fritid.

En perfekt passform för 99 % av alla mammor

Förbered dig för familjens nya tillskott med detta startset med dubbel elektrisk bröstpump för handsfree användning. Det innehåller allt du behöver för att pumpa och förvara bröstmjolk samt mata barnet från dag ett, inklusive bröstkupor och insatser, skydd, flaskor och förvaringspåsar.

Övriga fördelar

- Allt du behöver för att förvara, mata med mera

Fysisk frihet medan du pumpar

- Rör dig fritt med de otroligt lätta uppsamlingsbehållarna
- Bärbar komfort för maximal rörelseförmåga

Efterliknar barnets drickrytm

- Pumpa effektivt* med en rytm som efterliknar barnets rytm
- Tyst pumpning med sjukhusstyrka

Lätt att använda, enkel att rengöra och sätta ihop

- Spåra mjölkflödet med de genomskinliga uppsamlingsbehållarna
- Anpassa din pumpning
- Lätt att rengöra och montera med ett fåtal delar

Har en smidig passform

- Det kompletta storlekssortimentet av bröstskydd och inlägg

Funktioner

Efterliknar barnets drickrytm



Barn vet bäst när det gäller hur de dricker! Därför efterliknar vår elektriska handsfree-bröstpump deras naturliga drickrytm – så du kan hitta din egen rytm för effektiv* pumpning och optimalt mjölkflöde. Philips Avent handsfree-bröstpumpen pumpar upp till 85 gånger per minut och är dubbelt så snabb som de flesta andra pumpar**.

Motor med sjukhusstyrka



Den nästintill ljudlösa motorenheten levererar den sjukhusstyrka du förväntar dig av en traditionell bröstpump, men i en kompakt och bärbar enhet. Med sitt uppladdningsbara batteri pumpar den sladdlösa motorenheten kraftfullt och diskret var som helst.

Unika SkinSense-skydd




Våra unika SkinSense-bröstskydd i silikon är utformade för ultimat komfort och formar sig mjukt runt bröstet med hjälp av kroppens naturliga värme. Bröstskydden är tillverkade av livsmedelsgodkänd silikon för total sinnesro.

Passar 99 % av alla mammor



Vi vill att alla mammor ska må så bra som möjligt, och rätt passform är en viktig del av detta. Detta startset innehåller hela vårt storlekssortiment av bröstskydd och inlägg, vilka passar 99 % av alla mammor för ultimat komfort vid pumpning.

Genomskinlig uppsamling

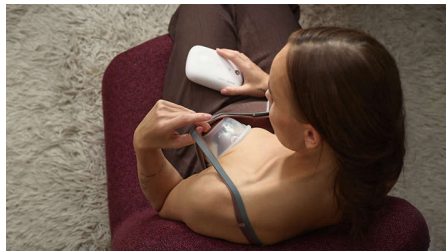

De genomskinliga uppsamlingsbehållarna gör att du kan se inuti dem. De hjälper dig att placera bröstvårtorna rätt för bästa möjliga

mjölkflöde och gör att du kan se bröstmjölakens volym. För säker pumpning från första till sista droppen.

Otroligt lätta uppsamlingsbehållare



Vår uppsamlingsbehållare väger endast drygt 100 gram när den är tom – upp till tre gånger lättare än en helt bärbar bröstpump. Behållaren sitter bekvämt i bh:n och det märks knappt att den är där.


Bär den på ditt sätt



Vår pump levereras med en flätad bärrem och klädklämma så att du kan bära motorenheten på kroppen eller fäst i linningen. Tack vare att du kan bära den på ditt sätt kan du behålla samma mjölkflöde samtidigt som du vet att du enkelt kan göra ändringar om det behövs. Använd slangkopplingen och remjusteraren för att finjustera passformen.

Funktioner

Personligt anpassad pumpning

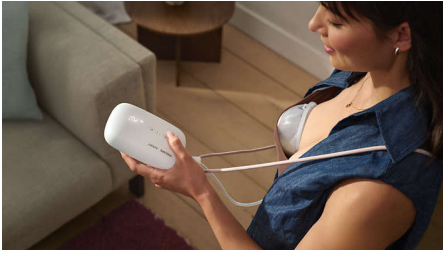

Få ut mesta möjliga av varje pumpstillfälle med 8 sugnivåer för att stimulera mjölkflödet och 16 sugnivåer för att pumpa ut mjölken. Du kan finjustera medan du pumpar, och eftersom din idealiska inställning sparas automatiskt är din pump alltid redo att användas.

Lätt att rengöra och montera



Vi har utformat vår pump och våra tillbehör så att de ska vara så enkla som möjligt. Med endast ett fåtal anslutningsdelar är varje uppsamlingsbehållare lätt att ta isär, rengöra (för hand eller i diskmaskin), desinficera och sätta ihop igen.

Startset



Upplev bekvämlighet och flexibilitet med startsetets matnings- och förvaringsprodukter, som är utformade för att smidigt passa in i dina rutiner. För extra komfort innehåller setet även fem par bröstinlägg.

Specifikationer

Effekt

Källa: Uppladdningsbart batteri/USB-C (adapter medföljer inte)

Material

Kopp, främre lock, bröstkupsskydd: Polypropylen

Bröstkupa, membran, ventil, insats: Flytande silikon

Silikonslang: Silikon

Vad medföljer?

Ultrabekväma amningskuper för engångsbruk: 10 delar

Påsar för bröstmjölk: 25 delar

USB-C-kabel: 1 st.

Fodral: 1 st

Bärrem: 1 st.

Slangkoppling: 1 st

Laddningsbar motorenhet (med en löstagbar klämma): 1 st.

Uppsamlingskopp (monterad): 2 st.

Silikonslangar: 2 st.

Bröstkupsskydd: 2 st.

125 ml Natural Response-flaska (med flöde 2-napp): 1 st.

Kort för bröstvårtsstorlek: 1 st.

Insats (15, 17, 19 och 26 mm): 2 st. var

Bröstkupa (21 mm, 24 mm, 28 mm): 2 st. var

Lättanvänd

Användning av bröstpumpen: Lätt att använda, enkel att rengöra och sätta ihop

Funktioner

Flexibla rörelser: Handsfree-pumpning

Anpassade inställningar: 16 sugnivåer i pumpläget, 8 sugnivåer i stimuleringsläget

Motorenhet: Uppladdningsbart batteri/USB-C, Det tar upp till 1,5 timme att ladda batteriet helt och det räcker till cirka 5 pumptillfällen

Specifikationer för bröstkupa och insats: Flera storlekar för bästa möjliga passform

