

PHILIPS

AVENT



Tiralatte elettrico
doppio

Hands-free



SCF547/11

A mani libere e più tempo a disposizione per te e il tuo bambino

Imita il ritmo di suzione del bambino

Il tiralatte elettrico doppio a mani libere Philips Avent è progettato per un'estrazione confortevole ed efficace*. Imita il naturale ritmo di suzione del bambino e, grazie alla sua potenza, delicatezza e leggerezza, è il compagno ideale per le tue sessioni di allattamento.

Massima libertà di movimento durante l'estrazione

- Muoviti liberamente grazie ai vasetti conservalatte ultraleggeri
- Comfort e massima libertà di movimento

Imita il ritmo di suzione del bambino

- Estrai il latte in modo efficace* e con un ritmo che imita la suzione del tuo bambino
- Estrazione silenziosa, di qualità ospedaliera

Semplice da utilizzare, pulire e assemblare

- Facile da pulire e montare con poche parti
- Monitora il flusso di latte tramite i vasetti conservalatte completamente trasparenti
- Personalizza le tue sessioni di estrazione

Confortevoli e quasi invisibili

- Una gamma di parapezzoli e inserti in diverse dimensioni, adatti a ogni mamma
- I parapezzoli in silicone si adattano delicatamente al seno

Hands-free

Tiralatte elettrico doppio

SCF547/11

In evidenza

Imita il ritmo di suzione del bambino



I bambini sanno qual è il modo migliore di bere! Ecco perché il nostro tiralatte elettrico a mani libere imita il loro naturale ritmo di suzione, in modo che tu possa trovare il ritmo ideale per un'estrusione del latte efficace* e ottimale. Con un massimo di 85 movimenti al minuto, il tiralatte a mani libere Philips Avent è 2 volte più veloce rispetto ad altri tiralatte**.

Motore di qualità ospedaliera




Il gruppo motore quasi silenzioso offre tutta la potenza di qualità ospedaliera che ci si aspetta da un tiralatte tradizionale, ma anche da un'unità compatta e indossabile. Grazie alla batteria ricaricabile, il gruppo motore senza filo assicura potenza e discrezione ovunque.

Esclusivi paracapezzoli SkinSense



I nostri esclusivi paracapezzoli in silicone SkinSense sono progettati per il massimo comfort, modellandosi delicatamente al seno grazie al calore naturale del corpo. I paracapezzoli sono realizzati in silicone alimentare per la massima tranquillità.

Collezione trasparente

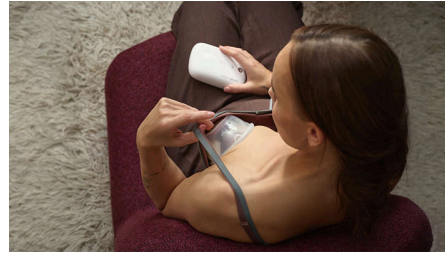

I vasetti conservalatte trasparenti consentono di avere una visione completa dell'interno, posizionare correttamente le tetterelle in modo da ottenere la migliore estrazione possibile e monitorare visivamente il volume del latte. Per un'estrusione sicura fin dalla prima goccia.

Vasetto conservalatte ultraleggero



Un vasetto conservalatte pesa poco più di 100 grammi da vuoto, dunque fino a 3 volte più leggero di un tiralatte completamente indossabile. I vasetti si adattano comodamente al reggiseno e sono quasi invisibili.

Indossalo a modo tuo



Il nostro tiralatte è dotato di un cavo da trasporto intrecciato e di una clip per indossare il gruppo motore a tracolla o fissarlo alla cintura. Grazie alla possibilità di indossarlo come preferisci, avrai totale sicurezza e controllo sull'intero processo. Utilizza l'accoppiatore del tubo e il regolatore del cavo per regolare con precisione la vestibilità.

Estrazione personalizzata




Otteni il massimo da ogni sessione con 8 livelli di suzioni pensati per stimolare il flusso di latte e 16 livelli di suzione da regolare man mano. È inoltre possibile salvare le impostazioni desiderate per avere il tiralatte sempre pronto all'uso.

Semplice da pulire e assemblare



Abbiamo progettato il nostro tiralatte e i suoi accessori per essere estremamente semplici da utilizzare. Dotato di pochi componenti, ogni vasetto conservalatte è facile da smontare, pulire (a mano o in lavastoviglie) e rimontare.

Trova la soluzione giusta per te

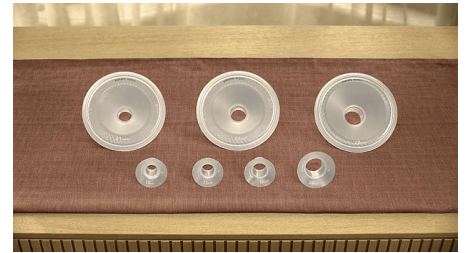

Ogni mamma merita di sentirsi sempre al meglio, per questo ci impegniamo a sostenerla nella scelta della vestibilità ideale. La nostra gamma di paracapezzoli e inserti in diverse dimensioni si adatta al 99% delle mamme. Acquistabili separatamente, consentono di sperimentare il massimo comfort durante l'estrusione.

Hands-free

Tiralatte elettrico doppio

SCF547/11

Specifiche

Assorbimento

Fonte: Batteria ricaricabile/USB-C (adattatore non incluso)

Materiale

Vasetto, cappuccio anteriore, rivestimento del parapezzolo: Polipropilene

Parapezzolo, membrana, valvola, inserto:

Gomma siliconica liquida

Tubo in silicone: Silicone

Contenuto della confezione

Sacchetti per la conservazione del latte materno: 25 pz.

Cavo da trasporto: 1 pz.

Accoppiatore tubo: 1 pz.

Gruppo motore ricaricabile (con clip rimovibile): 1 pz.

Vasetti conservalatte (assemblati): 2 pz.

Tubi in silicone: 2 pz.

Rivestimento (antipolvere) del parapezzolo: 2 pz.

Parapezzoli (21 mm, 24 mm): 2 pz ciascuno

Biberon Natural Response da 125 ml (con tettarella flusso 2): 1 pz.

Tabella delle dimensioni delle tettarelle: 1 pz.

Inserto da 19 mm: 2 pz.

Cavo USB: 1 pz.

Facilità d'uso

Utilizzo del tiralatte: Semplice da utilizzare, pulire e assemblare

Funzioni

Flessibilità di movimento: Estrazione a mani libere

Personalizzazione delle impostazioni: Modalità di stimolazione con 8 livelli di suzione e modalità di estrazione con 16 livelli di suzione

Gruppo motore: Batteria ricaricabile/USB-C, La ricarica completa della batteria richiede fino a 1,5 ore e dura circa 5 sessioni di estrazione

Specifiche del parapezzolo e inserto: Diverse misure disponibili per il massimo comfort

