

PHILIPS

AVENT



משאבת חלב חשמלית
בודדת

Hands-free

מדמה את קצב השתייה של התינוק
להיות חופשית בזמן השאיבה
קל לשימוש, לניקוי ולהרכבה
התאמה קלה, לכולם



SCF531/11

פני את ידיך. פני את זמנך.

מדמה את קצב השתייה של התינוק

נועדה לשאיבה יעילה* Philips Avent משאבת החלב החשמלית היחידה ללא שימוש בידים של ונוחה. היא מדמה את קצב התינוק, ועם העוצמה, העדינות וקלות המשקל שלה, היא שותפת השאיבה ללא ידיים האידאלית.

חופש תנועה בזמן השאיבה

- התנועה בחופשיות אם כוס האיסוף הקלה במיוחד
- נוחות בלבישה לתנועה מירבית

מדמה את קצב השתייה של התינוק

- שאיבה אפקטיבית* עם קצב שמחקה את הקצב של התינוק
- שאיבה שקטה בעוצמת מכשור רפואי

קל ופשוט לניקוי, הרכבה ושימוש

- עקבי אחר זרימת החלב באמצעות כוס איסוף שקופה לחלוטין
- התאמה אישית של השאיבה
- מעט חלקים – קל לנקות ולהרכיב

התאמה קלה, לכולם

- מגוון רחב של גדלים לשסתומי שאיבה ולתוספים, לכל האימהות
- מגן סיליקון מתעצב לצורת הפטמה בעדינות

Highlights

מדמה את קצב השתייה של התינוק



התינוקות יודעים לשתות הכי טוב! לכן משאבת החלב שלנו, ללא שימוש בידיים, מחקה את קצב השתייה הטבעי שלהם - כדי שתוכלו למצוא את הקצב שלכם Philips Avent לשאיבה אפקטיבית* ומיטבית. משאבת שואבת עד 85 פעמים בדקה, מהירה פי 2 Hands-Free 2 **מרב המשאבות האחרות.

מנוע בעוצמת מכשור רפואי



יחידת המנוע שקטה כמעט לחלוטין ומספקת עוצמה ברמה של מכשור רפואי, כמו במשאבות החלב המסורתיות, אבל בגודל לביש וקומפקטי. עם סוללה נטענת, יחידת המנוע האלחוטית שואבת בעוצמה ובדיסקרטיות בכל מקום.

ייחודיים SkinSense מגני



שלנו SkinSense מגן הפטמות מסיליקון הייחודי של מתוכנן לקבלת נוחות אולטימטיבית, המתעצב ברכות לצורת הפטמה בשימוש בחום הטבעי של הגוף. מגן הפטמות נוצר עם סיליקון ברמת מזון לקבלת שלווה נפש מלאה.

איסוף שקוף



כוס האיסוף השקופה מספקת תצוגה ללא הפרעות בפנים. היא עוזרת לך למקם נכונה את הפטמה להוצאת חלב באופן הטוב ביותר, ולעקוב חזותית אחר נפח החלב. לשאיבה בביטחון מהטיפה הראשונה ועד לאחרונה.

כוס איסוף קלה במיוחד




כוס האיסוף שלנו שוקלת רק קצת מעל 100 גרם כשהיא ריקה - קלה יותר עד פי 3 מאשר משאבת חלב ניתנת ללבישה במלואה. הכוס יושבת בנוחות בחזייה כשבקושי אפשר להבחין בה.

להתלבש בדרך שתבחר



המשאבה שלנו מגיעה עם רצועת נשיאה קלועה ותפס חיצוני ללבישת יחידת המנוע כתיק צד, או בצמוד לחגורה. עם החופש ללבוש אותה בכל דרך שתמצאו תישארו בזרימה והשליטה תישאר בידיכם. השתמשו במצמיד הצינורי ובמתאם הרצועה כדי להתאים בדיוק את הציוד.

שאיבה מותאמת אישית

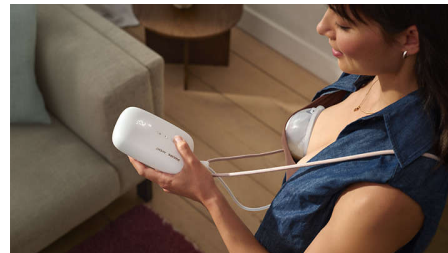

לקבל את המירב מכל שאיבה עם 8 רמות יניקה לגירוי זרימת החלב ו-16 רמות יניקה לשאיבה. אפשר לכוון תוך כדי השאיבה, ועם זיכרון אוטומטי להגדרות הטובות ביותר, אפשר לשאוב בכל רגע.

קל לנקות ולהרכיב



עיצבנו את המשאבה ואת האביזרים שלנו כך שיהיו פשוטים ככל האפשר. עם מספר קטן של חלקים מתחברים, קל לפרק את כוס האיסוף, לנקות אותה (ידינית או במדיח), לחטא ולהרכיב בחזרה.

למצוא את הגודל המתאים ביותר



אנחנו תומכים בתחושה טובה לכל האימהות, והתאמה מדויקת היא חלק חשוב בזה. הטווח הרחב של ססתומי השאיבה והתוספים שלנו מתאימים ל-99% מהאמהות. ניתן לקנות אותם בנפרד, כדי לחוות נוחות מושלמת במהלך השאיבה.

Specifications

חשמל

(מתאם לא כלול) USB-C / מקור: סוללה נטענת

חומר

כוס, מכסה קדמי, כיסוי מגן לפטמות: פוליפרופילן
מגן פטמות, ממברנה, שסתום, תוסף: סיליקון נזלי
צינורית סיליקון: סיליקון

מה כלול

יחידה אחת: USB-C: כבל
כבל לנשיאה: יחידה אחת
יחידת מנוע נטענת (עם תפס נשלף): יחידה אחת

כוס איסוף (מורכבת): יחידה אחת
צינוריות סיליקון: יחידה אחת
מכסה (אבק) מגן פטמות: יחידה אחת
מגן פטמות (21 מ"מ, 24 מ"מ): יחידה אחת בכל ערכה
כרטיס מידות פטמה: יחידה אחת
תוסף 19 מ"מ: יחידה אחת

קל לשימוש

השימוש במשאבת החלב: קלה לשימוש, פשוטה לניקוי ולהרכבה

פונקציות

גמישות בתנועה: שאיבה ללא שימוש בידים
הגדרות להתאמה אישית: 16 רמות יניקה במצב
שאיבה, 8 רמות יניקה במצב גירוי
טעינה מלאה, USB-C / יחידת המנוע: סוללה נטענת
של הסוללה נמשכת עד 1.5 שעות ומחזיקה מעמד
למשך בערך 5 שאיבות
מפרטי תוסף ומגן פטמות: מספר גדלים זמינים לקבלת
ההתאמה הטובה ביותר



היעילות יחסית לביצועים הטכניים של המוצר.
התייחסות לתדירות השאיבה של המשאבה.*
מבוסס על הטווח המלא של מגני הפטמות והתוספים שלנו*.