

PHILIPS

sonicare



Brosse à dents sonique
rechargeable

6100

Élimine jusqu'à 10 fois plus de
plaque dentaire

2 modes, 3 intensités

Alerte de pression visible

Autonomie de 21 jours



HX7403/05

Brossage doux, même pour les gencives et dents sensibles

Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire*

La brosse à dents Philips Sonicare 6100 inclut la technologie Philips Sonicare nouvelle génération, un mode Sensitive, une tête de brosse S2 Sensitive et une fonction faible intensité. Une alerte de pression vous indique lorsque vous brossez vos dents trop fort. Elle est fournie avec un étui de voyage.

Nettoyage supérieur et doux

- Brossage doux pour les gencives et dents sensibles

Pour un brossage sans effort

- Personnalisez votre nettoyage avec six modes de brossage
- Vous saurez quand il sera temps de remplacer la tête de brosse
- Protégez vos gencives grâce à l'alerte de pression visible

Nettoyage supérieur

- Technologie Philips Sonicare nouvelle génération

Adaptée à votre rythme de vie

- Optimisez votre brossage avec le SmarTimer et BrushPacer
- Soudage laser pour plus de résistance et de durabilité
- Jusqu'à trois semaines de brossage avec une charge complète
- Voyagez en toute simplicité grâce à notre coffret compact et ultra-résistant

6100

Brosse à dents sonique rechargeable

HX7403/05

Points forts

Tête de brosse S2 Sensitive



La brosse à dents Philips Sonicare 6100 offre un brossage en douceur, même pour les dents et les gencives sensibles. Grâce à la nouvelle tête de brosse S2 Sensitive dotée des brins les plus doux de Philips Sonicare, elle est spécialement conçue pour un nettoyage en douceur qui élimine jusqu'à dix fois plus de plaque dentaire dans les zones difficiles d'accès.**

Technologie Philips Sonicare nouvelle génération




Profitez d'un brossage agréable et de soins bucco-dentaires inédits grâce à la technologie Philips Sonicare nouvelle génération. Lors de vos brossages, le système magnétique innovant de la brosse à dents ajuste la puissance de brossage pendant chaque nettoyage, offrant des performances optimales de 62 000 mouvements de brins par minute, même dans les zones difficiles d'accès. De plus, l'action des fluides dynamiques aide les brins à éliminer la plaque dentaire, pour un nettoyage complet à chaque brossage.

6 modes de brossage



Conçue pour les dents et les gencives sensibles, la brosse à dents Philips Sonicare 6100 vous permet de choisir parmi deux modes de brossage. Le mode Sensitive offre un nettoyage doux et en profondeur, tandis que le mode Clean cible l'élimination de la plaque dentaire pour un nettoyage supérieur. Pour un brossage personnalisé, vous pouvez combiner n'importe quel mode avec l'un des trois niveaux d'intensité, de faible à élevé, selon vos préférences.

Alerte de pression à anneau lumineux

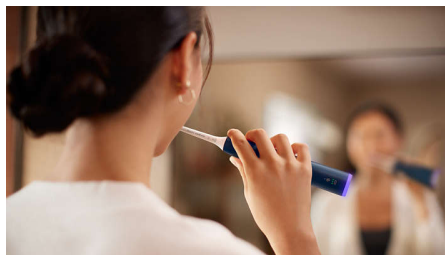

Vous ne remarquez peut-être pas quand vous brossez trop fort, mais cette brosse à dents vous préviendra. Le capteur optique intelligent détecte avec précision une pression de brossage excessive, puis clignote en violet tout en réduisant les vibrations. Vous saurez toujours quand il faut ajuster votre brossage, et vos gencives seront protégées.

Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync™



Il est important de remplacer régulièrement votre tête de brosse pour maintenir une bonne santé bucco-dentaire. Grâce à la technologie BrushSync, vous pouvez facilement maintenir les performances de votre tête de brosse. En suivant la fréquence d'utilisation et l'intensité de brossage, cette technologie innovante vous rappelle quand il est temps d'utiliser une nouvelle tête de brosse.

Minuteur de 2 minutes et assistance pour le brossage



Deux minutes suffisent pour un nettoyage complet. C'est pourquoi notre SmarTimer vous avertit lorsque le temps est écoulé. Pour un nettoyage uniforme dans toute la bouche, le BrushPacer divise votre brossage en segments, avec une légère vibration pour indiquer de passer à la suite. Cela vous aide à assurer un brossage complet à chaque utilisation.

6100

Brosse à dents sonique rechargeable

HX7403/05

Points forts

Conçue pour durer



Nous avons entièrement repensé nos brosses à dents Philips Sonicare pour qu'elles soient solides, légères et durables. Grâce à notre processus de soudage au laser avancé, nos brosses à dents sont conçues pour durer des années.

Jusqu'à trois semaines entre les charges



Cette brosse à dents utilise une batterie haute performance conçue pour améliorer votre expérience. Avec une seule charge, vous pouvez profiter de trois semaines de brossage régulier avant de devoir recharger l'appareil.

Coffret de voyage compact



Notre nouveau coffret de voyage est suffisamment compact pour se glisser dans un sac et suffisamment solide pour protéger votre brosse à dents Philips Sonicare. Non seulement il protège votre brosse à dents, mais il peut également contenir deux têtes de brosse. Vous pouvez désormais voyager en toute confiance où que vous alliez.

6100

Brosse à dents sonique rechargeable

HX7403/05

Caractéristiques

Intensités

Fort: Pour un nettoyage renforcé

Moyen: Pour un nettoyage quotidien

Faible: Pour les dents et gencives sensibles

Alimentation

Tension: 100-240 V

Spécificités techniques

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): 21 jours

Batterie: Rechargeable

Consommation d'énergie: Veille sans affichage
<0,5 W

Type de batterie: Lithium ION

Design et finition

Couleur: Bleu marine

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Manche: Design ergonomique ultracompact

Compatibilité du manche: Têtes de brosse faciles à clipser

Indicateur d'autonomie: Une icône lumineuse indique le niveau de batterie

Minuteur: SmarTimer et BrushPacer pour un brossage complet et en profondeur

Charge USB-A: Adaptateur secteur non inclus

Accessoires inclus

Manche: 1 brosse à dents rechargeable 6100

Tête de brosse: 1 S2 Sensitive

Étui de voyage: 1 étui de voyage fin

Chargeur: 1

Performances de brossage

Élimination de la plaque dentaire: Jusqu'à 10 fois plus efficace*

Gum Health: Des gencives jusqu'à 5 fois plus saines*

Vitesse: 62 000 mouvements de brosse par minute

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

Sensitive: Pour les dents et gencives sensibles

Technologie de capteur intelligent

Indicateur de pression: L'anneau lumineux s'allume en violet, Réduction des vibrations et du son de pulsation

Rappel de remplacement: La technologie BrushSync vous indique quand remplacer votre tête de brosse

