

PHILIPS

AVENT



Enkel elektrisk
brystpumpe

Hands-free



SCF543/11

Frigjør hendene dine. Frigjør tiden din.

Etterligner babyens drikkerytme

Philips Avent håndfri enkel elektrisk brystpumpe er laget med effektiv* og komfortabel pumping. Den etterligner babyens rytme, og med kraft, mildhet og letthet er den din ideelle håndfrie pumpeledsager.

Fysisk frihet mens du pumper

- Beveg deg fritt med den ultralette oppsamlingskoppen
- Slitesterk komfort for maksimal bevegelse

Etterligner babyens drikkerytme

- Effektiv* pumping med en rytme som etterligner babyen
- Stille pumping med sykehusstyrke

Enkel å bruke, enkel å rengjøre og montere

- Overvåk melkestrømmen med den helt gjennomsiktige oppsamlingskoppen
- Tilpass pumpeøkten
- Enkel å rengjøre og sette sammen med få deler

Inkluderende, sømløs passform

- Et utvalg av brystskjolds- og innleggsstørrelser for hver mamma
- Silikonskjoldet former seg varsomt til brystet

Hands-free

Enkel elektrisk brystpumpe

SCF543/11

Høydepunkter

Etterligner babyens drikkerytme



Babyer er de beste på å drikke! Det er derfor vår håndfrie elektriske brystpumpe etterligner deres naturlige drikkerytme – slik at du kan finne din egen rytme for effektiv* pumping og optimal melkeproduksjon. Med en pumpefrekvens på 85 ganger i minuttet pumper Philips Avents håndfrie brystpumpe opptil dobbelt så raskt som de fleste andre pumper**.

Motor med sykehusstyrke




Den nesten lydløse motorenheten leverer samme sykehusstyrke som du forventer fra en tradisjonell brystpumpe, fra det som likevel er en kompakt og slitesterk enhet. Med det oppladbare batteriet pumper den batteridrevne motorenheten kraftig og diskret, hvor som helst.

Unike SkinSense-skjold



Våre unike SkinSense-silikonbrystskjold er designet for optimal komfort og former seg mykt rundt brystene ved hjelp av kroppens naturlige varme. Brystskjoldene er laget av silikon i matkvalitet, for full trygghet.

Gjennomsiktig oppsamling

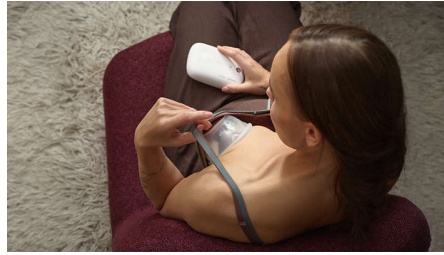

Den gjennomsiktige oppsamlingskoppen lar deg uhindret se innsiden. Dette hjelper deg med å plassere brystvorten riktig for best mulig melkeproduksjon, og å se mengden brystmelk. Dette gir sikker pumping fra første til siste dråpe.

Ultralett oppsamlingskopp




Vårt utvalg av kopper veier bare litt over 100 gram når de er tomme, noe som er opptil 3 ganger lettere enn en fullt ut bærbar brystpumpe. Koppen sitter komfortabelt i BH-en, og det er knapt mulig å se tegn på at den er der.

Bruk den på din måte



Vår pumpe leveres med en flettet bæreledning og klemme, slik at du kan bære motorenheten på kroppen eller festet til linningen. Med frihet til å bruke enheten på din måte kan du holde deg i gang vite at du har full kontroll. Bruk slangekoblingen og justeringen av ledningen for å tilpasse passformen nøyaktig som du vil.

Tilpasset pumping

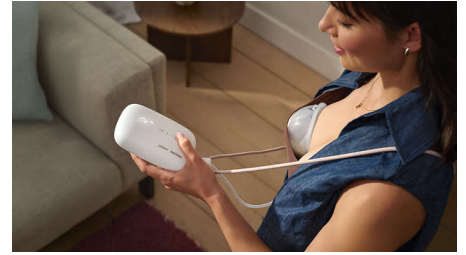


Få mest mulig ut av hver økt med 8 sugenivåer for å stimulere melkestrømmen og 16 sugenivåer for å pumpe melken ut. Du kan finjustere mens du pumper, og med automatisk lagring av din ideelle innstilling er pumpen alltid klar til bruk.

Enkel å rengjøre og sette sammen



Vi har designet pumpen og tilbehøret slik at den er så enkel som mulig. Med bare noen få tilkoblingsstykker er hver oppsamlingskopp en lek å ta fra hverandre, rengjøre (for hånd eller i oppvaskmaskin), desinfisere og å sette sammen igjen.

Finn riktig passform

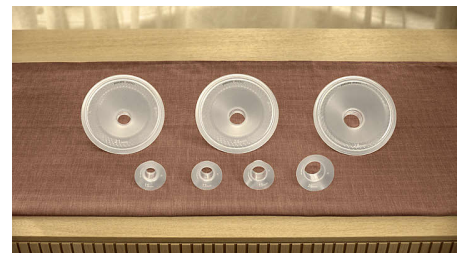

Vi hjelper enhver mamma, slik at hun føler seg best mulig, og å finne riktig passform er en viktig del av dette. Vårt utvalg av brystskjolds- og innleggsstørrelser passer til 99 % av alle mødre. De kan kjøpes separat, slik at du opplever den ultimate komforten mens du pumper.

Spesifikasjoner

Drift

Kilde: Oppladbart batteri / USB-C (adapter følger ikke med)

Materiale

Kopp, frontdeksel, brystskjolddeksel:

Polypropylen

Brystskjold, membran, ventil, innlegg: Flytende

silikongummi

Silikonrør: Silikon

Følgende er inkludert:

Poser til morsmelk: 25 deler

Bæreledning: 1 del

Oppladbar motorenhet (med avtakbar

klemme): 1 del

Oppsamlingskopp (montert): 1 del

Silikonslanger: 1 del

Brystskjold (støv)-deksel: 1 del

Brystskjold (21 mm, 24 mm): 1 stk. hver

125 ml Natural Response-flaske (smokk med gjennomstrømning 2): 1 del

Kort for brystvortestørrelse: 1 del

Innlegg 19 mm.: 1 del

USB-kabel: 1 del

Brukervennlighet

Bruke brystpumpen: Enkel å bruke, enkel å rengjøre og montere

Funksjoner

Bevegelsesfrihet: Håndfri pumping

Innstillinger for personlig tilpasning:

Stimuleringsmodus med 8 sugenivåer og uttrykksmodus med 16 sugenivåer

Motorenhet: Oppladbart batteri / USB-C., Det tar opptil 1,5 timer å lade batteriet helt opp og det varer i ca. 5 pumpeøkter

Detaljert informasjon om brystskjold og -innlegg: Flere størrelser er tilgjengelige for den beste passformen

