

PHILIPS

AVENT



Yksiosainen sähkökäyttöinen
rintapumppu

Hands-free



SCF543/11

Saat vapaat kädet ja enemmän aikaa.

Jäljittelee vauvasi juomisrytmiä

Yksiosainen sähkökäyttöinen Philips Avent Hands-free -rintapumppu tekee pumppaamisesta tehokasta* ja mukavaa. Se jäljittelee lapsesi rytmiä, ja se on tehokas, hellävarainen ja kevyt pumppu, jota voi käyttää ilman käsiä.

Vapaus liikkua pumppaamisen aikana

- Liiku vapaasti erittäin kevyen keruukupin kanssa
- Liikkumisvapautta puettavan rintapumpun avulla

Jäljittelee vauvan juomisrytmiä

- Pumppaa tehokkaasti* vauvasi rytmiä jäljitellen
- Hiljaista sairaalatason pumppausta

Helppo käyttää, puhdistaa ja koota

- Seuraa maidontuloa läpinäkyvän keruukupin avulla
- Mukauta pumppauskerta
- Helppo puhdistaa ja koota – vain vähän osia

Saumaton istuvuus

- Valikoima rintakumien ja sisäkkeiden kokoja jokaiselle äidille
- Silikoninen rintakumi mukautuu rintaasi

Hands-free

Yksiosainen sähkökäyttöinen rintapumppu

SCF543/11

Kohokohdat

Jäljittelee vauvan juomisrytmiä



Vauvat osaavat syömisen! Siksi sähkökäyttöinen hands-free-rintapumppumme jäljittelee vauvojen luonnollista juomisrytmiä – voit siis etsiä oman rytmiä tehokkaalle* pumpppaamiselle ja parhaalle mahdolliselle maidontulolle. Philips Avent Hands-free -rintapumppu pumpppaa jopa 85 kertaa minuutissa ja on kaksi kertaa nopeampi kuin useimmat muut pumpput**.

Sairaalatason moottori



Lähes äänettömässä rungossa on sairaalatason teho, jota voi odottaa perinteiseltä rintapumpulta, vaikka tämä on pienikokoinen ja puettava malli. Johdottomassa rungossa on ladattava akku, jotta voit pumpata tehokkaasti ja huomaamattomasti missä tahansa.

Ainutlaatuiset SkinSense-rintakumit



Ainutlaatuinen silikoninen SkinSense-rintakumi mukautuu pehmeästi rinnan ympärille käyttämällä kehon luonnollista lämpöä.

Rintakumi on valmistettu elintarviketasoisesta silikonista, jotta voit käyttää sitä luottavaisin mielin.

Läpinäkyvät keruukupit



Koska näet esteettä keruukupin sisälle, voit asettaa nännin oikein parhaan maidontulon takaamiseksi ja seurata rintamaidon määrää. Voit pumpata luottavaisin mielin ensimmäisestä pisarasta loppuun saakka.

Erittäin kevyt keruukuppi




Keruukuppi painaa tyhjänä vain hiukan yli 100 grammaa, ja on jopa kolme kertaa kevyempi kuin puettava rintapumppu. Kuppi asettuu mukavasti ja lähes huomaamattomasti liiveihin.

Pue niin kuin haluat



Pumpun mukana toimitetaan punottu kantohihna ja pidike, jotta rungon voi pukea ristiin rinnan yli tai vyötärölle. Koska voit pukea rungon niin kuin haluat, voit hallita pumpun käyttöä kätevästi. Voit hienosäätää istuvuutta putken liittimellä ja hihnan säädöllä.

Mukautettavat tehoasetukset

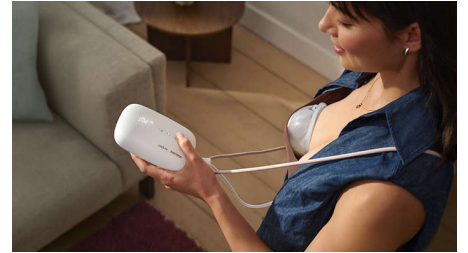


Saat parhaan hyödyn jokaisesta pumpppauskerrasta 8 imuteholla, jotka stimuloivat maidontuloa, ja 16 imuteholla maidon pumpppaamiseen. Voit hienosäätää asetuksia käytön aikana, ja koska sopivin asetus tallennetaan automaattisesti, pumppu on aina valmiina käyttöön.

Helppo puhdistaa ja koota



Pumppu ja tarvikkeet on suunniteltu mahdollisimman yksinkertaisiksi. Keruukupissa on vähän osia, joten se on helppo purkaa, puhdistaa (käsini tai astianpesukoneessa), desinfioida ja koota uudelleen.

Löydä oikea istuvuus

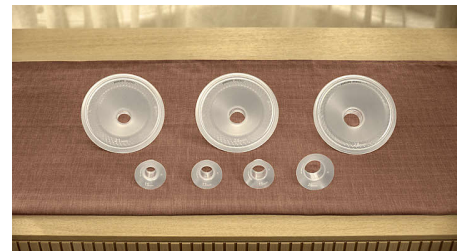

Haluamme, että jokainen äiti tuntee olonsa mukavaksi, ja siksi istuvuus on tärkeää. Valikoimamme rintakumien ja sisäkkeiden koot sopivat 99 prosentille äideistä. Niitä voi ostaa erikseen, jotta pumpppaaminen on mukavaa.

Tekniset tiedot

Virta

Lähde: Ladattava akku / USB-C (ei sisällä sovittinta)

Materiaali

Kuppi, suojus, rintakumin suojus: Polypropeeni
Rintakumi, kalvo, venttiili, sisäke: Nestemäinen silikonikumi
Silikoniputki: Silikoni

Sisältö

Rintamaitopussit: 25 kpl
Kantojohto: 1 kpl
Ladattava runko (jossa irrotettava pidike): 1 kpl

Keruukuppi (koottu): 1 kpl
Silikoniputket: 1 kpl
Rintakumin pölysuojus: 1 kpl
Rintakumi (21 mm, 24 mm): 1 kpl kussakin
125 ml:n Natural Response -tuttipullo (mukana Flow 2 -tutti): 1 kpl
Nännien mittauskortti: 1 kpl
Sisäke 19 mm: 1 kpl
USB-johto: 1 kpl

Helppokäyttöinen

Rintapumpun käyttö: Helppo käyttää, puhdistaa ja koota

Toiminnot

Joustavuutta liikkuu: Kädet vapaiksi jättävä pumppaus
Mukautettavat asetukset: Stimulointitilassa on 8 imutehoa ja pumppaustilassa 16 imutehoa
Runko: Ladattava akku / USB-C, Akun lataaminen täyteen kestää enintään 1,5 tuntia ja täysi lataus riittää noin 5 pumppauskertaan
Rintakumin ja sisäkkeen tiedot: Saatavilla useita eri kokoja

