

PHILIPS

AVENT



Enkel elektrisk
bröstpump

Hands-free



SCF543/11

Fria händer. Mer fritid.

Efterliknar barnets drickrytm

Philips Avent enkel elektrisk handsfree-bröstpump är gjord för effektiv* och bekväm pumpning. Den efterliknar barnets rytm och är den perfekta handsfree-bröstpumpen då den är kraftfull, skonsam och lätt.

Fysisk frihet medan du pumpar

- Rör dig fritt med den otroligt lätta uppsamlingsbehållaren
- Bärbar komfort för maximal rörelseförmåga

Efterliknar barnets drickrytm

- Pumpa effektivt* med en rytm som efterliknar barnets rytm
- Tyst pumpning med sjukhusstyrka

Lätt att använda, enkel att rengöra och sätta ihop

- Spåra mjölkflödet med den genomskinliga uppsamlingsbehållaren
- Anpassa din pumpning
- Lätt att rengöra och montera med ett fåtal delar

Har en smidig passform

- Ett brett utbud av storlekar på bröstskydd och inlägg för alla mammor
- Silikonskydd som formar sig efter bröstet

Funktioner

Efterliknar barnets drickrytm



Barn vet bäst när det gäller hur de dricker! Därför efterliknar vår elektriska handsfree-bröstpump deras naturliga drickrytm – så du kan hitta din egen rytm för effektiv* pumpning och optimalt mjölkflöde. Philips Avent handsfree-bröstpumpen pumpar upp till 85 gånger per minut och är dubbelt så snabb som de flesta andra pumpar**.

Motor med sjukhusstyrka




Den nästintill ljudlösa motorenheten levererar den sjukhusstyrka du förväntar dig av en traditionell bröstpump, men i en kompakt och bärbar enhet. Med sitt uppladdningsbara batteri pumpar den sladdlösa motorenheten kraftfullt och diskret var som helst.

Unika SkinSense-skydd



Vårt unika SkinSense-bröstskydd i silikon är utformat för ultimat komfort och formar sig mjukt runt bröstet med hjälp av kroppens naturliga värme. Bröstskyddet är tillverkat av livsmedelsgodkänd silikon för total sinnesro.

Genomskinlig uppsamling

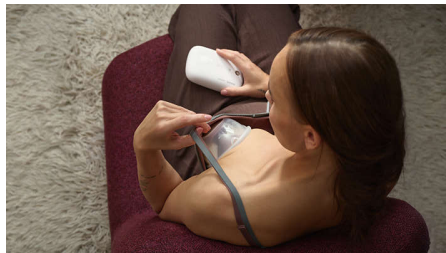

Den genomskinliga uppsamlingsbehållaren gör att du kan se inuti den. Det hjälper dig att placera bröstvårtan rätt för bästa möjliga mjölkflöde och gör att du kan se bröstmjölken volym. För säker pumpning från första till sista droppen.

Otroligt lätt uppsamlingsbehållare




Vår uppsamlingsbehållare väger endast drygt 100 gram när den är tom – upp till tre gånger lättare än en helt bärbar bröstpump. Behållaren sitter bekvämt i bh:n och det märks knappt att den är där.

Bär den på ditt sätt



Vår pump levereras med en flätad bärrem och klädklämma så att du kan bära motorenheten på kroppen eller fäst i linningen. Tack vare att du kan bära den på ditt sätt kan du behålla samma mjölkflöde samtidigt som du vet att du enkelt kan göra ändringar om det behövs. Använd slangkopplingen och remjusteraren för att finjustera passformen.

Personligt anpassad pumpning

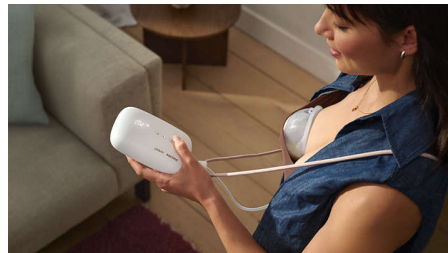


Få ut mesta möjliga av varje pumpstillfälle med 8 sugnivåer för att stimulera mjölkflödet och 16 sugnivåer för att pumpa ut mjölken. Du kan finjustera medan du pumpar, och eftersom din idealiska inställning sparas automatiskt är din pump alltid redo att användas.

Lätt att rengöra och montera



Vi har utformat vår pump och våra tillbehör så att de ska vara så enkla som möjligt. Med endast ett fåtal anslutningsdelar är varje uppsamlingsbehållare lätt att ta isär, rengöra (för hand eller i diskmaskin), desinficera och sätta ihop igen.

Hitta rätt passform

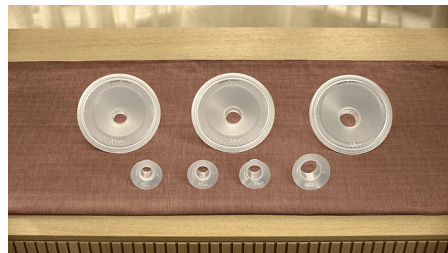

Vi vill att alla mammor ska må så bra som möjligt, och rätt passform är en viktig del av detta. Vårt utbud av bröstskydd och bröstskyddsinnlägg i olika storlekar passar 99 % av alla mammor. De kan köpas separat så att du kan uppleva ultimat komfort när du pumpar.

Specifikationer

Effekt

Källa: Uppladdningsbart batteri/USB-C (adapter medföljer inte)

Material

Kopp, främre lock, bröstkupsskydd: Polypropylen

Bröstkupa, membran, ventil, insats: Flytande silikongummi

Silikonslang: Silikon

Vad medföljer?

Påsar för bröstmjölk: 25 delar

Bärrem: 1 st.

Laddningsbar motorenhet (med en löstagbar

klämma): 1 st.

Uppsamlingskopp (monterad): 1 st.

Silikonslangar: 1 st.

Bröstkupsskydd: 1 st.

Bröstkupa (21 mm, 24 mm): 1 st. var

125 ml Natural Response-flaska (med flöde 2-napp): 1 st.

Kort för bröstvårtsstorlek: 1 st.

Insats 19 mm: 1 st.

USB-kabel: 1 st.

Lättanvänd

Användning av bröstpumpen: Lätt att använda, enkel att rengöra och sätta ihop

Funktioner

Flexibla rörelser: Handsfree-pumpning

Anpassade inställningar: Stimuleringsläge med 8 sugnivåer och pumpläge med 16 sugnivåer

Motorenhet: Uppladdningsbart batteri/USB-C, Det tar upp till 1,5 timme att ladda batteriet helt och det räcker till cirka 5 pumptillfällen

Specifikationer för bröstkupa och insats: Flera storlekar för bästa möjliga passform

