

PHILIPS



Odnowione fabrycznie
urządzenie do depilacji IPL

Lumea IPL 9900 Series

Czujnik SmartSkin

3 inteligentne nasadki: do ciała,
twarzy, precyzyjna

Wyjątkowe funkcje aplikacji
wsparte sztuczną inteligencją

Zasilanie akumulatorowe i
sieciowe



BRI973/00R1

Nasze najlepsze urządzenie IPL z wyjątkowymi funkcjami SkinAI

Ciesz się wydepilowaną gładką skórą przez 12 miesięcy*

Poznaj nasze najinteligentniejsze rozwiązanie do depilacji IPL, zapewniające gładką skórę przez długi czas. Aplikację naszego najszybszego bezprzewodowego urządzenia do depilacji IPL Lumea z technologią SenseIQ wyposażyliśmy obecnie w funkcję SkinAI, która analizuje skórę i śledzi postępy depilacji.

Delikatność i skuteczność zapewniające długotrwałą gładkość skóry

- Szybkie rezultaty z zabiegami tylko co 2 tygodnie
- Wygodne opcje przewodowe i bezprzewodowe
- Stworzone wspólnie z dermatologami dla bezpiecznej i delikatnej depilacji

Jedno rozwiązanie do depilacji zarówno twarzy, jak i całego ciała

- Jedno rozwiązanie do depilacji zarówno twarzy, jak i całego ciała z trzema inteligentnymi nasadkami
- Philips Lumea 9900 zapewnia skuteczne działanie w przypadku wielu różnych typów włosów i skóry

Odnowione fabrycznie urządzenie Lumea IPL

- Ta sama skuteczność, mniejszy wpływ na środowisko

Spersonalizowany zabieg depilacji IPL

- Delikatność i komfort dzięki technologii SenseIQ
- Inteligentna analiza skóry za pomocą technologii SkinAI


Lumea IPL 9900 Series

Odnowione fabrycznie urządzenie do depilacji IPL

BRI973/00R1

Zalety

Odnowione fabrycznie urządzenie Lumea IPL

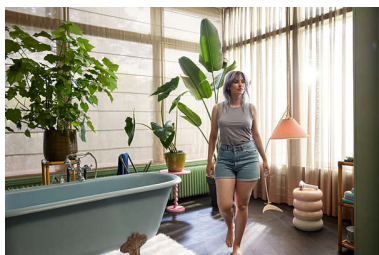

Uwielbiamy dawać drugie życie zwróconym produktom, ponieważ podczas produkcji używanych w nich części i materiałów emisja CO2 jest największa. Wybranie produktu odnowionego zamiast fabrycznie nowego oznacza redukcję śladu węglowego o 78%.***

Dla szybkich rezultatów wykonuj zabieg dwa razy w miesiącu




Rozpocznij od fazy początkowej składającej się z 4 zabiegów wykonywanych co 2 tygodnie — to o połowę mniej zabiegów niż w przypadku innych marek.

Technologia SenseIQ



Seria Lumea 9900 została wyposażona w pięć regulowanych ustawień mocy światła. Nasz czujnik SmartSkin analizuje odcień skóry, aby wybrać ustawienia zapewniające największy komfort zabiegu. Inteligentne nasadki dostosowują zabieg do każdego obszaru ciała.

Wygodne opcje przewodowe i bezprzewodowe

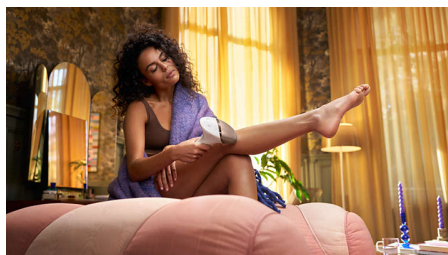

Urządzenie Philips Lumea zostało zaprojektowane tak, aby było wygodne i łatwe w użyciu. Urządzenie podłączone przewodowo umożliwia szybkie leczenie dużych obszarów ciała, takich jak nogi, lub korzystanie z trybu akumulatorowego w celu precyzyjnego leczenia trudno dostępnych obszarów ciała.

Trzy inteligentne nasadki



Po podłączeniu specjalnie zaprojektowane nasadki perfekcyjnie dopasowują się do krzywizn ciała i aktywują najskuteczniejsze dla danego obszaru programy depilacji. Twarz: płaska nasadka z niewielkim oknem z filtrem UV. Ciało: nasadka zakrzywiona do środka z dużym oknem. Zabiegi precyzyjne: nasadka zakrzywiona na zewnątrz w celu dotarcia do trudno dostępnych miejsc.


Opracowano we współpracy z dermatologami



Firma Philips — lider w dziedzinie rozwiązań technologicznych dla zdrowia — opracowała urządzenie do depilacji Lumea IPL we

współpracy z dermatologami, dzięki czemu jest ono proste w użyciu, skuteczne i bezpieczne. Zastosowanie technologii używanej w profesjonalnych salonach sprawia, że zapewnia ono bardzo delikatne usuwanie owłosienia, także we wrażliwych obszarach ciała.

Wyjątkowe funkcje SkinAI

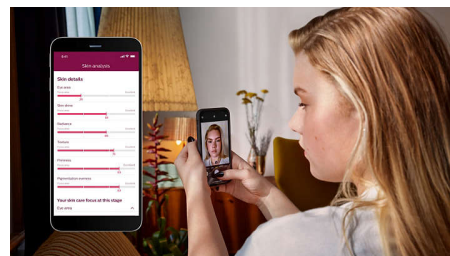

Nasza bezpłatna aplikacja, zapewnia szczegółowe wskazówki dotyczące używania produktu, a dodatkowo została wyposażona w wyjątkową technologię do analizy skóry i śledzenia procesu redukcji owłosienia.

Odpowiednie do różnych typów skóry i włosów



Urządzenie IPL bazuje na kontraście pomiędzy pigmentem we włosach a pigmentem skóry, dlatego działa w przypadku włosów w kolorze naturalnego ciemnego blondu, brązu oraz czarnych, a także skóry o odcieniu od jasnego do ciemnego brązu (I–V). Philips Lumea nie można stosować w przypadku włosów w kolorze białym, siwym, jasny blond lub rudym ani w przypadku bardzo ciemnej skóry.

Dane techniczne

Dodatki dotyczące specyfikacji technicznych

Nasadka do depilacji ciała: Kształt: wypukły, Rozmiar okienka: 4,1 cm², Idealna do depilacji ciała: nogi, ręce, brzuch

Nasadka do depilacji twarzy: Kształt: płaski, Rozmiar okienka: 2 cm², dodatkowy filtr, Idealna do depilacji twarzy: górna warga, policzki, linia szczęki

Nasadka do precyzyjnych zabiegów: Kształt: wklęsły, Rozmiar okienka: 3 cm², Nasadka do depilacji pach oraz okolic bikini

Bezpieczeństwo i konfigurowalne ustawienia

Wbudowany filtr UV: Ochrona skóry przed promieniami UV

Pięć ustawień energii światła: Możliwość dostosowania do typu skóry

Wbudowany system bezpieczeństwa: Zabezpieczenie przed przypadkowym

wyzwalaniem błysków

Czujnik odcienia skóry: Rozpoznaje odcień skóry

Czujnik SmartSkin: Wskaźnik odpowiedniego ustawienia na żądanie

Tryb aplikacji

Tryb przesunięcia i błysku: Do szybkiego zastosowania

Tryb przyłożenia i błysku: Do użycia na małych obszarach ciała

Obsługa przewodowa/bezprzewodowa: Zasilanie akumulatorowe i sieciowe

Dane techniczne

Napięcie: 100–240 V

Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulator

Wysokowydajna lampa: Dostarcza 450 000 błysków, co odpowiada 39 latom eksploatacji lampy****

Serwis

Gwarancja: Dwuletnia gwarancja obowiązująca na całym świecie + dodatkowy rok gwarancji po rejestracji produktu w ciągu 90 dni

Elementy wchodzące w skład zestawu

Instrukcja obsługi: Instrukcja obsługi

Przechowywanie: Luksusowe etui

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Czas aplikacji

Podudzie: 8,5 min

Okolica pod pachami: 2,5 min

Linia bikini: 2 min

Obszary twarzy: 1,5 min



* Średnia redukcji owłosienia po 12 zabiegach: 86% na łydkach, 70% na okolicach bikini, 67% na obszarach pod pachami

** Przy przestrzeganiu harmonogramu zabiegów. Obliczono w przypadku stosowania na łydkach, w okolicach bikini, pod pachami i na twarzy; żywotność lampy nie rozszerza 2-letniej gwarancji firmy Philips.

*** Dotyczy: produktu, materiałów opakowania oraz logistyki zwrotnej firmy Philips w przypadku zwrotów urządzeń Lumea S9900. Nie dotyczy: związków chemicznych, energii niezbędnej do przetworzenia oraz transportu części i materiałów do firmy Philips. Obliczenia wykonano na podstawie metody ReCiPe2016 oraz bazy danych ecoinvent3.6 z założeniem, że wszystkie akcesoria, zasilacz oraz opakowania będą wymagać wymiany.