

PHILIPS

AVENT



Tire-lait électrique
simple

Hands-free



SCF543/11

Libérez vos mains. Libérez-vous du temps.

Comme le rythme de tétée de bébé

Le tire-lait électrique simple mains libres Philips Avent est conçu pour un tirage du lait confortable et efficace*, tout en reproduisant le rythme de tétée de votre bébé. Sa puissance, sa douceur et sa légèreté en font le tire-lait mains libres parfait.

Liberté de mouvement lors du tirage

- Bougez librement grâce à la coquille recueil-lait ultra-légère
- Un confort optimal pour une mobilité maximale

Imite le rythme de tétée de bébé

- Un tirage efficace* grâce à un rythme qui imite celui de votre bébé
- Tire-lait silencieux de qualité hospitalière

Facile à utiliser, à nettoyer et à assembler

- Surveillez votre débit de lait grâce à notre coquille recueil-lait entièrement transparente
- Personnalisez votre séance de tirage
- Facile à nettoyer et à assembler grâce au nombre réduit de pièces

Forme inclusive et ajustée

- Une gamme de téterelles et d'inserts pour s'adapter à chaque maman
- La téterelle en silicone épouse en douceur la forme de votre poitrine

Points forts

Imite le rythme de tétée de bébé



Personne ne sait mieux téter que bébé ! C'est pourquoi notre tire-lait électrique mains libres reproduit le rythme de tétée naturel de votre bébé, afin que vous puissiez trouver votre propre rythme pour une expression efficace* et un débit de lait optimal. Avec jusqu'à 85 aspirations par minute, le tire-lait mains libres Philips Avent est deux fois plus rapide que la plupart des tire-laits**.

Moteur de qualité hospitalière




Le bloc moteur quasi silencieux offre à cet appareil compact et portable la puissance d'un tire-lait traditionnel. Grâce à sa batterie rechargeable, ce bloc moteur sans fil pompe de manière puissante et discrète, où que vous soyez.

Téterelles SkinSense uniques



Notre téterelle en silicone SkinSense unique a été conçue pour offrir un confort optimal. Elle épouse en douceur la forme de votre poitrine grâce à la chaleur naturelle de votre corps. Elle est fabriquée en silicone de qualité alimentaire pour une tranquillité d'esprit totale.

Collecte transparente

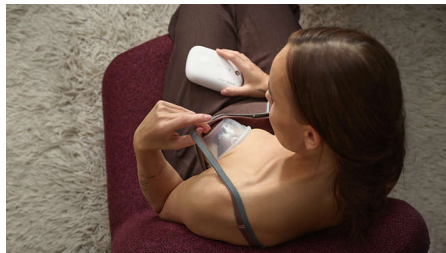

Grâce à notre flacon de recueil transparent, visualisez le volume de lait tiré et optimisez votre production en ajustant la position de votre mamelon. Pour un tirage en toute confiance de la première goutte à la dernière.

Coquille collecte-lait ultra-légère




Notre coquille collecte-lait pèse un peu plus de 100 grammes à vide, soit jusqu'à trois fois moins qu'un tire-lait entièrement mains libres. La coquille se place confortablement dans le soutien-gorge, pour un résultat quasiment invisible.

Portez-le à votre façon



Notre tire-lait est fourni avec un cordon de transport tressé et un clip pour vêtements, permettant de porter le bloc moteur en bandoulière ou fixé à votre taille. Choisissez la méthode qui vous convient, pour un appareil toujours à portée de main. Le raccord de tube et le cordon réglable vous permettent de l'ajuster avec précision.

Expression personnalisée du lait

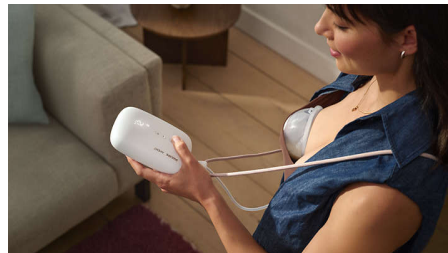

Profitez au maximum de chaque session grâce aux 8 niveaux d'aspiration qui stimulent la production de lait et aux 16 niveaux d'expression. Ajustez votre tire-lait pendant le tirage pour trouver votre réglage idéal. Celui-ci est ensuite automatiquement mémorisé, pour un tire-lait toujours prêt.

Facile à nettoyer et à assembler



Nous avons conçu notre tire-lait et ses accessoires pour qu'ils soient aussi simples que possible. Avec seulement quelques éléments de raccord, chaque flacon de recueil est facile à démonter, à nettoyer (à la main ou au lave-vaisselle), à désinfecter et à remettre en place.

Trouvez la taille qui vous convient



Chaque maman mérite de se sentir parfaitement à l'aise. Pour cela, il est essentiel de trouver la taille qui lui convient. Notre gamme de tailles de téterelles et d'embouts convient à 99 % des mamans. À acheter séparément, pour un confort optimal lors de l'utilisation du tire-lait.

Caractéristiques

Alimentation

Source: Batterie rechargeable / USB-C
(adaptateur non inclus)

Matériau

Flacon de recueil, capuchon avant, protection pour téterelle: Polypropylène

Téterelle, membrane, valve, insert: Caoutchouc de silicone liquide

Tube en silicone: Silicone

Inclus

Sachets de conservation pour le lait maternel:

25 Pièce(s)

Cordon de transport: 1 pièce

Bloc moteur rechargeable (avec clip amovible):

1 pièce

Flacon de recueil (assemblé): 1 pièce

Tubes en silicone: 1 pièce

Protection (anti-poussière) pour téterelle:

1 pièce

Téterelles (21 mm, 24 mm): 1 pièce de chaque

Biberon Natural Response 125 ml (avec tétine débit 2): 1 pièce

Guide des tailles de mamelons: 1 pièce

Insert de 19 mm: 1 pièce

Câble USB: 1 pièce

Facile d'utilisation

Utilisation du tire-lait: Facile à utiliser, à nettoyer et à assembler

Fonctions

Liberté de mouvement: Tirage mains libres

Réglages de personnalisation: Mode stimulation avec 8 niveaux d'aspiration et mode d'expression avec 16 niveaux d'aspiration

Bloc moteur: Batterie rechargeable / USB-C, Le cycle de chargement complet dure environ 1 h 30 et offre environ 5 séances de tirage

Caractéristiques de la téterelle et de l'insert:

Plusieurs tailles disponibles pour un ajustement optimal

