

PHILIPS

AVENT



Osnovno

Single Electric Breast Pump



SCD323/20

Brzina i praktičnost

Električna izdajalica Philips Avent održava optimalan protok mlijeka i nježno se prilagođava vašoj veličini i obliku. Brza, udobna i praktična za svaku novu majku.

Prilagođeno

- Personalizirano iskustvo, 4 + 4 razine postavki
- Minimalan broj dijelova i intuitivno postavljanje
- Funkcija memorije
- Malena i kompaktna
- Zdravo spremanje izdojenog mlijeka

Nježna i udobna

- Mekan i prilagodljiv silikonski jastučić


Istaknute znač.

Personalizirano iskustvo



Fino podesite svako izdajanje i prilagodite ga svojim potrebama uz široki raspon postavki stimulacije i izdajanja. Naše izdajalice nude 4 postavke stimulacije i 4 razine izdajanja za personalizirano iskustvo.

Postavka memorije

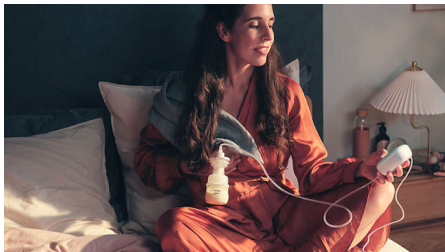

Znate što volite? Izdajalica se automatski sjeća vaših posljednjih postavki, sve što trebate učiniti jest sjesti i pritisnuti gumb za pokretanje.

Mekan prilagodljiv silikonski jastučić



Univerzalna veličina. Silikonski jastučić nježno se savija i prilagođava vašoj bradavici.

Malena i kompaktna




Malena i kompaktna jedinica motora

Jednostavno čišćenje i sastavljanje



Naš zatvoreni sustav izdajanja znači da se mlijeko ne zadržava u cijevima pa vam ostaje manje za čišćenje. A i manji broj dijelova također olakšava ponovno sastavljanje.

Zdravo spremanje izdojenog mlijeka

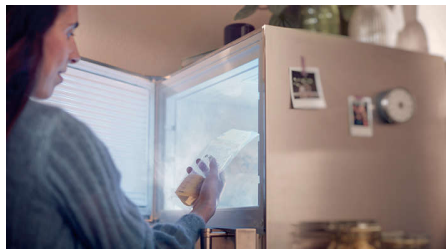

Praktične i prethodno sterilizirane jednokratne vrećice omogućuju sigurno i zaštićeno spremanje dragocjenog izdojenog mlijeka majki koje doje.

Specifikacije

Snaga

USB-C veza

Mrežni napon: 5 V i ≥ 1 A

Jedinica napajanja nije uključena. Nije punjivo, samo za žičnu upotrebu.

Materijal

0 % BPA*

Što se nalazi u paketu

Vrećice za spremanje izdojenog mlijeka: 5 komada

Jedinica motora

Silikonska cijev

USB-C kabel

Bočica Natural (125 ml)

Komplet za izdajanje

Poklopac s navojem

Pločica za zatvaranje: 1 komad

Sisač sa sporim protokom: 1 komad

Jastučići za dojke: 4 komada

