

**PHILIPS**

**sonicare**



מברשת שיניים קולית  
נטענת

6100

הסרה של עד פי 10 יותר פלאק

שני מצבים, שלוש עוצמות  
התראת לחץ חזותית

חיי סוללה של 21 יום



HX7401/07

## ניקוי עדין, לשיניים ולחניכיים רגישים

\*הסרה של עד פי 10 יותר פלאק

מצב Next-Generation Sonicare, בעלת טכנולוגיית Philips Sonicare 6100 מברשת השיניים ועוצמה נמוכה. בנוסף, התראת לחץ למניעת צחצוח S2 Sensitive, ייעודי, ראש מברשת השיניים וחניכיים רגישים.

### ניקוי עדין ומעולה

- ניקוי עדין לשיניים וחניכיים רגישות

### הצחצוח הופך חסר מאמץ

- מגנה על החניכיים שלכם בעזרת התראת הלחץ החזותי
- התאימו אישית את הניקוי שלכם עם 6 מצבי צחצוח
- לדעת תמיד מתי הגיע הזמן לראש מברשת חדש

### ניקוי מעולה

- החדשנית Sonicare טכנולוגיית

### תוכן לסגנון החיים שלכם

- עד 3 שבועות של צחצוח בטעינה מלאה אחת
- SmarTimer i-QuadPacer מטבו הצחצוח שלכם באמצעות
- להפוך את הטיול לקל עם נרתיק הנסיעות הקומפקטי והעמיד ביותר
- הלחמה בלייזר לחוזק ועמידות


# Highlights

## מברשת S2 Sensitive ראש




של פיליפס מספקת חוויית צחצוח Sonicare 6100 של עדינה, אפילו לשיניים וחניכיים רגישות. בזכות ראש S2 Sensitive המברשת החדש שיוצר באמצעות הזפים Sonicare, הרכים ביותר של היא עוצבה באופן ייחודי כדי, Sonicare, הרכים ביותר של לספק ניקוי עדין שמסיר עד פי 10 יותר פלאק במקומות \*\*קשים להגעה.

## החדשנית Sonicare טכנולוגיית

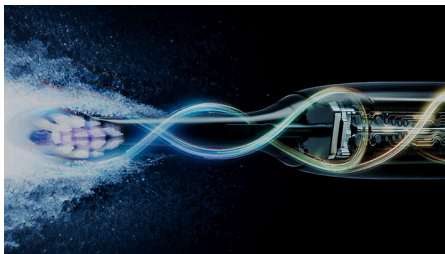

ליהנות מחוויית צחצוח נהדרת ומרמה חדשה של טיפול החדשנית. בזמן Sonicare בחניכיים עם טכנולוגיית שאתם מצחצחים, המערכת המגנטית החדשנית של מברשת השיניים מתאימה את עוצמת הצחצוח בכל פעולת ניקוי, ומספקת ביצועים מיטביים של 62,000 תנועות זיפים בכל דקה בדיוק, אפילו באזורים הקשים להגעה. ביתיים, פעולת נוזל דינמית תומכת בביצועים של ראשי הצחצוח על ידי שטיפה עדינה לאורך קו החניכיים בין כל שן, וכך מסייעת לכם להשיג ניקיון מלא בכל פעם שאתם מצחצחים.

## הגדרות צחצוח 6

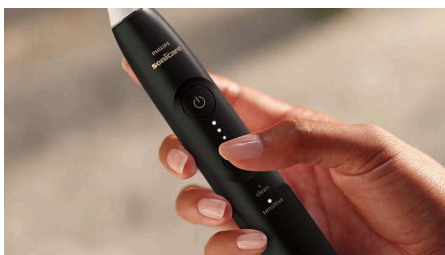

של פיליפס, שתוכננה לשיניים Sonicare 6100 ולחניכיים רגישות, מאפשרת לכם לבחור בין שני מצבי צחצוח. מצב 'רגיש' מספק ניקוי עדין ויסודי, בעוד שמצב 'נקי' מתמקד בהסרת הפלאק לקבלת ניקוי מעולה.

לניקוי אישי, תוכלו לשלב כל מצב עם אחת משלוש רמות הרגישות, מ'גבוהה' עד 'נמוכה', לפעולת צחצוח שמתאימה בדיוק לכם.

## התראת לחץ של טבעת מוארת



יתכן שלא תשימו לב כשאתם מצחצחים בעוצמה רבה מדי, אך מברשת שיניים זו כן תרגיש בכך. החיישן האופטי החכם מזהה במדויק לחץ צחצוח עודף, ואז מהבהב בסגול ובמקביל מפחית את הרטט. תמיד תדעו מתי להתאים את הצחצוח שלכם, והחניכיים שלכם יישארו מוגנות.

## תזכורת להחלפת ראש המברשת - BrushSync



החלפת ראשי המברשת באופן סדיר היא חלק חשוב בשמירה על בריאות טובה של הפה שלכם. בעזרת קל לשמור על ביצועי ראש, BrushSync טכנולוגיית המברשת ברמה הטובה ביותר. על ידי מעקב אחר תדירות השימוש ועוצמת הצחצוח שלכם, הטכנולוגיה החדשנית מזכירה לכם מתי הגיע הזמן לראש מברשת חדש.


## טיימר של 2 דקות וקוצב צחצוח



שתי דקות זה כל מה שאתם צריכים לניקוי מלא, לכן שלנו מאפשר לכם לדעת מתי הגיע הזמן. SmartTimer מחלק את 2 הדקות וקוצב צחצוח, לקבלת ניקוי אחיד בכל הפה.

הצחצוח שלכם למקטעים, עם הפסקה קלה ברטט שנותנת לכם סימן להמשיך. פעולה זו מסייעת לכם להגיע לניקוי אחיד בכל פעם שאתם מצחצחים.

## תוכן להחזיק מעמד

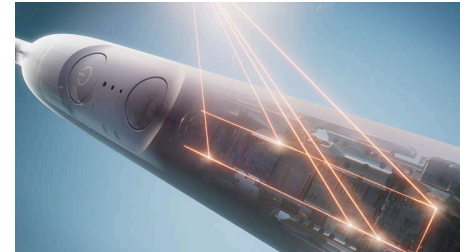

עיצבנו מחדש את מברשות השיניים של פיליפס מסדרת מפנים המברשת החוצה, כדי שתהיינה Sonicare חזקות, קלות ועמידות. בזכות תהליך ההלחמה בלייזר המתקדם שלנו, מברשות השיניים שלנו תוכננו לצחצוח אצלכם במשך שנים רבות.

## עד 3 שבועות בין טעינות



מברשת שיניים זו משתמשת בסוללה בעלת ביצועים גבוהים שתוכננה לשיפור חוויית הצחצוח שלכם. בטעינה אחת, אתם יכולים ליהנות מעד שלושה שבועות של צחצוח לפני שיהיה עליהם לטעון אותה מחדש.

## נרתיק לנסיעות קומפקטי



נרתיק הנסיעות שלנו שתוכן מחדש קומפקטי דיו כדי להיכנס לתיק, וחזק דיו כדי להגן על מברשת השיניים של פיליפס בדרכים. הוא לא רק מגן על מברשת השיניים שלכם, אלא גם מחזיק בנוחות שני ראשי מברשת. כעת תוכלו לנסוע בביטחון לכל מקום שהמסע ייקח אתכם.

# Specifications

## עוצמות

גבוה: לשיפור הניקיון  
בינוני: לניקוי יומיומי  
נמוכה: לשיניים ולחניכיים רגישות

## חשמל

מתח: 100-240 V

## מפרט טכני

משך הפעלה (ממלא עד לריק): 21 יום  
סוללה: נטענת  
צריכת אנרגיה: מצב המתנה ללא תצוגה >0.5 ואט  
סוג סוללה: ליתיום-יון

## עיצוב וגימור

צבע: שחור

## שירות

אחריות: אחריות מוגבלת לשנתיים

## קל לשימוש

תאימות הידית: ראשי מברשת בלחיצה קלה  
מחזון סוללה: הסמל המואר מציין את יתרת המתח  
בסוללה  
ידית: עיצוב ארגונומי דק  
לצחצוח מלא ויסודי I-BrushPacer SmarTimer: טיימר  
בטעינה: ספק כוח לא כלול USB-A

## הפריטים הכלולים

ידית: 1 6100 מברשת שיניים נטענת  
S2 Sensitive ראש המברשת: 1  
נרתיק לנסיעות: 1 נרתיק רך לנסיעות  
מטען: 1

## ביצועי ניקוי

\*הסרת פלאק: יעילה יותר עד פי 10  
\*\*בריאות חניכיים: חניכיים בריאות יותר עד פי 5  
מהירות: 62,000 תנועות צחצוח / דקה

## מצבים

ניקוי: לניקוי יומיומי מיוחד  
Sensitive: לשיניים ולחניכיים רגישות

## טכנולוגיית חיישנים חכמה

משוב על לחץ: אור הטבעת מאיר בסגול, רטט וצליל  
פעימה מופחתים  
מודיע לכם מתי להחליף BrushSync: תזכורת החלפה  
את ראש המברשת

