

PHILIPS



Фотоепилатор за
обезкосмяване със SenseIQ

Lumea IPL 9900 Series

Сензор SmartSkin

2 интелигентни приставки: за
тяло и лице

Ексклузивни функции на
приложения с изкуствен
интелект

Използване без кабел и с кабел



BRI950/01

Нашият най-интелигентен IPL с ексклузивните функции SkinAI

Насладете се на гладка кожа без косъмчета за 12 месеца*

Открийте нашето най-интелигентно IPL решение за дълготрайно гладка кожа. Нашето най-бързо безжично Lumea IPL устройство с технология SenseIQ вече разполага с ексклузивни функции на SkinAI в приложението Lumea IPL, за да анализира кожата ви и да проследява напредъка ви.

Нежен и ефективен за дълготрайно гладка кожа

- Бързи резултати с процедури само на всеки 2 седмици
- За удобство с кабелни и безкабелни опции
- Разработен с помощта на дерматолози, за да бъде лесен и ефективен

Пълно решение за лицето и тялото

- Пълно решение за лицето и тялото с 2 интелигентни приставки
- Подходящ за повечето тонове на кожата и цветове на косъма

Персонализирано третиране с IPL обезкосмяване

- Нежен и удобен със SenseIQ
- Анализ на окосмяването на Smart Body със SkinAI

Lumea IPL 9900 Series

Фотоепилатор за обезкосмяване със SenseIQ

BRI950/01

Акценти

2 пъти на месец за бързи резултати




Започнете с началната фаза от 4 процедури само на всеки 2 седмици – това е наполовина по-малко процедури от други марки. След това коригирайте месечно, за да поддържате резултатите.

Технология SenseIQ



Сериата Lumea 9900 има пет леснорегулируеми настройки на светлината. Нашият сензор SmartSkin прочита тона на кожата Ви и Ви помага да намерите най-удобната настройка. Интелигентните приставки адаптират третирането за всяка област на тялото.

За удобство с кабелни и безкабелни опции

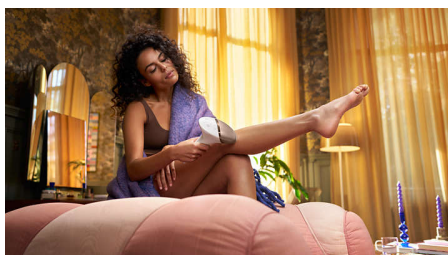

Philips Lumea е проектиран да бъде удобен и лесен за използване. Използвайте устройството с кабел за бързо третиране на

големи зони на тялото, като краката, или използвайте безкабелния модел с батерия, за да третирате прецизно труднодостъпните зони на тялото.

2 интелигентни приставки




Специално проектираните приставки перфектно пасват на извивките на тялото ви и задействат най-ефективните програми за всяка област на тялото, когато са свързани. Лице: плосък дизайн и малък прозорец с UV филтър. Тяло: извити навътре с голям прозорец.

Разработено с помощта на дерматолози



Като лидер в областта на здравните технологии, Philips разработи Lumea IPL в консултация с дерматолози – за лесно и ефективно използване в безопасността на Вашия дом. Благодарение на технологията, използвана в професионалните салони, Lumea IPL предлага нежно третиране – дори и на чувствителни зони.

Изключителни функции на SkinAI

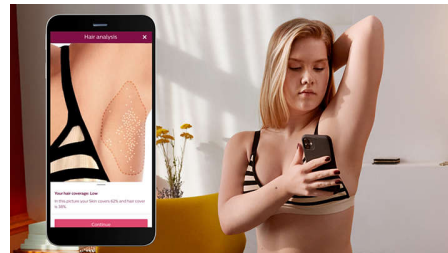

Нашето безплатно приложение за инструктиране вече предлага насоки стъпка по стъпка с изключителна SkinAI технология, с която да анализирате окосмяването по тялото и да проследявате неговото намаляване.

За повечето типове кожа и косми



Фотоепилаторът се нуждае от контраст между пигмента в цвета на косъма и пигмента в тона на кожата, поради което е ефективен при естествено тъмнорус, кафяв и черен косъм и при тонове на кожата от светла до тъмнокафява (I – V).

Спецификации

Технически спецификации на приставките

Приставка за третиране на тялото: Форма: изпъкнала извивка, Размер на прозорец: 4,1 см², Персонализирано третиране на тялото: крака, ръце и стомах

Приставка за третиране на лицето: Форма: плоска, Прозорец с размер: 2 см², допълнителен филтър, Персонализирано третиране на лицето: горна устна, брадичка и челюст

Безопасност и регулируеми настройки

Вграден UV филтър: Предпазва кожата от UV светлината

5 настройки за светлинната енергия:

Регулируеми според вашия тип кожа

Вградена система за безопасност:

Предотвратява случайното генериране на импулс

Сензор за тон на кожата: Установява цвета на кожата ви

Сензор SmartSkin: Индикация за правилната настройка по желание

Режим на приложение

Плъзгане и импулс: За бързо приложение

Прилагане и импулс: За третиране на малки зони

Употреба с кабел/без кабел: Използване без кабел и с кабел

Технически спецификации

Тип батерия: Акумулаторна батерия

Напрежение: 100-240 V

Лампа с високи работни характеристики:

Създаден, за да издържи, осигурява 450 000 импулса, еквивалентни на 39 години живот на лампата****

Сервизно обслужване

Гаранция: 2-годишна гаранция + 1 допълнителна година гаранция при регистрация на продукта в рамките на 90 дни

Включени артикули

Инструкции за употреба: Ръковод. за потребителя

Съхранение: Луксозен калъф

Адаптер: 19,5 V/4000 mA

Време на приложение

Долна част на крака: 8,5 мин

Долна част на ръцете: 2,5 мин

Бикини линия: 2 мин

Зони на лицето: 1,5 мин



* Средно намаляване на окосмяването след 12 третираня: 86% на подбедрицата, 70% на бикини зоната, 67% на подмишниците

** При следване на графика за третиране. Изчислено за използване върху подбедрицата, бикини зоната, подмишниците и лицето. Продължителността на живота на лампата не удължава 2-годишната международна гаранция на Philips