

PHILIPS



Urządzenie IPL do depilacji
światłem z SenseIQ

Lumea IPL 8000 Series

Czujnik SmartSkin

1 inteligentna nasadka: ciało

Aplikacja Lumea IPL

Działanie sieciowe



BRI940/00

Dostosowane do Ciebie dzięki SenseIQ

Jedwabiście gładka skóra przez 12 miesięcy*

Szybki i spersonalizowany zabieg dzięki naszej serii Lumea IPL 8000. Technologia SenseIQ z inteligentnymi nasadkami i aplikacją Lumea IPL zapewnia długotrwałą gładkość skóry.

Delikatność i skuteczność zapewniające długotrwałą gładkość skóry

- Szybkie rezultaty z zabiegami tylko co 2 tygodnie
- Stworzone wspólnie z dermatologami dla bezpiecznej i delikatnej depilacji
- Wyjątkowo długi przewód zapewniający wygodę w trakcie zabiegu

Rozwiązanie do ciała

- Odpowiednie dla większości odcieni skóry i kolorów włosów
- Rozwiązanie do ciała z 1 inteligentną nasadką

Spersonalizowany zabieg depilacji IPL

- Delikatność i komfort dzięki technologii SenseIQ
- Zoptymalizuj swoje zabiegi za pomocą aplikacji Philips Lumea IPL

Lumea IPL 8000 Series

Urządzenie IPL do depilacji światłem z SenseIQ

BRI940/00

Zalety

Dla szybkich rezultatów wykonuj zabieg dwa razy w miesiącu



Rozpocznij od fazy początkowej składającej się z 4 zabiegów wykonywanych co 2 tygodnie — to o połowę mniej zabiegów niż w przypadku innych marek.

Technologia SenseIQ



Lumea serii 8000 została wyposażona w pięć regulowanych ustawień mocy światła. Nasz czujnik SmartSkin analizuje odcień skóry, aby wybrać ustawienia zapewniające największy komfort zabiegu. Inteligentne nasadki dostosowują zabieg do każdego obszaru ciała.

Wyjątkowo długi przewód



Dzięki wyjątkowo długiemu przewodowi i łatwości manewrowania urządzenie jest bardzo wygodne w użyciu.

1 inteligentna nasadka



Specjalnie zaprojektowana nasadka jest zakrzywiona do wewnątrz, aby zapewnić optymalny kontakt ze skórą podczas zabiegów na dużych obszarach, takich jak nogi. Program dostosowany do indywidualnych potrzeb jest uruchamiany po podłączeniu.


Opracowano we współpracy z dermatologami



Firma Philips — lider w dziedzinie rozwiązań technologicznych dla zdrowia — opracowała urządzenie do depilacji Lumea IPL we

współpracy z dermatologami, dzięki czemu jest ono proste w użyciu, skuteczne i bezpieczne. Zastosowanie technologii używanej w profesjonalnych salonach sprawia, że zapewnia ono bardzo delikatne usuwanie owłosienia, także we wrażliwych obszarach ciała.

Aplikacja Philips Lumea IPL

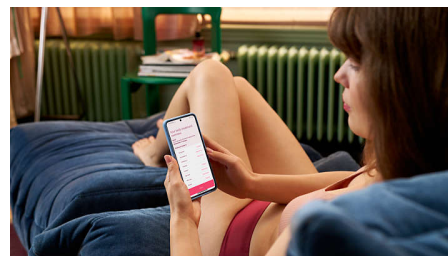

Nasza bezpłatna aplikacja pomoże Ci zaplanować i zrealizować harmonogram zabiegów, a następnie poprowadzi Cię krok po kroku przez każdą sesję. Aplikację pobrało ponad 2,1 miliona użytkowników.

Rozwiązanie dla większości typów skóry i włosów



Urządzenie IPL bazuje na kontraście pomiędzy pigmentem we włosach a pigmentem skóry, dlatego działa w przypadku włosów w kolorze naturalnego ciemnego blondu, brązu oraz czarnych, a także skóry o odcieniu od jasnego do ciemnego brązu (I–V).

Dane techniczne

Dodatki dotyczące specyfikacji technicznych

Nasadka do depilacji ciała: Kształt: wypukły, Rozmiar okienka: 4,1 cm², Idealna do depilacji ciała: nogi, ręce, brzuch

Bezpieczeństwo i konfigurowalne ustawienia

Wbudowany filtr UV: Ochrona skóry przed promieniami UV

Pięć ustawień energii światła: Możliwość dostosowania do typu skóry

Wbudowany system bezpieczeństwa:

Zabezpieczenie przed przypadkowym wyzwaniem błysków

Czujnik odcienia skóry: Rozpoznaje odcień skóry

Czujnik SmartSkin: Wskaźnik odpowiedniego ustawienia na żądanie

Tryb aplikacji

Tryb przesunięcia i błysku: Do szybkiego zastosowania

Tryb przyłożenia i błysku: Do użycia na małych obszarach ciała

Obsługa przewodowa/bezprzewodowa:

Działanie sieciowe

Dane techniczne

Napięcie: 100–240 V

Wysokowydajna lampa: Dostarcza 450 000 błysków, co odpowiada 39 latom eksploatacji lampy**

Serwis

Gwarancja: Dwuletnia gwarancja obowiązująca na całym świecie + dodatkowy rok gwarancji po rejestracji produktu w ciągu 90 dni

Elementy wchodzące w skład zestawu

Instrukcja obsługi: Instrukcja obsługi

Przechowywanie: Eleganckie etui

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Czas aplikacji

Okolica pod pachami: 2,5 min

Linia bikini: 2 min

Podudzia: 8,5 min

