

PHILIPS



Laddningsbar sonisk
tandborste

7100

Tar bort upp till tio gånger mer
plack

4 lägen, 3 intensitetsnivåer

Synlig tryckvarning

Philips Sonicare-appen



HX7423/09

Perfekt rengöring med upp till 7x friskare tandkött*

Tar bort upp till tio gånger mer plack**

Philips Sonicare 7100 har nästa generations Sonicare-teknik, fyra borstlägen, tre intensitetsnivåer, en synlig tryckvarning och vårt G3 Premium Gum Care-borsthuvud.

Enkel borstning

- Skydda tandköttet med den synliga tryckvarningen
- Du vet alltid när det är dags för ett nytt borsthuvud
- Anpassa din rengöring med tolv borstinställningar
- Förbättra din rutin med Philips Sonicare-appen

Överlägsen rengöring


- Nästa generations Sonicare-teknik

Utformad för din livsstil

- Optimera din borstning med SmarTimer och BrushPacer
- Lasersvetsad för tålighet och hållbarhet
- Upp till tre veckors borstning med en full laddning
- Res enkelt med vårt förstklassiga laddningsfodral för resor


Funktioner

Nästa generations Sonicare-teknik

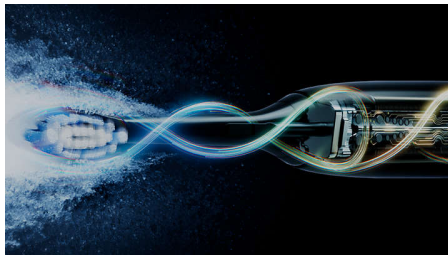

Få en härlig borstningsupplevelse och en ny nivå av munvård med nästa generations Sonicare-teknik. Medan du borstar justerar tandborstens innovativa magnetsystem borsteffekten under varje borstningstillfälle, vilket ger optimal prestanda med 62 000 borsttag per minut, även i svåråtkomliga områden. Samtidigt hjälper den dynamiska vätskerörelsen borsten att avlägsna plack, så att du får en komplett rengöring varje gång du borstar.


Tolv borstinställningar

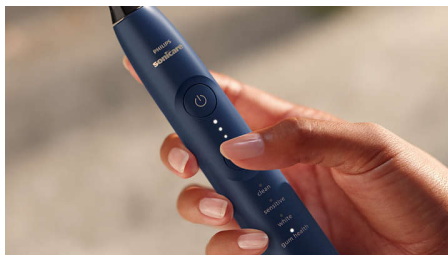

Med Philips Sonicare 7100 kan du själv bestämma hur du vill borsta tänderna. Fyra borstlägen hjälper dig att ta hand om tandköttets hälsa, blekning, känslighet och daglig rengöring. Gum Health-läget hjälper dig att få ett friskt tandkött genom att försiktigt massera längs tandköttsskanten. White-läget tar bort ytliga fläckar och polerar tänderna för ett vitare leende. Sensitive-läget ger en skonsam och noggrann rengöring, medan Clean-läget


fokuserar på att ta bort plack för en överlägsen rengöring. För en anpassad rengöring kan du kombinera valfritt läge med en av tre intensitetsnivåer, från hög till låg, för en borstning som passar just dig.

Tryckvarning med ljusring

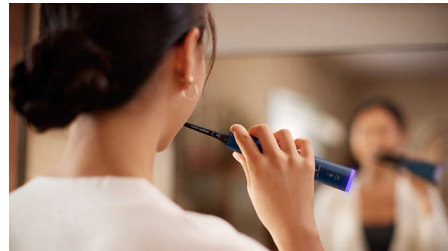

Du kanske inte märker när du borstar för hårt, men det gör den här tandborsten. Den smarta optiska sensorn upptäcker överdrivet borsttryck och blinkar sedan lila samtidigt som vibrationen minskar. Du vet alltid när du ska justera din borstning och ditt tandkött skyddas.

Philips Sonicare-appen

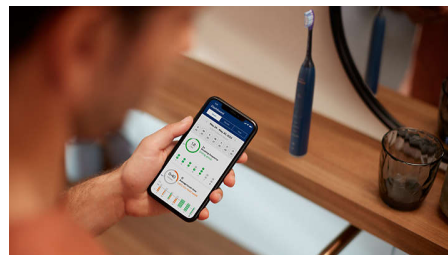

Philips Sonicare-appen parkopplas smidigt med din tandborste och hjälper dig att förbättra och upprätthålla din munhälsa. Vår app registrerar dina borstningsresultat och ger personlig vägledning och lägesrapporter så att du får värdefulla insikter om din borstning.

Tvåminuterstimer och borstintervaller



Två minuter är allt du behöver för en fullständig rengöring, och vår SmarTimer meddelar dig när tiden är ute. För en jämn rengöring i hela munnen delar BrushPacer upp din rengöring i segment, där en liten paus i vibrationen är ditt tecken på att du ska gå vidare. Detta hjälper dig att uppnå en jämn rengöring varje gång du borstar.

Påminnelse om att byta BrushSync



Att byta ut borsthuvudet regelbundet är en viktig del av att upprätthålla en god munhälsa. Med BrushSync-tekniken är det enkelt att se till att ditt borsthuvud fungerar optimalt. Genom att spåra din användningsfrekvens och borstningsintensitet påminner den innovativa tekniken dig när det är dags för ett nytt borsthuvud.

Funktioner

Utformad för att hålla



Vi har designat om våra Philips Sonicare-tandborstar från insidan och ut för att de ska vara tåliga, lätta och hållbara. Tack vare vår avancerade lasersvetsningsprocess är våra tandborstar utformade för att hålla i många år framöver.

Upp till tre veckor mellan laddningstillfällen



Den här tandborsten har ett högpresterande batteri som är konstruerat för att förbättra din borstningsupplevelse. Med en enda laddning får du upp till tre veckors regelbunden borstning innan du behöver ladda tandborsten.

Laddningsfodral för resan



Vårt omdesignade laddningsfodral för resor med en inbyggd USB-C-port och laddningskabel gör att du kan ladda din tandborste när du är på språng utan att behöva öppna fodralet. Det är inte bara tillräckligt tåligt för att skydda tandborsten på vägen, utan det är även tillräckligt kompakt för att få plats i vilken väska som helst, vilket gör det till det perfekta resesällskapet.

Specifikationer

Intensitetsnivåer

Hög: För att förbättra din rengöring

Medium: För daglig rengöring

Låg: För känsliga tänder/känsligt tandkött

Effekt

Spänning: 100-240 V

Tekniska specifikationer

batteri: Laddningsbar

Drifttid (full till tom): 21 dagar

Batterityp: Litiumjon

Design och finish

Färg: Marinblå

Service

Garanti: 2 års begränsad garanti

Kompatibilitet

Kompatibilitet med Android: Android-telefoner med Bluetooth 4.0 och senare

Trådlös Bluetooth-teknik: Ansluten

borstningsapp

iOS-kompatibilitet: iPhone med Bluetooth 4.0 och senare

Lättanvänd

Handtag: Tunn, ergonomisk design

Batteriindikator: Belyst ikon indikerar batteriets livslängd

Skafthkompatibilitet: Borsthuvud som enkelt knäpps på

Timer: SmarTimer och BrushPacer, för komplett och noggrann borstning

USB-A-laddning: Nätadapter medföljer inte

Medföljande tillbehör

Handtag: 1 7100 laddningsbar tandborste

Borsthuvud: 1 G3 Premium Gum Care

Resefodral: 1 laddningsresefodral

Laddare: 1

USB-A-kabel: 1

Rengöringsprestanda

Plackborttagning: Upp till tio gånger mer effektiv**

Friskare tandkött: Upp till sju gånger friskare tandkött*

Hastighet: 62 000 borsttag/min

Lägen

Rengöra: För överlägsen daglig rengöring

Vit: För att ta bort missfärgningar

Friskare tandkött: Masserar tandköttet varsamt

Sensitiv: För känsliga tänder/känsligt tandkött

Smart-sensorteknologi

Tryckfeedback: Ljusring som lyser lila, Minskad vibration och pulserande ljud

Bytespåminnelse: BrushSync meddelar dig, när det är dags att byta ut borsthuvudet

