

PHILIPS

sonicare



Električna zobna ščetka
s tehnologijo SenseIQ

DiamondClean Prestige
9900

Naša najnaprednejša zobna
ščetka

SenseIQ zaznava, se prilagaja in
neguje

Glava ščetke vse v enem

Sonicare na osnovi umetne
inteligence



HX9992/02

Izjemna nega, osebno prilagojena s tehnologijo SenseIQ

Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 s tehnologijo SenseIQ je naša najnaprednejša električna zobna ščetka. Naša dokazana sonična tehnologija je izboljšana z inteligenco, zaznavanjem in prilagajanjem za celostno nego, da boste vedno vse naredili prav.

S tehnologijo SenseIQ boste vedno vse naredili prav

- Prilagaja se vam v realnem času, kadar premočno pritiskate
- Povratne informacije o ščetkanju v realnem času
- Tehnologija SenseIQ zaznava, se prilagaja in neguje
- Zaznava vaš slog ščetkanja
- Intuitivno neguje zobe in dlesni

Vam prilagojeno čiščenje brez kompromisov

- Glava ščetke vse v enem za popolno nego
- Osebno prilagojeno vodenje z aplikacijo Philips Sonicare
- Sonično ščetkanje: vadbica o učinkovitem čiščenju

Vrhunska dodatna oprema

- Enostavno polnjenje z minimalističnim stojalom in podstavkom
- Potovalna torbica Prestige z USB-jem za na pot

Zasnova po vaši meri

- Elegantna in kompaktna zasnova

DiamondClean Prestige 9900

Električna zobna ščetka s tehnologijo SenseIQ

Značilnosti

Elegantno in kompaktno



Izkušnja Sonicare DiamondClean 9900 Prestige temelji na napredni tehnologiji ter slogu in kompaktnosti. Zobna ščetka je 18 mm krajša od modela DiamondClean in je izdelana iz vrhunskih materialov, zaradi česar je ta razkošna naprava čudovitega videza in prijetna na otip.

Prilagaja se vam v realnem času




Večina nas med umivanjem zob preveč pritiska ščetko. Zato naša zobna ščetka samodejno prilagaja intenzivnost, ko pritiskate preveč. Hkrati brezplačna aplikacija Philips Sonicare nudi vam prilagojena navodila in nasvete za bistveno boljše umivanje zob.

Enostavno polnjenje

Ko morate zobno ščetko napolniti, jo položite na polnilno postajo. Idealno za občudovanje izčiščene in sodobne oblike zobne ščetke.


Glava ščetke Premium vse v enem

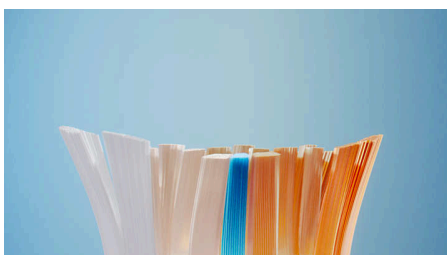

Ščetka A3 Premium vse v enem za popolno umivanje zob. Naša najboljša glava ščetke doslej ima poševne ščetine, ki pomagajo odstraniti 20-

krat več zobnega kamna tudi na težko dostopnih mestih*. Trikotne konice odstranijo do 100 % več madežev v manj kot dveh dneh***. Daljše ščetine hkrati omogočajo globoko čiščenje dlesni, ki postanejo do 15-krat bolj zdrave že v dveh tednih**. Vse to brez menjanja glav ščetke. Ste vedeli, da glava ščetke postane manj učinkovita po 3 mesecih uporabe? Naša funkcija BrushSync™ vas lahko opomni, ko bo kmalu čas za menjavo.

Potovalna torbica Prestige z USB

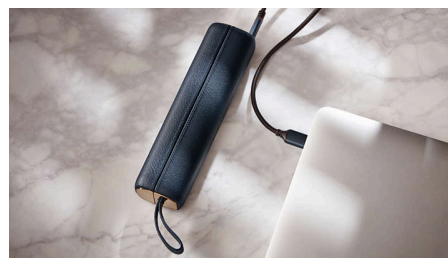

Elegantno in kompaktno potovalno torbico lahko priročno pospravite v vsako torbo in ste tako brez skrbi, ko ste zdoma. Trpežna torbica je izdelana iz mehkega veganskega usnja. Za še lažjo uporabo ima vgrajena vrata USB-C in priložen polnilni kabel USB, s katerim lahko preprosto napolnite zobno ščetko, ne da bi jo vzeli iz torbice.

Vam prilagojeno vodenje




Aplikacija Philips Sonicare temelji na umetni inteligenci in deluje povsem usklajeno s ščetko. Med umivanjem zob vam lahko nudi sprotna navodila glede pritiska, gibanja, površine, trajanja in pogostosti umivanja. Ogledate si lahko dnevna, tedenska, mesečna in letna poročila o napredku. Na voljo so vam osebno prilagojena priporočila in koraki za boljše umivanje zob. Ob tem samodejna sinhronizacija

HX9992/02


skrbi za posodobljenost podatkov o ščetkanju v aplikaciji, tudi ko je med ščetkanjem nimate ob sebi.

Povratne informacije v realnem času

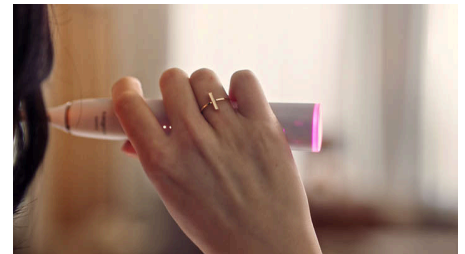

Sami morda ne opazite, da pri ščetkanju pritiskate premočno ali drgnete, vendar ščetka to zazna. Svetleči obroček na koncu ročaja vas bo nežno opomnil, da morate popustiti pritisk ali prenehati z drgnjenjem.

Dokazano sonično ščetkanje

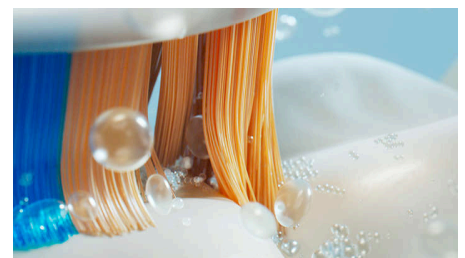

Odstranite zobne obloge s sonično tehnologijo, našim standardom za učinkovito in nežno čiščenje. Med ščetkanje vam do 62.000 gibov ščetin z dinamičnim in tekočim čiščenjem pomaga pri čiščenju tudi težko dostopnih mest ter poskrbi za izjemno svež in čist občutek v ustih.

DiamondClean Prestige 9900

Električna zobna ščetka s tehnologijo SenseIQ

HX9992/02

Značilnosti

Tehnologija SenseIQ



Med ščetkanjem tehnologija SenseIQ do 100-krat na sekundo zazna pritisk, gibanje, površino ščetkanja in še več. Nato prilagodi moč, če preveč pritiskate. Ob inteligenci SenseIQ ni več treba razmišljati o načinih ščetkanja, zato boste lahko z lahkoto skrbeli za svoje zobe in trajno boljšo higieno.

Zaznava vaš slog ščetkanja



Med čiščenjem zob ščetka Philips Sonicare 9900 Prestige s senzorji zazna, kako močno pritiskate, ter gibanje in površino ščetkanja – do 100-krat na sekundo. Senzorji zaznavajo tudi, kako dolgo in pogosto si umivate zobe.

Skrbi za zdravje ustne votline



Philips Sonicare Diamond Clean Prestige 9900 je zasnovana posebej za vas. Najsodobnejša tehnologija je prilagojena vam in tako enostavna za uporabo, da je skoraj ne boste opazili. Navsezadnje rezultati povedo vse.

DiamondClean Prestige 9900

Električna zobna ščetka s tehnologijo SenseIQ

HX9992/02

Specifikacije

Posodobitev izdelka

Obdobje podpore: Philips bo zagotavljal potrebne varnostne posodobitve do 31. decembra 2026.

Povezljivost

Brezžična tehnologija Bluetooth®: Aplikacija, ki se poveže z zobno ščetko

Napajanje

Napajanje: 110–220 V

Tehnične specifikacije

Čas delovanja (od polne do prazne): Več kot 2 tedna****

Baterija: Za polnjenje

Vrsta baterije: Litij-ionska

Poraba energije: Stanje pripravljenosti brez prikaza < 0,5 W

Zasnova in izdelava

Barva: Polnočno modra

Servis

Garancija: 2-letna omejena garancija

Združljivost

Podpora za Android: Android OS 8.0 ali novejša različica

Podpora za iOS: Naprave iPhone s sistemom iOS 13.0 ali novejšo različico

Enostavna uporaba

Združljivost ročaja: Enostavno pritrdljive glave ščetke

Ročaj: Elegantna in kompaktna zasnova,

Enostavno upravljanje na dotik

Indikator baterije: Osvetljena indikatorska ikona

Potovalna torbica: Elegantna in kompaktna

polnilna torbica, Vegansko usnje

Opomnik za zamenjavo BrushSync: Opozorilna

ikona zasveti, za vedno najboljše rezultate

Priloženi predmeti

Ročaj: 1 x DiamondClean Prestige 9900

Glave ščetke: 1 x A3 Premium vse v enem

Polnilna torbica USB Prestige: 1

Podstavek polnilnika: 1

Kabel USB: 1

Učinkovitost čiščenja

Pozitivni vplivi na zdravje: Do 15-krat bolj zdrave dlesni**

Zmogljivost: Odstrani do 20-krat več zobnih oblog*

Časovnik: BrushPacer in SmarTimer

Prispeva k bolj belim zobem: Do 100 % manj madežev***

Hitrost: Do 62.000 gibov ščetke/min

Povratne informacije o pritisku: Obroč zasveti vijolično, Z vibriranjem ročaja opozarja uporabnika

Povratne informacije o drgnjenju: Obroč zasveti oranžno, Z vibriranjem ročaja opozarja uporabnika, Možnost vklopa/izklopa v aplikaciji

Podpora za programsko opremo

Posodobitve programske opreme: Družba Philips nudi ustrezne posodobitve programske opreme v obdobju 2 let od datuma nakupa.

Tehnologija SenseIQ

Senzor pritiska: Opozori, ko je ščetkanje premočno

Senzor položaja: Beleži površino pokritosti, pri vsakem ščetkanju

Senzor drgnjenja: Poskrbi za zmanjšanje drgnjenja

3D-prikaz ust: Označi neočiščene predele

Prilagodljiva intenzivnost: Prilagaja intenzivnost, ob premočnem pritiskanju

Umetna inteligenca: Zaznava in sinhronizira ščetkanje

Aplikacija Sonicare z umetno inteligenco

Vodenje v realnem času: Uporabniku prilagojena priporočila, Dnevno/mesečno/letno poročilo o napredku

Prilagodljivi načini: Clean, White+, Zdrave dlesni, Globinsko čiščenje, Sensitive

