

**PHILIPS**

**AVENT**



Extractor de leche  
eléctrico simple

Hands-free

Imita el ritmo de ingesta del bebé

Libertad al extraer leche

Fácil de usar, limpiar y armar

Ajuste perfecto e inclusivo



SCF531/11

## Gane libertad y tiempo.

### Imita el ritmo de ingesta del bebé

El extractor de leche eléctrico simple con manos libres de Philips Avent está diseñado para una extracción de alto rendimiento\* y cómoda. Imita el ritmo de su bebé y, gracias a su potencia, suavidad y ligereza, es su compañero ideal de extracción manos libres.

#### **Libertad corporal durante la extracción**

- Muévase con libertad gracias al vaso de recolección ultraliviano
- Comodidad portátil para maximizar sus movimientos

#### **Imita el ritmo de ingesta del bebé**

- Extraiga leche con eficacia\* siguiendo un ritmo que imita el de su bebé
- Extracción silenciosa y de grado hospitalario

#### **Fácil de usar, fácil de limpiar y fácil de armar**

- Realice un seguimiento del flujo de leche con el vaso de recolección que es completamente transparente
- Personalice su sesión de extracción
- Fácil de limpiar y armar con pocas piezas.

#### **Ajuste perfecto e inclusivo**

- Variedad de tamaños en protectores mamarios e insertos para cada mamá
- El protector de silicona se adapta suavemente a la forma de su mama

## Hands-free

Extractor de leche eléctrico simple

SCF531/11

# Destacados

### Imita el ritmo de ingesta del bebé



Los bebés saben cómo alimentarse de la mejor manera. Es por eso que nuestro extractor de leche eléctrico de manos libres imita su ritmo natural de ingesta, para que usted pueda encontrar su propio ritmo y disfrutar de una extracción eficaz\* y óptima de leche. El extractor manos libres Philips Avent bombea hasta 85 veces por minuto, por lo que es dos veces más rápido que la mayoría de los extractores de leche\*\*.

### Motor de grado hospitalario




La unidad motora casi no emite sonidos y proporciona la potencia de grado hospitalario que espera de un extractor de leche tradicional, pero con un formato compacto y portátil. Gracias a su batería recargable, la unidad motora inalámbrica extrae leche de manera potente y discreta en cualquier lugar.

### Protectores únicos SkinSense



Nuestro exclusivo protector mamario de silicona SkinSense está diseñado para brindar la máxima comodidad y seguir con suavidad la forma de la mama mediante la calidez natural del cuerpo. El protector mamario está fabricado con silicona apta para alimentos, lo que brinda una tranquilidad absoluta.

### Recolección transparente

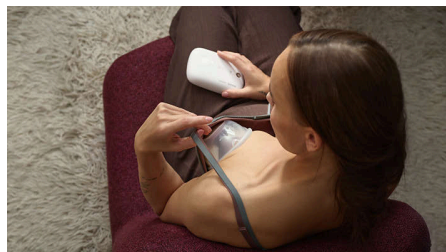

Los vasos de recolección transparentes ofrecen una visión clara del interior: podrá colocar correctamente su pezón para extraer leche de la mejor manera y llevar un control visual de la cantidad extraída. Brinda un uso seguro desde la primera gota hasta el final.

### Vaso de recolección ultraliviano



Nuestro vaso de recolección pesa solo un poco más de 100 gramos cuando está vacío: es hasta tres veces más ligero que un extractor de leche totalmente portátil. El vaso se acomoda fácilmente dentro del sujetador, por lo que casi no notará que lo lleva puesto.


### Úselo a su manera



Nuestro extractor cuenta con una correa de transporte trenzada y un clip para ropa con el que podrá usar la unidad motora cruzada al cuerpo o ajustada a la cintura. Con la libertad de usarlo a su manera, no tendrá preocupaciones, ya que usted lleva el control. Utilice el acoplador de tubo y el regulador de correa para ajustar el extractor con precisión.

# Destacados

### Extracción personalizada

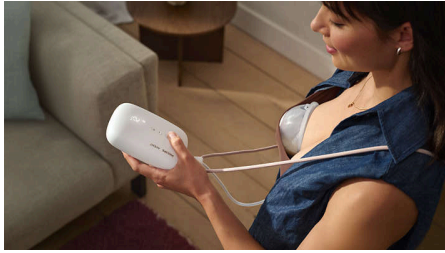

Aproveche al máximo cada sesión con 8 niveles de succión para estimular el flujo de leche y 16 niveles de succión para extraerla. Puede ajustar el formato de extracción y el dispositivo lo almacenará automáticamente para que la configuración ideal siempre esté lista para usar.

### Fácil de limpiar y de armar



Diseñamos nuestra bomba y accesorios para que sean lo más simples posible. Con solo unas pocas piezas de conexión, cada vaso de recolección es fácil de desmontar, limpiar (a mano o en un lavaplatos), desinfectar y volver a ensamblar.

### Encuentre el tamaño adecuado



Apoyamos a todas las mamás para que se sientan lo mejor posible, y que disfruten del ajuste adecuado es una parte esencial de nuestro propósito. Nuestra gama de tamaños de protectores mamarios e insertos de protección se adapta al 99 % de las madres. Están disponibles para comprarlos por separado, con el fin de que puedan disfrutar de la máxima comodidad mientras extraen leche.

# Especificaciones

**Potencia eléctrica**

Origen: Batería recargable/USB-C (adaptador no incluido)

**Material**

Vaso, tapa frontal, cubierta del protector mamario: Polipropileno  
Protector mamario, membrana, válvula, inserto: Silicona líquida  
Tubo de silicona: Silicona

**Qué se incluye**

Cable USB-C: 1 pieza  
Correa de transporte: 1 pieza  
Unidad motora recargable (con clip extraíble):

1 pieza  
Vaso de recolección (montado): 1 pieza  
Tubos de silicona: 1 pieza  
Cubierta (para polvo) del protector mamario: 1 pieza  
Protector mamario (21 mm, 24 mm): 1 pieza cada una  
Ficha de medidas para el tamaño de la tetina: 1 pieza  
Inserto de 19 mm: 1 pieza

**Facilidad de uso**

Uso del extractor de leche: Fácil de usar, fácil de limpiar y fácil de armar

**Funciones**

Flexibilidad de movimiento: Extracción manos libres  
Ajustes de personalización: 16 niveles de succión en el modo de extracción, 8 niveles de succión en el modo de estimulación  
Unidad motora: Batería recargable/USB-C, Cargar por completo la batería lleva hasta 1,5 horas y dura aproximadamente 5 sesiones de extracción  
Protector mamario y especificaciones de inserto: Varios tamaños disponibles para ofrecer el mejor ajuste



\* La eficacia se relaciona con el rendimiento técnico del producto.  
\*\* Referencia a la frecuencia de succión del extractor.  
\*\*\* Con base en nuestra completa gama de protectores mamarios e insertos.