

PHILIPS



Epilator IPL cu
SenseIQ

Lumea IPL 9900
Series

Senzor SmartSkin

3 atașamente inteligente: corp,
față, precizie

Caracteristici aplicație cu IA
exclusivă

Utilizare cu și fără fir



BRI953/02

Cel mai inteligent IPL al nostru cu funcții SkinAI exclusive

Bucură-te de 18 luni de piele fină, fără păr*

Descoperă cea mai inteligentă soluție IPL de până acum pentru o piele netedă de durată. Cel mai rapid dispozitiv IPL Lumea fără fir cu tehnologie SenseIQ este dotat acum cu funcții exclusive SkinAI în aplicația Lumea IPL pentru a analiza pielea și a monitoriza progresul.

Delicat și eficient pentru piele fină de lungă durată

- Pentru rezultate rapide, tratamentul se aplică doar de 2 ori pe lună
- Pentru confort cu opțiuni cu fir și fără fir
- Dezvoltat împreună cu dermatologi pentru a fi ușor și eficient

Soluție completă pentru față și corp

- Soluție completă pentru față și corp cu 3 accesorii inteligente
- Adecvat pentru majoritatea tonurilor pielii și culorilor părului

Tratament personalizat IPL pentru îndepărtarea părului

- Delicat și confortabil cu SenseIQ
- Analiza inteligentă a părului de pe corp cu SkinAI

Lumea IPL 9900 Series

Epilator IPL cu SenseIQ

BRI953/02

Repere

De 2 ori pe lună pentru rezultate rapide




La fiecare 2 săptămâni pentru a începe – aceasta înseamnă jumătate din numărul de tratamente de la alte mărci. Urmată de retușuri doar o dată pe lună. Asta e tot. Tratarea ambelor gambe durează 8,5 minute.

Tehnologie SenseIQ



Lumea seria 9900 are cinci setări de lumină ușor de reglat. Senzorul SmartSkin îți citește nuanța pielii și te ajută să găsești setarea cea mai confortabilă. Accesorii inteligente adaptează tratamentul pentru fiecare zonă a corpului.

For convenience with corded and cordless options

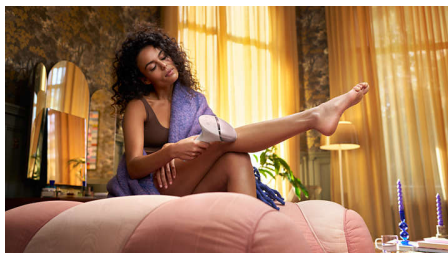

Philips Lumea este conceput pentru a fi comod și ușor de utilizat. Folosește dispozitivul cu fir pentru un tratament rapid pe zone mari ale

corpului, cum ar fi picioarele, sau alege modul fără fir cu baterie pentru a trata cu precizie zonele greu accesibile ale corpului.

3 accesorii inteligente




Accesorii special concepute se potrivesc perfect curbilor corpului și declanșează cele mai eficiente programe pentru fiecare zonă a corpului atunci când sunt conectate. Față: Design plat și fereastră mică cu filtru UV. Corp: Curbat spre interior cu o fereastră mare. Precizie: Curbat spre exterior pentru zonele greu accesibile.

Dezvoltată împreună cu dermatologi



Ca lider în tehnologia pentru sănătate, Philips a dezvoltat Lumea IPL în consultare cu dermatologi, pentru utilizare ușoară și eficientă în siguranța casei tale. Derivat din tehnologia utilizată în saloanele profesionale, Lumea IPL oferă un tratament delicat, chiar și în zonele sensibile.

Caracteristici exclusive SkinAI

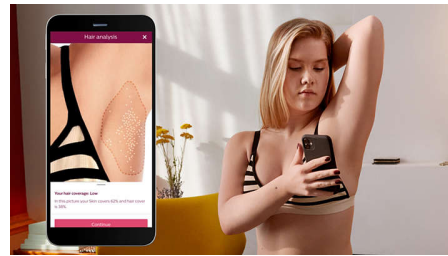

Aplicația noastră gratuită de instruire oferă îndrumare pas cu pas, acum cu tehnologia exclusivă SkinAI pentru a analiza părul corporal și a urmări reducerea acestuia.

Potrivit pentru majoritatea tipurilor de piele și păr



Tehnologia IPL are nevoie de contrast între pigmentul din culoarea părului și pigmentul din tonul pielii, prin urmare funcționează pe părul natural blond închis, castaniu și negru și cu tonuri ale pielii de la nuanțe deschise până la maro închis (I-V).

Specificații

Specificații tehnice pentru accesorii

Accesoriu pentru tratamentul corpului: Formă: curbat convex, Dimensiunea ferestrei: 4,1 cm², Tratament adaptat pentru corp: picioare, brațe și abdomen

Accesoriu pentru tratamentul feței: Formă: plat, Dimensiunea ferestrei: 2 cm², filtru suplimentar, Tratament adaptat pentru față: buza superioară, bărbie și maxilar

Accesoriu pentru tratament de precizie: Formă: curbat concav, Dimensiunea ferestrei: 3 cm², Tratament adaptat pentru zona inghinală și zona axilară

Siguranță și setări reglabile

Filtru UV integrat: Îți protejează pielea de lumina UV

5 setări pentru energia luminii: Reglabil în funcție de tipul de piele

Sistem de siguranță integrat: Previne pulsarea neintenționată

Senzor ton de piele: Detectează nuanța pielii tale

Senzor SmartSkin: Indicarea pentru setarea corectă la cerere

Mod de aplicare

Slide și Flash: Pentru aplicare rapidă

Stamp și Flash: Pentru tratarea suprafețelor mici

Utilizare cu cablu / fără fir: Utilizare cu și fără fir

Specificații tehnice

Tip baterie: Baterie reîncărcabilă

Tensiune: 100-240 V

Lampă cu performanță ridicată: Conceput pentru a dura, 450.000 pulsații, echivalentul a 39 de ani de durată de viață a lămpii**

Serviciu

Garanție: 2 ani garanție globală + 1 an suplimentar de garanție la înregistrarea produsului în termen de 90 de zile

Articole incluse

Instrucțiuni de folosire: Manual de utilizare

Depozitare: Husă de lux

Adaptor: 19,5 V/4000 mA

Timp de aplicare

Membrului inferior: 8,5 min

Zonele axilare: 2,5 min

Zona inghinală: 2 min

Zonele feței: 1,5 min

