

PHILIPS



Aparat IPL za odstranjevanje
dlak s SenseIQ

Lumea IPL 9900 Series

Senzor SmartSkin

3 pametni nastavki: telo, obraz,
natančni nastavek

Ekskluzivne funkcije v aplikaciji
na osnovi umetne inteligence

Brezžična in žična uporaba



BRI953/02

Naš najpametnejši aparat IPL z ekskluzivnimi funkcijami SkinAI

18 mesecev uživajte v popolnoma gladki koži*

Odkrijte našo najpametnejšo rešitev IPL doslej za dolgotrajno gladko kožo. Naša najhitrejša brezžična naprava Lumea IPL s tehnologijo SenseIQ ima v paketu zdaj tudi ekskluzivne funkcije SkinAI v aplikaciji Lumea IPL za analizo kože in spremljanje napredka.

Nežno in učinkovito za dolgotrajno gladko kožo

- Za hitre rezultate sta dovolj samo 2 tretmaja mesečno
- Brezžična in žična možnost za enostavno uporabo
- Razvito v sodelovanju z dermatologi za preprostost in učinkovitost

Celovita rešitev za obraz in telo

- Celovita rešitev za obraz in telo s 3 pametnimi nastavki
- Primerno za večino odtenkov kože in barv dlačic

Prilagojen tretma za odstranjevanje dlak s tehnologijo IPL

- Nežno in udobno s tehnologijo SenseIQ
- Pametna analiza dlačic po telesu s tehnologijo SkinAI

Lumea IPL 9900 Series

Aparat IPL za odstranjevanje dlak s SenselQ

BRI953/02

Značilnosti

2 tretmaja na mesec za hitre rezultate




Vsaka 2 tedna za začetek – to je pol manj tretmajev v primerjavi z aparati drugih znamk. Sledijo hitra urejanja samo enkrat na mesec. To je vse. Tretma spodnjih delov nog traja 8,5 minute.

Tehnologija SenselQ



Aparat Lumea serije 9900 ima pet nastavitev svetlobe, ki jih je mogoče preprosto nastaviti. Senzor SmartSkin zazna vaš odtенок kože in vam pomaga najti najudobnejšo nastavitev. Inteligentni nastavitvi prilagajajo tretma posameznemu predelu telesa.

Brezžična in žična možnost za enostavno uporabo

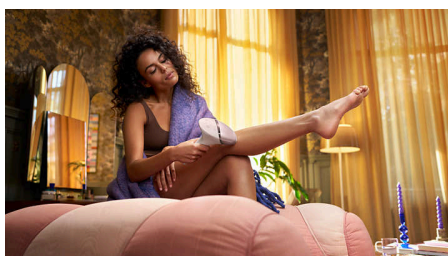

Naprava Philips Lumea je zasnovana tako, da je priročna in enostavna za uporabo. Napravo lahko uporabljate s kablom za hitro obdelavo

večjih predelov telesa, kot so noge, ali pa z brezžičnim baterijskim načinom za natančno obdelavo težko dostopnih predelov telesa.

3 pametni nastavitvi




Posebej oblikovani nastavitvi se popolnoma prilegajo oblinam vašega telesa in sprožijo najučinkovitejše programe za vsak predel telesa, ko so priključeni. Obraz: ploščata oblika in majhno okence z UV-filtrom. Telo: navznoter ukrivljena oblika z velikim okencem. Natančnost: navzven ukrivljena zasnova za težko dostopne predele.

Razvito v sodelovanju z dermatologi



Kot vodilni proizvajalec na področju zdravstvene tehnologije je družba Philips razvila aparat Lumea IPL po posvetovanju z dermatologi za preprosto in učinkovito domačo uporabo. Lumea IPL, ki izhaja iz tehnologije, ki jo uporabljajo v profesionalnih lepotnih salonih, zagotavlja nežno odstranjevanje celo na občutljivih predelih.

Ekskluzivne funkcije SkinAI

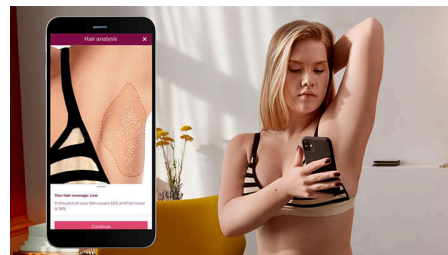

Naša brezplačna aplikacija zdaj nudi navodila po korakih z ekskluzivno tehnologijo SkinAI za analizo dlačic po telesu in spremljanje zmanjšanja poraščenosti.

Za večino vrst kože in dlačic



Tehnologija IPL deluje na podlagi kontrasta med pigmentom v barvi dlačic in pigmentom v odtenu kože, zato najbolje deluje na naravno temnih dlačicah svetle, rjave in črne barve ter na odtenu kože od svetlega do temno rjavega (I-V).

Specifikacije

Tehnični podatki za nastavke

Nastavek za telo: Oblika: konveksno zaobljeno, Velikost okenca: 4,1 cm², Prilagojen program za telo: noge, roke in trebuh

Nastavek za obraz: Oblika: ravna, Velikost okenca: 2 cm², dodaten filter, Prilagojen program za obraz: zgornja ustnica, brada in predel čeljusti

Nastavek za natančno oblikovanje: Oblika: konkavno zaobljeno, Velikost okenca: 3 cm², Prirejen tretma za predele bikinija in pod pazduh

Varnost in prilagodljive nastavitve

Vgrajen UV-filter: Kožo varuje pred UV-svetlobo

5 nastavitev svetlobne energije: Prilagodljivo glede na vrsto kože

Vgrajeni varnostni sistem: Preprečuje nenamerno osvetljevanje

Senzor kožnega odtenka: Zazna kožni odtenek

Senzor SmartSkin: Pravi prikaz nastavitve na ukaz

Način uporabe

Pomik in osvetlitev: Za hitro uporabo

Pritisk in osvetlitev: Za uporabo na manjših predelih

Žična/brezžična uporaba: Brezžična in žična uporaba

Tehnične specifikacije

Vrsta baterije: Polnilna baterija

Napetost: 100–240 V

Visokozmogljiva sijalka: Zdržljivo zasnovano za 450.000 osvetlitev, kar je enakovredno 39-letni življenjski dobi sijalke**

Servis

Garancija: 2 leti globalne garancije in 1 dodatno leto garancije ob registraciji izdelka v roku 90 dni

Priloženi predmeti

Navodila za uporabo: Uporabniški priročnik

Shranjevanje: Luksuzna torbica

Adapter: 19,5 V/4000 mA

Čas uporabe

Golen: 8,5 min

Pazduhe: 2,5 min

Predel bikinija: 2 min

Deli obraza: 1,5 min

