

PHILIPS



IPL aparat za uklanjanje
dlačica s tehn. SenseIQ

Lumea IPL 9900 Series

Senzor SmartSkin

3 pametna nastavka: tijelo, lice,
precizni

Ekskluzivna aplikacija s umjetnom
inteligencijom

Upotreba s kablom ili bežično



BRI953/02

Naš najpametniji IPL s ekskluzivnim značajkama SkinAI

Uživajte u 18 mjeseci glatke kože bez dlačica*

Otkrijte naše najpametnije IPL rješenje dosad i dugotrajnu glatkoću kože. Naš najbrži bežični IPL uređaj Lumea s tehnologijom SenseIQ sada ima ekskluzivne značajke SkinAI u aplikaciji Lumea IPL za analizu kože i praćenje napretka.

Nježno i učinkovito za dugotrajno glatku kožu

- Za brze rezultate tretirajte samo 2x mjesečno
- Praktična uporaba zahvaljujući žičnom ili bežičnom načinu rada
- Razvijeno u suradnji s dermatolozima kako bi tretman bio siguran i učinkovit

Sveobuhvatno rješenje za lice i tijelo

- Sveobuhvatno rješenje za lice i tijelo s 3 pametna nastavka
- Pogodan za većinu nijansi kože i boju dlačica

Personalizirani IPL tretman za uklanjanje dlačica

- Nježno i ugodno uz SenseIQ
- Smart Body analiza dlačica s tehnologijom SkinAI

Lumea IPL 9900 Series

IPL aparat za uklanjanje dlačica s tehn. SenseIQ

BRI953/02

Istaknute znač.

2 x mjesečno za brze rezultate



Svaka 2 tjedna na početku – to je upola manje potrebnih tretmana od drugih robnih marki. A nakon toga samo jednom mjesečno i to je to. Tretman obje potkoljenice traje svega 8,5 minuta.

Tehnologija SenseIQ



Lumea serije 9900 ima pet lako prilagodljivih postavki svjetla. Naš senzor SmartSkin očitava vašu nijansu kože i pomaže vam pronaći najugodniju postavku. Pametni nastavci prilagođavaju tretman za svako područje tijela.

For convenience with corded and cordless options



Philips Lumea osmišljen je u praktičnom dizajnu jednostavnom za rukovanje. Za brzi tretman velikih dijelova tijela, poput nogu, odaberite

žični način rada, a za precizan tretman teško dostupnih područja tijela odaberite bežični način rada na baterije.

3 pametna nastavka




Posebno dizajnirani nastavci savršeno odgovaraju oblinama tijela i aktiviraju najučinkovitije programe za svako područje tijela kada su priključeni. Lice: ravni dizajn i mali prozor s UV filtrom. Tijelo: zaobljen prema unutra s velikim prozorom. Preciznost: zaobljen prema van za teško dostupna područja.

Razvijeno u suradnji s dermatolozima



Kao predvodnik u zdravstvenoj tehnologiji, tvrtka Philips je u suradnji s dermatolozima razvila Lumeu IPL za jednostavnu i učinkovitu upotrebu u sigurnosti vašeg doma. Nastala iz tehnologije koja se upotrebljava u profesionalnim salonima, Lumea IPL pruža nježan tretman, čak i na osjetljivim područjima.

Ekskluzivne značajke SkinAI

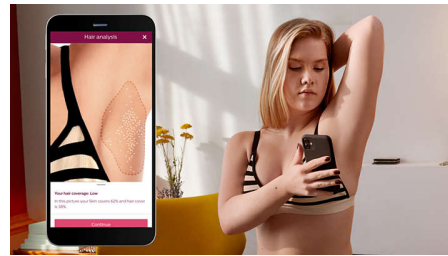

Naša besplatna aplikacija sada pruža detaljne upute uz ekskluzivnu tehnologiju SkinAI za analizu vaših dlačica na tijelu i praćenje smanjenja dlačica.

Za većinu tipova kože i dlačica



IPL treba kontrast između pigmenta boje dlačica i pigmenta boje kože pa stoga djeluje na prirodno tamnoplavu, smeđu i crnu kosu te na nijanse kože od svijetle do tamno smeđe (I – IV).

Specifikacije

Tehnički podaci za nastavke

Nastavak za tijelo: Oblik: Konveksno zaobljen, Veličina prozora: 4,1 cm², Prilagođeni tretman za tijelo; noge, ruke i trbuh

Nastavak za lice: Oblik: plosnati, Veličina prozora: 2 cm², dodatni filter, Prilagođeni tretman za lice: gornja usna, brada i linija čeljusti

Nastavak za osjetljiva područja: Oblik: konkavno zaobljen, Veličina prozora: 3 cm², Prilagođeni tretman za bikini područja i područja ispod pazuha

Sigurnost i prilagodljive postavke

Integrirani UV filter: Štiti kožu od UV zračenja

5 postavki jačine svjetlosti: Može se prilagoditi prema vašem tipu kože

Integrirani sigurnosni sustav: Sprječava nehotično odašiljanje svjetlosnih impulsa

Senzor nijanse kože: Otkriva nijansu kože

Senzor SmartSkin: Indikator odgovarajuće postavke na zahtjev

Način primjene

"Slide and Flash": Za brzu primjenu

"Stamp and Flash": Za primjenu na manjim područjima

Žično/bežično: Upotreba s kabelom ili bežično

Tehničke specifikacije

Vrsta baterije: Punjiva baterija

Napon: 100-240 V

Snažna žarulja: Napravljen da traje, 450.000 svjetlosnih impulsa što odgovara 39 godina trajanja lampe**

Servis

Jamstvo: Međunarodno 2-godišnje jamstvo plus 1 dodatna godina jamstva nakon registracije proizvoda u roku od 90 dana

Predmeti u kompletu

Upute za uporabu: Upute

Spremanje: Luksuzna torbica

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Vrijeme primjene

Potkoljenica: 8,5 min

Pazusi: 2,5 min

Bikini linija: 2 min

Lice: 1,5 min

