

PHILIPS



Aparat IPL za odstranjevanje
dlačic s SenseIQ

Lumea IPL 8000 Series

Senzor SmartSkin

4 pametni nastavki: telo, obraz,
predel bikinija, pazduhe

Aplikacija Lumea IPL

Uporaba s kablom



BRI949/00

Prilagojeno vam s tehnologijo SenseIQ

Uživajte v gladki koži brez dlavic kar 12 mesecev*

Uživajte v hitrem in prilagojenem tretmaju z našim izdelkom Lumea IPL serije 8000. Tehnologija SenseIQ s pametnimi nastavki in aplikacijo Lumea IPL poskrbi za dolgotrajno gladko kožo.

Nežno in učinkovito za dolgotrajno gladko kožo

- Hitri rezultati s tretmaji le na vsaka 2 tedna
- Razvito v sodelovanju z dermatologi za preprostost in učinkovitost
- Zelo dolg kabel za dodatno prilagodljivost pri tretmaji

Celovita rešitev za obraz in telo

- Celovita rešitev za obraz in telo s 4 pametnimi nastavki
- Priložen prirezovalnik v obliki pisala Satin Compact
- Primerno za večino odtenkov kože in barv dlavic

Prilagojen tretma za odstranjevanje dlak s tehnologijo IPL

- Nežno in udobno s tehnologijo SenseIQ
- Izboljšajte izvajanje tretmaja z aplikacijo Philips Lumea IPL

Lumea IPL 8000 Series

Aparat IPL za odstranjevanje dlačic s SenseIQ

BRI949/00

Značilnosti

2 tretmaja na mesec za hitre rezultate




Začetna faza obsega 4 tretmaje le na vsaka 2 tedna, kar je pol manj kot pri drugih znamkah. Rezultate nato vzdržujete z mesečnim hitrim urejanjem.

Tehnologija SenseIQ



Aparat Lumea serije 8000 ima pet nastavitev svetlobe, ki jih je mogoče preprosto nastaviti. Senzor SmartSkin zazna vaš odtенок kože in vam pomaga najti najudobnejšo nastavitvev. Inteligentni nastavki prilagajajo tretma posameznemu predelu telesa.

Zelo dolg kabel

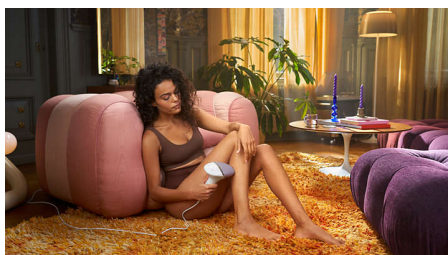

Priročen za uporabo, saj njegov zelo dolg kabel omogoča preprost dostop in več manevrskega prostora.

4 pametni nastavki




Posebej oblikovani nastavki se popolnoma prilagajajo oblinam vašega telesa in sprožijo najučinkovitejše programe za vsak predel telesa, ko so priključeni. Obraz: ploščata oblika in majhno okence z UV-filtru. Telo: navznoter ukrivljena oblika z velikim okencem. Bikini in pazduhe: navzven ukrivljena oblika za težko dostopne predele.

Razvito v sodelovanju z dermatologi



Kot vodilni proizvajalec na področju zdravstvene tehnologije je družba Philips razvila aparat Lumea IPL po posvetovanju z dermatologi za preprosto in učinkovito domačo uporabo. Lumea IPL, ki izhaja iz tehnologije, ki jo uporabljajo v profesionalnih lepotnih salonih, zagotavlja nežno odstranjevanje celo na občutljivih predelih.

Aplikacija Philips Lumea IPL

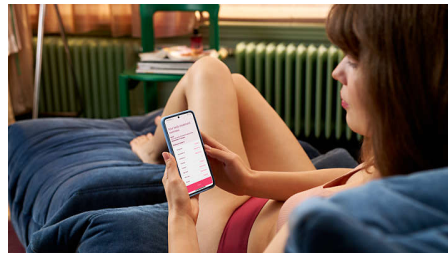

Naša brezplačna aplikacija za vadbo vam pomaga načrtovati tretmaje in držati se razporeda, nato pa vas vodi od koraka do koraka skozi posamezen tretma. Preneslo jo je že več kot 2,1 milijona uporabnikov.

Prizezovalnik v obliki pisala Satin Compact



Izpopolnite vsakodnevno lepotno rutino: prizezovalnik v obliki pisala Satin Compact je diskreten lepotni pripomoček za na pot, ki omogoča hitro in enostavno odstranjevanje tudi najtanjših dlačic na obrazu.

Za večino vrst kože in dlačic



Tehnologija IPL deluje na podlagi kontrasta med pigmentom v barvi dlačic in pigmentom v odtenu kože, zato najbolje deluje na naravno temnih dlačicah svetle, rjave in črne barve ter na odtenu kože od svetlega do temno rjavega (I-V).

Specifikacije

Tehnični podatki za nastavke

Nastavek za telo: Oblika: konveksno zaobljeno, Velikost okenca: 4,1 cm², Prilagojen program za telo: noge, roke in trebuh

Nastavek za obraz: Oblika: ravna, Velikost okenca: 2 cm², dodaten filter, Prilagojen program za obraz: zgornja ustnica, brada in predel čeljusti

Nastavek za predel bikinija: Oblika: konkavno zaobljeno, Velikost okenca: 3 cm², Prilagojen program za občutljive intimne predele

Nastavek za pazduhe: Oblika: konkavno zaobljeno, Velikost okenca: 3 cm², Prilagojen program za pazduhe

Varnost in prilagodljive nastavitve

Vgrajen UV-filer: Kožo varuje pred UV-svetlobo
5 nastavitvev svetlobne energije: Prilagodljivo glede na vrsto kože

Vgrajeni varnostni sistem: Preprečuje

nenamerno osvetljevanje

Senzor SmartSkin: Pravi prikaz nastavitve na ukaz

Način uporabe

Pomik in osvetlitev: Za hitro uporabo

Pritisk in osvetlitev: Za uporabo na manjših predelih

Žična/brezžična uporaba: Uporaba s kablom

Tehnične specifikacije

Napetost: 100–240 V

Visokozmogljiva sijalka: Zdržljivo zasnovano za 450.000 osvetlitev, kar je enakovredno 39-letni življenjski dobi sijalke**

Servis

Garancija: 2 leti globalne garancije in 1 dodatno leto garancije ob registraciji izdelka v roku 90 dni

Priloženi predmeti

Navodila za uporabo: Uporabniški priročnik

Shranjevanje: Kozmetična torbica

Adapter: 19,5 V/4000 mA

Čas uporabe

Pazduhe: 2,5 min

Predel bikinija: 2 min

Deli obraza: 1,5 min

Spodnji del nog: 8,5 min

Prerezovalnik v obliki pisala

Enostavna uporaba: Kompakten ročaj

Napajanje: Baterija AAA

Dodatki: Glavnik za obrvi, Ščetka za čiščenje

