

PHILIPS

IPL uređaj za
uklanjanje dlačica

Lumea IPL 7000
Series

5 ručnih postavki intenziteta

2 nastavka: tijelo, lice

Aplikacija Lumea IPL

Korištenje s kabelom

BRI922/00



Sjajni rezultati, odlična vrijednost

Uživajte u 12 mjeseci glatke kože bez dlačica*

Glatka koža bez dlačica s našom serijom Lumea IPL 7000. Tretmani su nježni i učinkoviti uz dodatke za svako područje tijela.

Nježno i učinkovito za dugotrajno glatku kožu

- Tretirajte samo 2x mjesečno za brze rezultate
- Razvijeno u suradnji s dermatolozima
- Izuzetno dugačak kabel za dodatnu fleksibilnost tijekom tretmana

Sveobuhvatno rješenje za lice i tijelo

- Sveobuhvatno rješenje za lice i tijelo s 2 nastavka
- Isporučuje se s malim čistačem lica VisaPure
- Pogodno za širok raspon nijansi kože i boja dlačica

Personalizirani IPL tretman za uklanjanje dlačica

- Senzor nijanse kože i 5 postavki intenziteta
- Optimizirajte svoju rutinu uz aplikaciju Philips Lumea IPL

Lumea IPL 7000 Series

IPL uređaj za uklanjanje dlačica

BRI922/00

Istaknute znač.

2x mjesečno za brze rezultate



Svaka 2 tjedna na početku – to je upola manje potrebnih tretmana od drugih robnih marki. A nakon toga slijede korekcije samo jednom mjesečno. Tretman obje potkoljenice traje svega 15 minuta.

Senzor nijanse kože



Birajte između 5 postavki intenziteta za ugodno iskustvo. Senzor nijanse kože sprječava tretiranje područja kože koja su previše tamna za IPL tretman.

Izuzetno dugačak kabel




Praktičan je za uporabu zahvaljujući izuzetno dugom kabelu za jednostavan pristup i bolju pokretljivost.

2 namjenska nastavka



Različiti nastavci za tijelo i lice uz brzinu i preciznost nježno tretiraju dlačice, čak i na osjetljivim područjima. Nastavak za lice ima integrirani filter za svjetlo za precizan tretman.

Razvijeno s dermatolozima

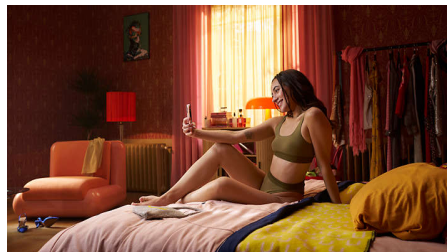

Kao predvodnik u zdravstvenoj tehnologiji, tvrtka Philips je u suradnji s dermatolozima razvila Lumea IPL za jednostavnu i učinkovitu

upotrebu iz udobnosti vašeg doma. Nastala iz tehnologije koja se upotrebljava u profesionalnim salonima, Lumea IPL pruža nježan tretman, čak i na osjetljivim područjima.

Aplikacija Philips Lumea IPL



Naša besplatna aplikacija pomaže vam da isplanirate i držite se rasporeda tretmana, a zatim vas vodi kroz svaki tretman korak po korak. Preuzelo ju je više od 2,1 milijuna korisnika.

Mali čistač lica VisaPure

Potpuna rutina uljepšavanja: mali čistač lica VisaPure kompaktan je i jednostavan uređaj za čišćenje lica za vidljivo svježiju i mekšu kožu.

Za razne tipove kože i dlačica

Suitable skin tones



Suitable body hair colors



IPL treba kontrast između pigmenta boje dlačica i pigmenta boje kože pa stoga djeluje na prirodno tamnoplavu, smeđu i crnu kosu te na nijanse kože od svijetle do srednje smeđe (I – IV).

Specifikacije

Tehnički podaci za nastavke

Nastavak za tijelo: Veličina prozora: 4,0 cm²,

Tretman za tijelo: noge, ruke, trbuh i pazuhe

Nastavak za lice: Veličina prozora: 2 cm², dodatni

filtar, Tretman za lice: gornja usna, brada i linija

čeljusti

Sigurnost i prilagodljive postavke

Integrirani UV filtar: Štiti kožu od UV zračenja

5 postavki jačine svjetlosti: Može se prilagoditi

prema vašem tipu kože

Integrirani sigurnosni sustav: Sprječava

nehotično odašiljanje svjetlosnih impulsa

Način primjene

"Slide and Flash": Za brzu primjenu

"Stamp and Flash": Za primjenu na manjim područjima

Žično/bežično: Korištenje s kabelom

Tehničke specifikacije

Snažna žarulja: Napravljen da traje, 250.000

svjetlosnih impulsa što odgovara 20 godina

trajanja lampe**

Napon: 100 – 240 V

Servis

Jamstvo: Međunarodno 2-godišnje jamstvo plus

1 dodatna godina jamstva nakon registracije

proizvoda u roku od 90 dana

Predmeti u kompletu

Upute za uporabu: Upute

Spremanje: Kozmetička torbica

Adapter: 24 V / 1500 mA

Vrijeme primjene

Potkoljenica: 15 min

Pazusi: 2,5 min

Bikini linija: 4 min

Lice: 2 min

Mali čistač lica VisaPure

Dodatna oprema: Glava četke za normalnu kožu,

Adapter za napajanje

Snaga: Adapter za napajanje

