

PHILIPS

sonicare



Punjiva sonična
četkica za zube

6100

Uklanja do 20x više naslaga

2 načina rada, 3 intenziteta

Vidljiv senzor pritiska

Trajanje baterije 21 dan



HX7408/01

Nježno čišćenje, čak i za osjetljive zube i desni

Uklanja do 20 puta više naslaga*

Philips Sonicare 6100 ima tehnologiju Sonicare nove generacije, namjenski način rada Sensitive, 3 glave četkice za uklanjanje naslaga, osjetljive zube, izbjeljivanje i niski intenzitet. Osim toga, senzor pritiska kada pacijenti previše snažno četkaju.

Nježno, nenadmašno čišćenje

- Potpuna njega za zdraviju usnu šuplinu

Jednostavno čišćenje

- Štiti desni zahvaljujući vidljivom senzoru pritiska
- Uvijek znajte kada je vrijeme za novu glavu četkice
- Personalizirajte čišćenje uz 6 postavki čišćenja

Superiorno čišćenje

- Nova generacija Sonicare tehnologije

Dizajnirana za vaš životni stil

- Optimizirajte čišćenje uz SmarTimer i BrushPacer
- Laserski zavarena za čvrstoću i izdržljivost
- Do 3 tjedna čišćenja uz jedno potpuno punjenje

Istaknute znač.

A3 All-in-One i S2 Sensitive



Glava četkice A3 Premium All-in-One dizajnirana je imajući na umu pacijente. Glavom četkice A3 pacijenti mogu postići uklanjanje do 20 puta više naslaga*, do 15 puta zdravije desni** i uklanjanje do 100 % više mrlja***. Također priloženo: zahvaljujući novoj glavi četkice S2 Sensitive napravljenoj s najmekšim Sonicare vlaknima, pacijenti mogu postići nježno čišćenje koje uklanja do 10 puta više naslaga na teško dostupnim područjima*.

Nova generacija Sonicare tehnologije



Uživajte u novoj razini oralne njege uz novu generaciju Sonicare tehnologije. Dok četkate, inovativni magnetski sustav četkice prilagođava snagu četkanja tijekom svake sesije čišćenja, pružajući optimalnu izvedbu s točno 62.000


pokreta vlakana u minuti, čak i na teško dostupnim mjestima. U međuvremenu, dinamično fluidno djelovanje podržava učinkovitost čišćenja nježno ispirajući duž linije desni i između svakog zuba, pomažući vam da postignete potpuni osjećaj čistoće svaki put kada četkate. Isprobajte Philips Sonicare i osjetite razliku.

6 postavki četkanja



Dizajnirana za osjetljive zube i desni, Philips Sonicare 6100 pacijentima pruža mogućnost odabira između dva načina pranja zuba. Način rada Sensitive osigurava nježno i temeljito čišćenje, dok se način rada Clean fokusira na uklanjanje naslaga za nenadmašnu čistoću. Za personalizirano čišćenje pacijenti mogu kombinirati bilo koji način rada s jednom od tri razine intenziteta, od visoke do niske, za pranje zuba koje u potpunosti odgovara njihovim željama.

Svjetlosni prsten za senzor pritiska

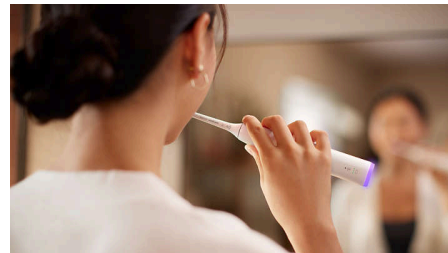

Vi možda nećete primijetiti da previše jako četkaju, ali ova četkica za zube hoće. Pametni optički senzor precizno prepoznaje suvišan pritisak četkanja, zatim bljeska ljubičasto i smanjuje vibraciju. Stoga ćete u svakom trenutku znati kada prilagoditi četkanje, a desni će ostati zaštićene.

Podsjetnik za zamjenu BrushSync



Redovita zamjena glave četkice važan je aspekt u održavanju kvalitete oralnog zdravlja. Uz tehnologiju BrushSync pacijenti će s lakoćom održati maksimalnu učinkovitost glave četkice. Prateći učestalost upotrebe i intenzitet četkanja, inovativna tehnologija potom podsjeća pacijente kada je vrijeme za novu glavu četkice.


6100

Punjiva sonična četkica za zube

HX7408/01


Istaknute znač.

Dvominutni mjerac vremena i BrushPacer

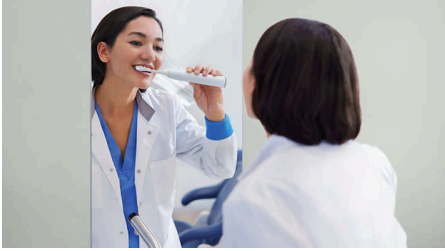

Pacijentima trebaju samo dvije minute za potpuno čišćenje i zato naš SmarTimer obavještava kad vrijeme istekne. Za ravnomjerno čišćenje cijele usne šupljine, BrushPacer dijeli pranje zuba na segmente, pri čemu kratka pauza u vibraciji daje znak da nastavite. Time se osigurava ravnomjerno čišćenje pri svakom pranju zuba.

Dizajnirano da traje

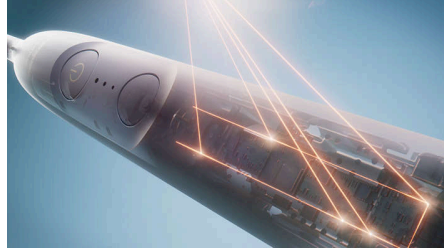

Četkice za zube Sonicare tvrtke Philips u potpunosti smo redizajnirali kako bi bile čvrste, lagane i dugotrajne. Zahvaljujući našem naprednom postupku laserskog zavarivanja, naše su četkice za zube osmišljene kao rješenje koje će pacijentima omogućiti četkanje u godinama koje dolaze.

Do 3 tjedna između punjenja



Ova četkica za zube upotrebljava bateriju visokih performansi koja je izrađena kako bi poboljšala vaše iskustvo pranja zubi. S jednim punjenjem pacijenti mogu uživati u do tri tjedna redovitog pranja zuba prije potrebe za ponovnim punjenjem.

Specifikacije

Intenziteti

Visoka: Za dodatnu snagu čišćenja

Srednja: Za svakodnevno čišćenje

Niska: Za osjetljive zube i desni

Snaga

Napon: 100 – 240 V

Tehničke specifikacije

Vrijeme rada (puna baterija do pražnjenja): 21 dan

Baterija: Može se puniti

Potrošnja energije: Stanje pripravnosti bez prikaza <0,5 W

Vrsta baterije: Linij-ionska

Dizajn i završna obrada

Boja: White (izbjeljivanje)

Servis

Jamstvo: 2-godišnje ograničeno jamstvo

Jednostavnost uporabe

Indikator baterije: Osvijetljena ikona naznačuje trajanje baterije

Kompatibilnost drške: Glave četkice lako se postavljaju pritiskom

Drška: Tanak ergonomski dizajn

Mjerač vremena: SmarTimer i BrushPacer za potpuno i temeljito četkanje

Punjenje putem USB-A veze: Adapter za napajanje nije u kompletu

Predmeti u kompletu

Drška: 1 6100 punjiva četkica za zube

Glava četkice: 30 S2 Sensitive, 30 A3 Premium All-in-One

Punjač: 1

Radne značajke čišćenja

Uklanjanje naslaga: Do 20x veća učinkovitost*

Gum Health (zdravije desni): Do 15x zdravije desni***

Izbjeljivanje: Do 100 % manje mrlja**

Brzina: 62 000 poteza četkice u minuti

Načini rada

Clean (čišćenje): Za odlično svakodnevno čišćenje

Sensitive (nježno): Za osjetljive zube i desni

Napredna tehnologija senzora

Povratne informacije za pritisak: Svjetlosni prsten svijetli ljubičasto, smanjena vibracija i pulsirajući zvuk

Podsjetnik za zamjenu: BrushSync obavještava vas kada trebate zamijeniti glavu četkice

