

PHILIPS



SenseIQ ile IPL Tüy alma cihazı

Lumea IPL 9900 Series

SmartSkin Sensörü

4 akıllı başlık: vücut, yüz, bikini bölgesi, koltuk altı

Özel yapay zeka destekli uygulama özellikleri

Kablosuz ve kablolu kullanım



BRI951/03

SenseIQ ile kablosuz kullanım kolaylığı ve kişiye özel uygulama

18 ay boyunca tüylerden arınmış, pürüzsüz cildinizin keyfini çıkarın*

En hızlı Lumea IPL cihazımızın kablosuz modeliyle zahmetsiz, kişiye özel uygulama deneyiminin keyfini çıkarın. Akıllı başlıklara sahip SenseIQ teknolojisi ve Lumea IPL uygulamasında sunulan rehberlik sayesinde, cildiniz uzun süre pürüzsüz bir görünüme sahip olur.

Uzun süreli pürüzsüz bir cilt için nazık ve etkili uygulama

- Yalnızca 2 haftada bir uygulamayla hızlı sonuçlar
- Rahat kullanım için kablolu ve kablosuz seçenekler
- Kolay ve etkili olması için dermatologlarla geliştirilmiştir

Yüz ve vücut için eksiksiz çözüm

- 4 akıllı başlıkla yüz ve vücuda yönelik eksiksiz çözüm
- Çoğu cilt tonu ve tüy rengi için uygundur

Kişiselleştirilmiş IPL tüy alma uygulaması

- SenseIQ ile hassas ve rahat bir kullanım
- SkinAI ile akıllı vücut tüyü analizi

Lumea IPL 9900 Series

SenseIQ ile IPL Tüy alma cihazı

BRI951/03

Özellikler

Hızlı sonuçlar için ayda 2 uygulama



Yalnızca 2 haftada bir 4 uygulamadan oluşan ilk aşamaya başlayın. Bu uygulama sayısı, diğer markaların uygulama sayısının yarısı kadardır. Ardından sonuçları korumak için aylık rötuşlar yapın.

SenseIQ teknolojisi



Lumea 9900 Serisi, kolay ayarlanabilir beş ışık ayarına sahiptir. SmartSkin sensörümüz, cilt tonunuzu algılar ve en konforlu ayarı bulmanıza yardımcı olur. Akıllı başlıklar, her vücut bölgesine uygun bir uygulama sağlar.

Rahat kullanım için kablolu ve kablosuz seçenekler



Philips Lumea, rahat ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlandı. Cihazı, bacaklarınız gibi geniş vücut bölgelerinde hızlı uygulama için kablolu

olarak kullanın veya ulaşılması zor bölgelerde hassas uygulama için kablosuz pil modunu tercih edin.

4 akıllı başlık




Vücudunuzun kıvrımlarına mükemmel şekilde uyum sağlayan, özel olarak tasarlanmış uygulama başlıkları takıldığında her vücut bölgesi için en etkili programları tetikler. Yüz: Düz tasarım ve UV filtreli küçük pencere. Vücut: İçe kıvrımlı tasarım ve geniş pencere. Bikini bölgesi ve Koltuk altı: Ulaşılması zor bölgeler için dış kıvrımlı.

Dermatologlarla geliştirildi



Sağlık teknolojisinde lider olan Philips; evinizde kolay, etkili ve güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için dermatologlara danışarak Lumea IPL'yi geliştirdi. Profesyonel salonlarda kullanılan teknolojiden türetilen Lumea IPL, hassas bölgelerde bile hassas uygulama sunar.

Özel SkinAI özellikleri

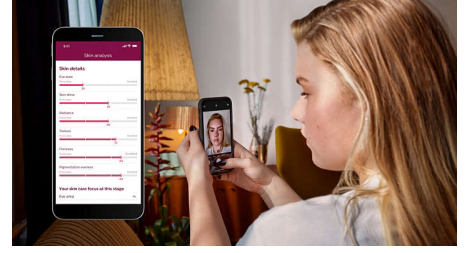

Ücretsiz rehberlik uygulamamız, vücut tüylerinizi analiz etmek ve tüylerde azalmayı takip etmek için özel SkinAI teknolojisiyle adım adım rehberlik sunar.

Çoğu cilt ve tüy tipi için



IPL uygulaması için tüy rengindeki pigmentle cilt tonundaki pigment arasında kontrast olması gerekir. Bu nedenle bu teknoloji doğal koyu sarı, kahverengi ve siyah tüylerde ve açık ila koyu kahverengi cilt tonlarında etkilidir (I-V).

Teknik Özellikler

Başlıkların teknik özellikleri

Vücut uygulama başlığı: Şekil: Dışbükey kıvrımlı, Pencere boyutu: 4,1 cm², Vücuda özel uygulama: bacaklar, kollar ve karın

Yüz uygulama başlığı: Şekil: Düz, Pencere boyutu: 2 cm², ekstra filtre, Yüze özel uygulama: dudak üstü, çene ve çene hattı

Bikini bölgesi uygulama başlığı: Şekil: İçbükey kıvrımlı, Pencere boyutu: 3 cm², Hassas bikini bölgesine özel uygulama

Koltuk altı uygulama başlığı: Şekil: İçbükey kıvrımlı, Pencere boyutu: 3 cm², Koltuk altına özel uygulama

Güvenlik ve değiştirilebilir ayarlar

Entegre UV filtresi: Cildi UV ışınlarına karşı korur

5 ışık enerjisi ayarı: Cilt tipinize göre ayarlanabilir

Entegre güvenlik sistemi: İstenmeyen ışık atışlarını önler

Cilt Tonu sensörü: Cilt tonunuzu algılar

SmartSkin sensor: İsteğe uygun doğru ayar göstergesi

Uygulama modu

Kaydırarak Uygulama: Hızlı uygulama için

Kaldırarak Uygulama: Küçük bölgelerde uygulama için

Kablolu / kablosuz kullanım: Kablosuz ve kablolu kullanım

Teknik özellikler

Gerilim: 100-240 volt

Pil tipi: Şarj edilebilir pil

Yüksek performanslı lamba: Uzun ömürlü, 450.000 ışık atışı, 39 yıllık lamba ömrüne eşdeğerdir**

Servis

Garanti: 90 gün içerisinde ürün kaydı yapılması halinde dünya çapında 2 yıl garanti + 1 yıl ek garanti

Dahil olan ürünler

Kullanım talimatları: Kullanım kılavuzu

Depolama: Lüks kılıfı

Adaptör: 19,5 V / 4000 mA

Uygulama süresi

Alt bacak: 8,5 dk

Koltuk altları: 2,5 dk

Bikini çizgisi: 2 dk

Yüz bölgeleri: 1,5 dk

Consumer Trade Item

Height: 25.2 cm

Width: 11.3 cm

Length: 26.3 cm

Net weight: 1.105 kg

Gross weight: 1.626 kg

GTIN: 8720689047708

Country of origin: SI

Outer Carton

Height: 26.8 cm

Width: 23.9 cm

Length: 27 cm

Net weight: 2.21 kg

Gross weight: 3.494 kg

GTIN: 18720689047705

Pallet Layer

Height: 26.8 cm

Width: 118 cm

Length: 120 cm

