

PHILIPS



IPL-ontharingsapparaat
met SenseIQ

Lumea IPL 9900 Series

SmartSkin-sensor

4 intelligente opzetstukken:
lichaam, gezicht, bikini, oksels

Exclusieve app-functies op basis
van AI

Zowel met als zonder snoer te
gebruiken



BRP959/00

Onze slimste IPL met exclusieve SkinAI-functies

Geniet 18 maanden lang van een haarloze, gladde huid*

Ontdek onze slimste IPL-oplossing ooit voor een langdurig gladde huid. Ons snelste draadloze Lumea IPL-apparaat met SenseIQ-technologie wordt nu geleverd met exclusieve SkinAI-functies in de Lumea IPL-app om uw huid te analyseren en uw voortgang bij te houden.

Zacht en effectief voor een langdurig gladde huid

- Behandel slechts 2x per maand voor snelle resultaten
- Voor het gemak met of zonder snoer te gebruiken
- Ontwikkeld in samenwerking met dermatologen voor gemak en effectiviteit

Volledige oplossing voor gezicht en lichaam

- Volledige oplossing voor gezicht en lichaam met 4 slimme opzetstukken
- Verkrijgbaar met Satin Compact-pentrimmer
- Geschikt voor de meeste huidskleuren en haarkleuren

Gepersonaliseerde IPL ontharingsbehandeling

- Zacht en comfortabel met SenseIQ
- Slimme huidanalyse met SkinAI

Lumea IPL 9900 Series

IPL-ontharingsapparaat met SenselQ

BRP959/00

Kenmerken

2x per maand voor snelle resultaten



Begin om de twee weken — dat is de helft van het aantal behandelingen met andere merken. Gevolgd door slechts één keer per maand een touch-up. Dat is het. Het behandelen van beide onderbenen duurt 8,5 minuten.

SenselQ-technologie



Lumea 9900-serie heeft vijf eenvoudig aanpasbare lichtinstellingen. Onze SmartSkin-sensor leest uw huidtint en helpt u de meest comfortabele instelling te vinden. Slimme opzetstukken passen de behandeling aan voor elke lichaamszone.

Voor het gemak met of zonder snoer te gebruiken



Philips Lumea is ontworpen voor handig en eenvoudig gebruik. Gebruik het apparaat met snoer om grotere lichaamsdelen zoals de benen

snel te behandelen. Gebruik het apparaat draadloos met batterijen om moeilijk bereikbare lichaamsdelen nauwkeurig te behandelen.

4 slimme opzetstukken




Speciaal ontworpen opzetstukken passen voor elke curve van uw lichaam en zetten de meest effectieve programma's voor elk lichaamsdeel aan wanneer aangesloten. Gezicht: Plat ontwerp en klein venster met UV-filter. Lichaam: Naar binnen gebogen met groot venster. Bikini en oksel: Naar buiten gebogen voor moeilijk bereikbare plaatsen.

Ontwikkeld in samenwerking met dermatologen



Als leider op het gebied van gezondheidstechnologie heeft Philips Lumea IPL ontwikkeld in overleg met dermatologen, voor eenvoudig en effectief gebruik in de veiligheid van uw huis. Lumea IPL is afgeleid van technologie die in professionele salons wordt gebruikt en biedt een zachte behandeling, zelfs op gevoelige gebieden.

Exclusieve SkinAI-functies

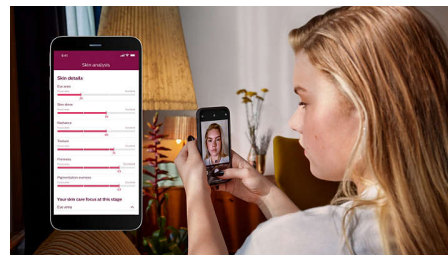

Onze gratis coaching-app biedt nu stapsgewijze begeleiding met exclusieve SkinAI-technologie om uw huid te analyseren en haarvermindering bij te houden.

Satin Compact-pentrimmer



Voltooi uw schoonheidsroutine: de Satin Compact-pentrimmer is een discreet beauty-hulpmiddel om onderweg snel en eenvoudig zelfs de fijnste gezichtsbehaaring te verwijderen.

Voor de meeste huid- en haartypes



IPL heeft contrast nodig tussen de pigmenten in de haarkleur en de huidtint en werkt daardoor op natuurlijk donkerblond, bruin en zwart haar en op huidtinten van licht tot donkerbruin (I-V).

Specificaties

Technische specificaties hulpstukken

Lichaamsopzetstuk: Vorm: bol gebogen,
Venstergrootte: 4,1 cm², Afgestemde
lichaamsbehandeling: benen, armen en buik

Opzetstuk voor het gezicht: Vorm: plat,
Venstergrootte: 2 cm², extra filter, Afgestemde
behandeling voor het gezicht: bovenlip, kin en
kaaklijn

Opzetstuk voor bikinilijn: Vorm: hol gebogen,
Venstergrootte: 3 cm², Afgestemde behandeling
voor gevoelige bikinilijn

Opzetstuk voor de oksels: Vorm: hol gebogen,
Venstergrootte: 3 cm², Afgestemde
onderarmbehandeling

Veiligheid en aan te passen standen

Geïntegreerd UV-filter: Beschermst uw huid
tegen UV-straling

5 lichtsterktes: Aanpasbaar aan uw huidtype

Geïntegreerd veiligheidssysteem: Voorkomt dat
het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

Huidtintsensor: Detecteert uw huidtint

SmartSkin-sensor: De juiste instelling op het
juiste moment

Toepassingsmodus

Glij- en flitsmodus: Voor snelle toepassing

Stap en Flits: Voor behandeling op kleine zones

Met of zonder snoer te gebruiken: Zowel met als
zonder snoer te gebruiken

Technische specificaties

Batterijtype: Oplaadbare batterij

Spanning: 100-240 volt

Lamp met hoge prestaties: Duurzaam, 450.000
pulsen, gelijk aan een levensduur voor de lamp
van 39 jaar****

Service

Garantie: 2 jaar algemene garantie plus 3 jaar
extra garantie bij productregistratie binnen 90
dagen

Meegeleverde artikelen

Instructies voor gebruik: Gebruiksaanwijzing

Opbergen: Luxe etui

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Behandeltijd

Onderbeen: 8,5 min.

Oksels: 2,5 min.

Bikinilijn: 2 min.

Delen van het gezicht: 1,5 min.

Pentrimmer

Gebruiksgemak: Compact handvat

Vermogen: AAA-batterij

Accessoires: Wenkbrauwkam,

Reinigingsborsteltje

