

PHILIPS

sonicare

Uzlabota tīrīšana

Sonic electric toothbrush

Viedais ekrāns

Progresīva Sonic tehnoloģija

Spiediena sensors

5 tīrīšanas režīmi

HX3792/12



Vieda tīrīšana personalizētam un saudzīgam rezultātam

Līdz šim nebijušas rūpes par mutes dobuma veselību!

Parāda katras dienas tīrīšanas sniegumu mazā iebūvētā viedā ekrānā. Jaunais Gum Pro režīms un mutes dobuma veselības spiediena sensors pasargās jūsu smaganas. Lai iegūtu nevainojamu tīrīšanas sniegumu, izmantojiet G3 Premium Gum Care suku uzgali.

Uzlabo zobu tīrīšanu

- Viedais ekrāns pastāvīgai tīrīšanas uzraudzībai
- Optimizējiet zobu tīrīšanu ar SmarTimer un QuadPacer
- Easy-Start palīdzēs pāriet

Aizsargā smaganas


- G3 zobu suku uzgalis absorbēs pārmērīgu spiedienu uz smaganām
- Spiediena sensors palīdz aizsargāt zobus un smaganas

Personalizēta, maiga tīrīšana

- Mūsu tehnoloģija nodrošinās efektīvu un saudzīgu tīrīšanu
- 5 režīmi: Clean, Gum Pro, Deep Clean, Sensitive, White

Izceltie produkti

Spiediena sensors

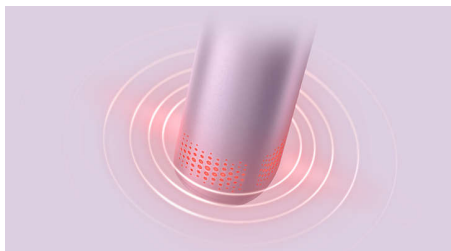

Philips Sonicare Advanced Clean ir iebūvēts progresīvs sensors, kas mēra tīrīšanas spiedienu. Tīrot ar pārmērīgu spiedienu, zobu suka tūlīt brīdinās, lai norādītu, ka jākorrigē spiediens. Brīdinājums būs redzams oranžas krāsas gaismas apli roktura apakšā.

Viedais ekrāns



Iebūvētais viedais ekrāns pastāvīgi uzrādīs tīrīšanas spiedienu, ilgumu, baterijas darbības laiku un pat paziņos par sukas uzgaļa maiņu. Tikai ar vienu klikšķi uzlabosit zobu tīrīšanas paradumus, neinstalējot lietotni.

Uzlabota Sonic tehnoloģija



Mūsu unikālā Sonic tīrīšanas kustība ir rūpīgi kalibrēta, lai radītu maigus mikroburbuļus, kas iekļūst dziļi zobu starpās. 31 000 zobu sukas kustību minūtē** maigi notīrīs zobus, sadrupinās aplikumu un aizslaucīs to projām, nodrošinot lielisku ikdienas tīrīšanas rezultātu.

SmartTimer un Quadpacer



2 minūšu SmartTimer un 30 sekunžu QuadPacer palīdz zobu tīrīšanu visās mutes dobuma vietās veikt ieteiktu laika ilgumu, lai nodrošinātu pilnīgu tīrību.


G3 Premium Gum Care birstes uzgalis



G3 Premium Gum Care zobu sukas uzgalim ir gela pārklājums. Tas maigi mīkstina spiedienu uz smaganām un zobiem, tādējādi nodrošinot


vislabāko tīrīšanu. Saru gali ir noapaļoti, un izliekums konstruēts tā, lai palielinātu saru kontaktvirsmu, aizsargātu un efektīvi notīrītu smaganas.

5 tīrīšanas režīmi

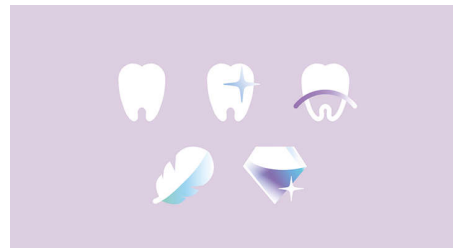

6800. sērijas Philips Sonicare Advanced Clean ir 5 režīmi visām zobu kopšanas vajadzībām. Clean režīms nodrošina izcilu ikdienas tīrīšanu. Gum Pro režīms ar trīskāršu kustības biežuma pārveidi vienlaikus nodrošina gan tīrīšanu, gan kopšanu. Deep režīms nodrošina atsvaidzinošu un rūpīgu tīrīšanu. Sensitive režīms maigi apkopj jutīgas smaganas un notīra zobus. White režīms efektīvi notīra plankumus.

Easy-Start

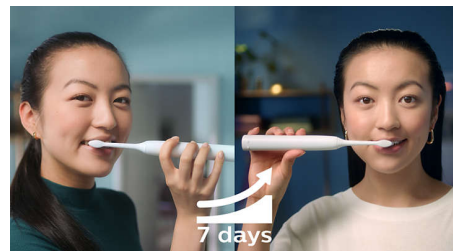

Mūsu Easy-Start programma sniedz jums iespēju pirmās 14 tīrīšanas reizēs pakāpeniski un saudzīgi palielināt jaunās zobu birstes tīrīšanas jaudu.

Sonic electric toothbrush

Uzlabota tīrīšana

HX3792/12

Specifikācijas

Strāvas padeve

Spriegums: 5 V līdzstrāva

Tehniskā specifikācija

Akumulators: Uzlādējams

Darbības laiks (no pilnas līdz tukšai): Līdz 14 dienām

Akumulatora tips: Litija jonu

Dizains un apdare

Krāsa: Gaiši rozā metālika

Serviss

Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

Vienkārša lietošana

Birstes uzgaļu sistēma: Viegli uzspaužami birstes uzgaļi

Komplektā iekļautie piederumi

Rokturis: 1 Philips Sonicare Advanced Clean

Suku uzgaļi: 1 C3 Premium Gum Care

Lādētājs: 1 lādētājs

Ceļojumu somiņa: 1

Tīrīšanas veiktspēja

Taimeris: BrushPacer un SmarTimer

Informācija par tīrīšanas spiedienu: Roktura apakšdaļā iedegas gredzens oranžā krāsā

Režīmi

Tīrīšana: Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā (2 minūtes)

Rūpīga tīrīšana: Atsvaidzinošai un rūpīgai tīrīšanai (3 minūtes)

Balta: Noņem no zobiem plankumus (2 minūtes un 30 sekundes)

Jutīgais režīms: Saudzīga smaganu tīrīšana (2 minūtes)

Gum Pro: Izcila tīrība un maiga smaganu masāža (3 minūtes)

Smart sensoru tehnoloģija

Spiediena sensors: Brīdina, ja tirot tiek lietots pārmērīgs spiediens

BrushSync uzgaļa nomaiņas atgādinājums:

Vienmēr ziniet pareizo, uzgaļa nomaiņas brīdi

