

PHILIPS



IPL juuste eemaldamise
seade koos SenseIQ-ga

Lumea IPL 9900 Series

SmartSkin-andur

3 intelligentset lisaseadet: keha,
nägu, täpsus

Eksklusiivsed
tehisintellektipõhised rakenduse
funktsioonid

Kasutatav nii juhtmeta kui ka
juhtmega



BRI953/02

Nutikaim IPL lahendus eksklusiivsete SkinAI funktsioonidega

Nautige karvavaba siledat nahka 18 kuud*

Avastage meie kõigi aegade nutikaim IPL lahendus kauakestva sileda naha jaoks. Meie kiireim juhtmevaba Lumea IPL seade koos SenseIQ tehnoloogiaga on nüüd Lumea IPL rakenduses varustatud eksklusiivsete SkinAI funktsioonidega, et analüüsida teie nahka ja jälgida teie edusamme.

Õrn ja tõhus naha kauakestva sileduse tagamiseks

- Kiired tulemused iga 2 nädala tagant tehtava protseduuriga
- Mugav juhtmega ja juhtmeta kasutamine
- Lihtsuse ja tõhususe tagamiseks töötatud välja koos dermatoloogidega

Täielik lahendus näole ja kehale

- Täielik lahendus näole ja kehale koos 3 nutika tarvikuga
- Sobib enamikule naha- ja karvatoonidele

Isikupärastatud IPL karvaeemaldus

- Õrn ja mugav SenseIQ-ga
- Nutikas kehakarvade analüüs SkinAI abil

Lumea IPL 9900 Series

IPL juuste eemaldamise seade koos SenseIQ-ga

BRI953/02

Esiletõstetud tooted

Kaks korda kuus tagab kiired tulemused



Alustage algaasis 4 protseduuriga iga 2 nädala tagant – see on poole vähem kui muude kaubamärkide puhul. Seejärel korra protseduuri tulemuste säilitamiseks kord kuus.

SenseIQ tehnoloogia



Lumea 9900 seerial on viis kergesti reguleeritavat valguseasetust. SmartSkin andur loeb teie nahatooni ja aitab teil leida kõige sobivama seadistuse. Nutikad tarvikud kohandavad iga kehapiirkonna hooldust.

For convenience with corded and cordless options



Philips Lumea on kujundatud mugavaks ja lihtsaks kasutamiseks. Kasutage juhtmega seadet kiire hoolduse jaoks suurtel kehapiirkondadel,

nagu näiteks oma jalgadel, või minge üle juhtmeta režiimile, et täpselt hooldada raskesti ligipääsetavaid kehapiirkondi.

3 nutikat tarvikut




Spetsiaalse kujundusega tarvikud sobivad täiuslikult iga kehakumerusega ja ühendatuna käivitavad kõige tõhusamad programmid iga kehapiirkonna jaoks. Näo jaoks: lame, väikse UV-filtriga töötlusalaga. Keha jaoks: nõgus, suure töötlusalaga. Täppisotsak: kumer, raskesti ligipääsetavate kohtade jaoks.

Töötatud välja koos dermatoloogidega




Juhtiva tervishoiutehnoloogia ettevõtte töötlust Philips koos dermatoloogidega välja Lumea IPL-i, et saaksite seda lihtsalt ja tõhusalt kodus kasutada. Professionaalsete ilusalongide tehnoloogiat järgiv Lumea IPL tagab õrna hoolduse ka tundlikes piirkondades.

Eksklusiivsed SkinAI funktsioonid

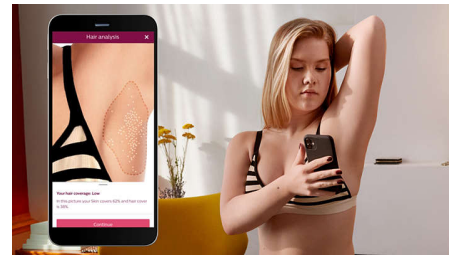

Meie tasuta koolitusrakendus tagab üksikasjalikud juhised koos eksklusiivse SkinAI tehnoloogiaga, mis võimaldab kehakarvu analüüsida ja karvade vähenemist jälgida.

Enamiku naha- ja karvatüüpide jaoks

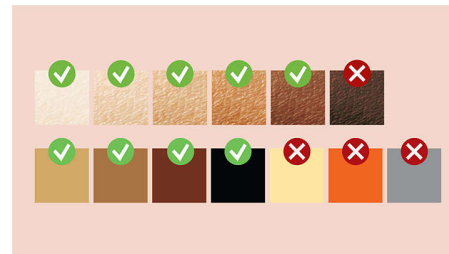

IPL vajab kontrasti karvapigmenti ja nahapigmenti vahel, seetõttu toimib loomulikult tumeblondidel, pruunidel ja mustadel karvadel ning nahatoonidel heledast kuni keskmiselt pruunini (I–V).

Spetsifikatsioon

Tarvikute tehnilised andmed

Keha hooldamiseks kasutatav tarvik: Kuju: kumer, Töötlusala suurus: 4,1 cm², Spetsiaalne hooldus kehale: jalad, käed ja kõht

Näo hooldamiseks kasutatav tarvik: Kuju: lame, Töötlusala suurus: 2 cm², lisafilter, Spetsiaalne hooldus näole: ülahuul, lõug ja lõuajoon
Delikaatsete piirkondade hooldamiseks kasutatav tarvik: Kuju: kumer, Töötlusala suurus: 3 cm², Spetsiaalne hooldus bikiinipiirkonnale ja kaenlaalustele

Ohutus ja reguleeritavad seadistused

Integreeritud UV-filter: Kaitseb nahka UV-valguse eest

5 valgusenergia seadistust: Reguleeritav vastavalt nahatüübile

Integreeritud ohutussüsteem: Vältib tahtmatut välgutamist

Nahatooni andur: Tuvastab teie nahatooni

Andur SmartSkin: Vajadusele vastav seadistuse märguanne

Rakendusviis

"Libista ja välguta": Kiireks kasutamiseks

Vajuta ja välguta: Väikeste piirkondade hooldamiseks

Juhtmega / Juhtmeta kasutuseks: Kasutatakse nii juhtmeta kui ka juhtmega

Tehnilised andmed

Pinge: 100–240 V

Aku tüüp: Laetav aku

Suure jõudlusega lamp: Vastupidav, 450 000 välgatust, mis vastab lambi 39-aastasele tööeale**

Hooldus

Garantii: 2-aastane üldgarantii + 1 lisa-aasta garantiid toote registreerimisel 90 päeva jooksul

Kaasasolevad tarvikud

Kasutusjuhised: Kasutusjuhend

Hoiustamine: Luksuslik vutlar

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Töötlemisaeg

Jalgade alaosa: 8,5 min

Kaenlaalused: 2,5 min

Bikiinipiir: 2 minutit

Näopiirkonnad: 1,5 min

